

Simulatorer og fantomer for medisinsk opplæring

Simulatorer, treningsmodeller og fantomer



Når kvalitet teller

Medisinske treningsmodeller og simulatorer

Sykepleie

Kliniske undersøkelser og ferdigheter

Ferdigheter akuttmedisin

Ultralyd

Suturteknikk



[November 2025]

svas svalland as

INNHold

Sykepleie 4

MW25	Pasientpleie simulator "Yaye"	4
MW26	Grunnleggende pasientpleie simulator "Keiko"	6
MW22	Pasientpleie simulator "Cherry"	8
MW29	Avansert oralpleie simulator	9
MW72	Strap-on stomipleie treningssimulator	10
MW2A	Kateterisering/tarmskylning simulator – mannlig	11
MW52	Kateterisering/tarmskylning simulator – kvinnelig	11
MW2C	Mannlig genitalia enhet	11
MW2D	Kvinnelig genitalia enhet	11
MW58	Simulator for suprapubisk kateterpleie, mannlig	12
MW59	Simulator for suprapubisk kateterpleie, kvinnelig	12
MW53/54/55	Strap-on simulator innsetting av kateter/klyster	13
MW8	Sondeernæring simulator (NG, OG og PEG)	14
M85	Luftveissug simulator	15
MW1	Pittingødem simulator	16
M66	Medisinsk fotpleie simulator	17
MW63	Trykksårpleie simulator	18
MW23	Pasientsimulator for skifte av bleier for voksen	19

Kliniske undersøkelser 20

MW30	Hode- og nakkepalpasjonstrener	20
MW31	Hode- og nakkepalpasjonstrener OSSE	20
MW62	Simulator for abdomen undersøkelser	21
MW45	Nasofaryngeal vattpinne prøvetakings simulator	22
MW43	Simulator for abdomen undersøkelser	23
M55	Simulator for fysisk undersøkelse – Physiko	24
M55B	Simulator for fysisk undersøkelse – Physiko Plus	26
MW10	Kardiologi pasientsimulator "K" versjon 2	28
MW28	Lungelydsimulator auskultasjonstrening LSAT versjon 2	32
MW57	Pediatrik lungelyd auskultasjonssimulator	34
MW2810	Pasientsimulator "K" Plus treningssystem versjon 2	36
MW7B	Blodtrykksmåling simulator ver. 2	38
MW12	Øre undersøkelsessimulator II	39
M82	Øye undersøkelsessimulator (3 trinn)	40
M82A	Øye undersøkelsessimulator (2 trinn)	40
MW20	Prostata og rektal simulator	41
M92	Simulator for digital rektalundersøkelse	42
M53B	Simulator for prostataundersøkelse	42
MW24	3D Kolonoskop treningssimulator NKS	43
MW39	Endoskop treningssimulator (ETS)	44
M40	Kolonoskop treningssimulator	45

Kliniske ferdigheter, injeksjon/punksjon 46

M67C	Strap-on for intramuskulær injeksjon	46
MW64	Treningssett for intramuskulær vaksinasjon	46
M99	Arteriell punksjonstrening handledd	47
MW18	Ultralydveiledet PICC treningssimulator	48

INNHold

M93UB	CVC* katetersimulator II	50
M93C	CVC* katetersimulator III	51
MW4	Ultralydveiledet torakocentese simulator	52
MW4A	Ultralydveiledet torakocentese simulator – strap-on sett –	53
MW15	Ultralydveiledet perikardiocentese simulator	54
MW17	Ultralydveiledet torakocentese/perikardiocentese simulator	55
M43B/B-B	Lumbalpunksjon simulator II	56
M43E	Ultralydkompatibel lumbal-/epidural punksjon	57
MW3	Epiduralanestesisimulator	58
MW50	Strap-on venepunksjon simulator	59
M94	Intrakutan injeksjon treningssimulator	59
MW49	Simulator intravenøs arm III	60
MW9	Simulator for innlegging av perifer venekateter	61
M74	Gluteus Maximus injeksjonssimulator	62

Kliniske ferdigheter, sutur **63**

MW56	Laparoskopisk sutursimulator – evalueringssystem kompakt –	63
MW16	Laparoskopisk sutursimulator – evalueringssystem –	64
M83	Suturering treningsmodell – fullt sett	66
M57B	Suturering evalueringssimulator	67
M57C	Laparoskopisk suturering evalueringssimulator	67

Kliniske ferdigheter, akuttmedisin **68**

MW11	Vanskelig luftveishåndtering simulator – evalueringssystem –	68
MW13	Vanskelig luftveishåndtering simulator – treningsmodell –	72
MW14	Vanskelig luftveishåndtering simulator – demonstrasjonsmodell	74
MW19	Vanskelig luftveishåndtering simulator – for bronkofiberskopi	75
MW60	Trakeostomisimulator – treningsmodell	76

Ultralyd **77**

US-5	FAST/AKUTT abdomen fantom “FAST/ER FAN”	77
US-16	Fantom intravesikal urinvolum	78
US-17	Revmatoid håndfantom	79
US-18	Fundamental ultralydfantom	79
US-2	Ultralyd kvalitetssikringsfantom – Universalt fantom N-365	80
US-4	Bryst ultralyd QA fantom	80
US-11	Skrotal ultralydfantom	81
US-3	Abdominal intraoperativ og laparoskopisk Ultralydfantom “IOUSFAN”	82
US-1B	Ultralydundersøkelse treningsfantom “ABDFAN”	83
US-1	Ultralydundersøkelse treningsfantom “ECHOZY”	83
US-22	Dual modalitet abdomen fantom (CT, ultralyd)	84
US-19	Lunge ultralyd treningsfantom ECHOLUNG	85
US-20	Ultralydguidet fantom for sondenæring	86
US-21	DVT (Dyp venetrombose) fantom (ultralyd)	87
US-23	Rektal- og blære-ultralydfantom	88

Notater	89
---------	----

Kontaktinformasjon	90
--------------------	----

Pasientpleie simulator "Yaye"

MW25




Se demofilm på YouTube



Med sine ulike pasientinnstillinger og en rekke treningsfunksjoner, tilrettelegger "Yaye" for omfattende trening i ferdigheter for kommunehelsetjenesten, sykehjem og for sykepleie i sykehus.

Med opplæring i mer enn 40 forskjellige ferdigheter, gir denne pasientsimulatoren verdifull opplæring til en rekke lærekandidater fra studenter til erfarne sykepleiere.

Treningselementer

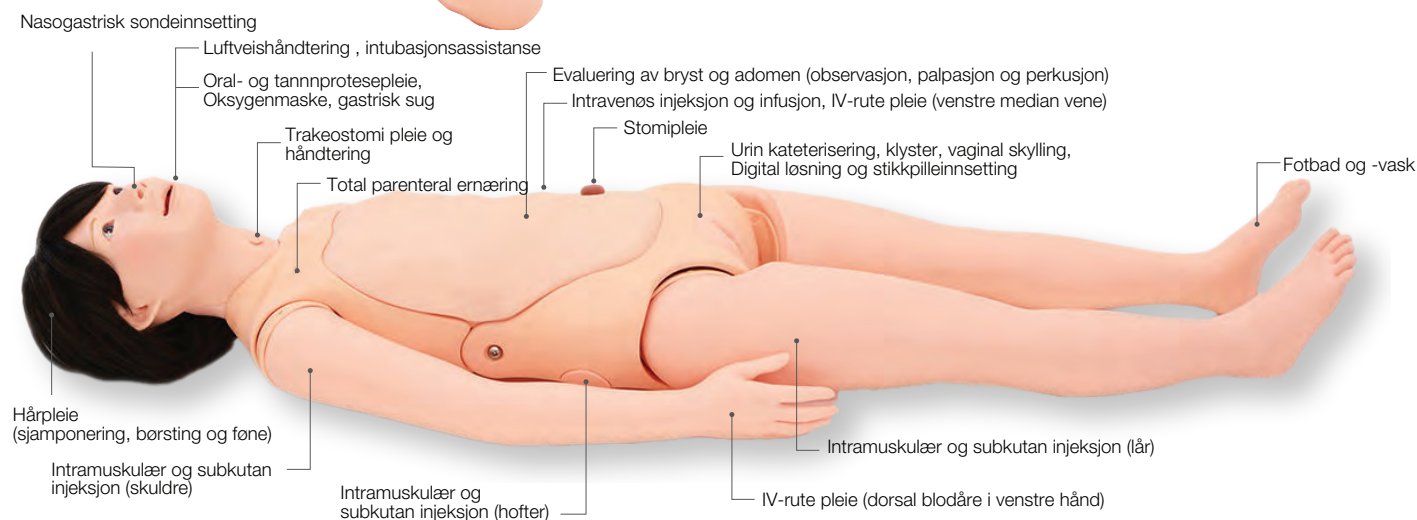

Næring

- Sondernæring (oral/nasal)

Eliminasjon

- Klyster
- Urin kateterisering
- Stomipleie
- Tarmskylling
- Bekken praksis
- Total parenteral ernæring

Fysisk trening

- Kroppsposisjonering
- Passiv trening
- Rullestol overføring

Hygiene

- Oralpleie
- Bading i sengen
- Delvis bading
- Klesskifte
- Perineal pleie
- Hårpleie
- Sminke / utseende

Luftveishåndtering

- Oksygen inhalasjon
- Luftveis sug
- Posturalt drenering
- Trakeostomi pleie

Sårpleie

- Trykksårpleie
- Bandasjering

Medisinering

- Sentralt venekateter pleie
- Subkutan injeksjon
- Intramuskulær injeksjon
- Intravenøs injeksjon og infusjon
- Klyster og stikkpiller
- Per vaginal medisinerer

Kritisk pleie

- Intubasjonsassistanse
- Brystkompresjoner
- Luftveishåndtering

Evaluerer

- Evaluerer av bryst og adomen
- Prosedyre for vital evaluering

Smertebehandlingen

- Fomentasjon

Annet

- Magepumping
- Vaginal skylling
- Post mortem pleie

Egenskaper

EVALUERING AV BRYST OG ABDOMEN

Myk og elastisk abdomen tillater dyp palpasjon



- Thoracoabdominal inspeksjon, palpasjon og perkusjon
- Anatomiske landemerker og bløtvev gir realistisk trening



UTSEENDE VARIASJONER

Pasientvarianter med ulik alder, kjønn og personlighet



Variasjoner i ansiktsmasker, parykker og eksterne genitalia tilbyr store muligheter for simuleringsinnstillinger og realistisk trening.



Enkel transformasjon

* Den eldre ansiktsmasken og grå parykk er valgfrie deler.

INFUSJONSPLEIE OG HÅNDTERING

Hensynsfull IV-rute trening



- **Venstre median vene:**
IV-injeksjon, infusjon, sikring av kanyler med kirurgisk tape
- **Venstre hånd dorsal vene:**
Sikring kanyler med tape, omsorg under infusjon



INTUBASJONSASSISTANSE

Luftveishåndtering og HLR



Opplæring av intubasjonsassistanse kan utføres i omgivelser som intensivbehandling under perioperativ fase og i intensivavdeling.

- Klargjøring av utstyret
- Oral intubasjon (laryngoskop og video laryngoskop)
- Bekreftelse av vellykket ventilasjon ved:
 - Observasjon av thoraxbevegelse (lungeutvidelse)
 - Auskultasjon av brystet
- Sikring av slangen med kirurgisk tape
- Brystkompresjon

Spesifikasjoner:

Sett inkluderer		Reservedeler	
1 Mannekeng	1 sett med simulerte stikkpiller	(11404-020) ansiktsmaske (ung)	(11251-330) sett med simulert avføring
1 Tannprotese	1 sett med simulerte avføring	(11404-040) parykk (kvinnelig)	(11251-320) sett med simulerte stikkpiller
1 Parykk (svart)	1 glidemiddel (for luftveissuge o.l.)	(11404-060) kvinnelig genitalia (kateterisering, klyster)	(11251-040) 2 lår injeksjonspads
1 Ansiktsmaske (ung)	1 glidemiddel (for kateterisering o.l.)	(11251-310) kvinnelig genitalia (Stikkpille innsetting / digital løsning)	(11251-030) 2 skulder injeksjonspads
1 Injeksjonspad (median vene)	1 skyllepose	(11404-080) 6 ventiler for urin kateterisering	(11251-050) 2 hofter IM pads
2 Skulder injeksjonspads	1 dreneringspumpe (urinblære)	(11251-350) rektal ventil	(11404-050) 4 injeksjonspads (median vene)
2 Lår injeksjonspads	1 dreneringspumpe (rektum)		(11229-050) glidemiddel (for luftveissuge o.l.)
2 Hofter IM pads	1 dreneringsslange		(11381-800) glidemiddel for kateterisering)
1 Kvinnelig genitalia (kateterisering)	1 pyjamas		
1 Kvinnelig genitalia (Stikkpille innsetting/digital løsning)	1 brukermanual		
Spesifikasjoner		Valgfrie deler	
Størrelse: 152 cm, 17 kg		(11404-070) mannlig genitalia	
Materialer: Myk harpiks, latexfri		(11404-010) ansiktsmaske (eldre)	
		(11404-030) parykk (grå)	

Grunnleggende pasientpleie simulator "Keiko"

MW26



Se demofilm på YouTube



Egenskaper

Keiko er en rimelig høykvalitets pasientsimulator, utformet for å støtte kvalitetsopplæring for sykepleiere og omsorgspersoner spesielt i daglig pleie for pasienter med kroniske lidelser, inkludert munnhygiene, trykksårpleie og CVK omsorg. Viktige egenskaper for Keiko er sømløse lemmer og evne til å sitte oppreist uten støtte. Dukken kan deles opp i 2 deler for plassbesparende lagring og transport.


Grunnleggende pasientpleie



Oral pleie

Munnhygiene på sengen og rullestolen
Spesiell pleie for pasienten med næringsintubasjon

- Tannpuss hjelp
- Oral massasje
- Tannprotese pleie

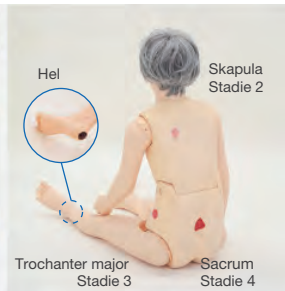

Trykksårpleie

Forstå stadier av trykksår
Støtte til de pasienter som har trykksår

- Kroppsposisjonering
- Hygiene og hudpleie
- Bleiebytte




Perineal pleie

- Anatomisk korrekte kjønnsorganer med nøkkel for prosedyredetaljer
- Omfattende opplæring inkludert skifte av klær, perineal pleie og bleieskift



Kroppsposisjonering og overføring

- Kommunikasjon og forsvarlig håndtering for å endre kroppens posisjonering
- Endre kroppsposisjonering
- Overføre pasienten til en rullestol

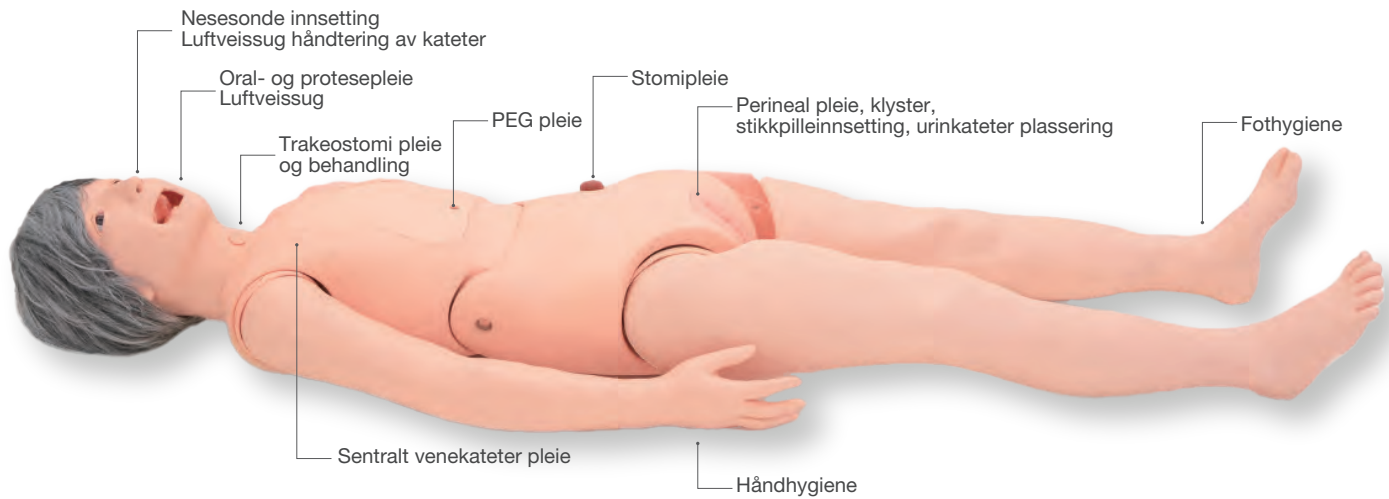

Treningselementer

- Tube innsetting for sondeernæring
- Trykksårpleie
- Sengebading, partiell bading
- postural drenering
- Urinal kateterinnleggelse
- Luftveissug (oral)
- Kroppsposisjonering
- Bekkenpraksis
- Stomipleie
- Intravenøs pleie
- Klyster
- Luftveissug (nasal og trakeostomi)
- Perineal pleie
- Oksygeninhalasjon
- PEG pleie
- Stikkpille innsetting
- Oral- og protesepleie
- Klesskifte
- Pasienthåndtering for
- Sentralt veneport pleie
- Postmortem pleie

Medisinsk forståelse



Luftveis sug og sondeernæring

Forstå prosedyre

- Luftveissug
 - oral
 - nasal og trakeostomi (* kun tube innsetting)
- Sondeernæring: oral, nasal og PEG (* kun tubeinnsetting)

Daglig pleie med medisinsk forståelse

- Stomipleie
- Sengebading for pasient med sentralt veneport
- Perineal pleie for pasient med urinkateter

Spesifikasjoner

Størrelse: H158 cm
Vekt: 15 kg

Valgfrie deler

11405-030
Pysjamas

Sett inkluderer

- | | | | |
|---------------|------------------------|---|------------------------|
| 1 Manikin | 1 Munncover for sug | 1 Monteringssett | 1 Glidemiddel |
| 1 Tannprotese | 1 Kvinnelige genitalia | 1 Brukermanual | (for luftveissug etc.) |
| 1 Parykk | 1 Mannlige genitalia | 1 Glidemiddel (for kateterisering etc.) | 1 Truser |

Reservedeler

- | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| 11405-010
Kvinnelige genitalia | 11229-060
Munncover for sug | 11404-030
Parykk | 11229-070
Simulert oppspytt |
| 11405-020
Mannlige genitalia | 11229-050
Glidemiddel (for luftveissug etc.) | 11405-030
Pysjamas | 11251-320
Simulert stikkpillesett |
| 11251-020
Tannprotese | 11381-800
Glidemiddel (for kateterisering etc.) | 12746-020
Trakeostomi tube | 11251-330
Simulerte avføring |

Pasientpleie simulator "Cherry"


MW22



Se demofilm på YouTube

Egenskaper

- Kan sitte i oppreist stilling
- Sømløse lemmer opp til fingre og tær
- TPN og IV-ruter for å simulere pasienter med kateterlinjer
- Naturlig artikkelasjon for pasienthåndtering

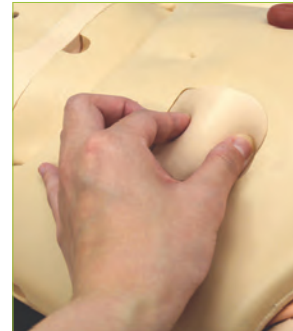

Subkutan injeksjon



Sårpleie

Treningselementer

- Urinalkateterisering
- Tarmskylling
- suppositorium innsetting
- Perineal pleie
- Subkutan injeksjon
- Stomipleie
- PEG pleie
- TPN pleie
- Plei av tannproteser og munnhule
- Magepumping
- Intramuskulær injeksjon (lemmer)
- IV innsetting og pleie (underarm)
- Trykksårbehandling (scapula, sacrum, trochanter major og hæler)
- Nasogastrisk sonde innleggelse
- Plassering av oksygen/nese-kanyler
- Kroppsposisjonering
- Pasienthåndtering
- Passiv trening
- Bytte av klær

Spesifikasjoner

Størrelse: 157 cm
Materialer: Myk harpiks, latexfri

Settet inneholder

- 1 mannekeng
- 1 tannprotese
- 1 injeksjonspad (subkutan/gluteal/femur IM/-Øvre arm IM)
- 1 kvinnelige genitalia
- 1 mannlige genitalia
- 1 flaske
- 1 sprøyte
- 1 brukermanual

Reservedeler

- 11401-010 Insulin injeksjonspute (et sett på 6)
- 11401-020 Gluteal IM-pads (et sett med 4)
- 11401-030 Kvinnenes genitalia
- 11401-040 Mannlig genitalia
- 11401-050 Skulder IM puter (et par)
- 11401-060 Lår IM-pads
- 11401-070 Sårpleiepute (et par)
- 11401-080 Tannproteser (et sett med øvre og nedre) for MW22 og MW26
- 11401-090 Mage

Avansert oralpleie simulator

MW29



Se demofilm på YouTube

En introduksjon til munnhygiene og tannbehandling

Den naturtroe munnhulen og tannprotesen med tannsykdommer gir opplæring i munnhygiene som ligger nært opp til klinisk praksis.

Egenskaper

- Denne avanserte oralpleiesimulatoren har en anatomisk korrekt munnhule, luftrør, spiserør og kommer med forskjellige tannproteser.
- Tannprotese med tannsykdom gir opplæring i vurdering og behandling av munnhulen.
- Pasientholdning og posisjon kan enkelt stilles inn.
- Simulatoren tillater trening i realistiske metoder for oral rengjøring ved hjelp av simulerte rester.
- Simulatoren gir opplæring ved hjelp av vann, samt opplæring i bruk av sug.



Treningselementer

- ◆ Periodisk kateterisering
- ◆ Observasjon av munnhulen
- ◆ Pleie av oral slimhinne
- ◆ Tannpuss
- ◆ Fjerning av belegg på tungen
- ◆ Rensing av munnhulen
- ◆ Pleie for fuktighetsbevaring
- ◆ Utskifting og vedlikehold av gebiss
- ◆ Massasje av munnhulen
- ◆ Forståelse av luftveissuge

Oral anatomi og tannproblemer

- ◆ Spaltet gane
- ◆ Matrester
- ◆ Anodontia
- ◆ Stomatitt
- ◆ Isolert tann
- ◆ Belegg på tungen
- ◆ Trange mellomrom
- ◆ Gingival resesjon
- ◆ Rotfraktur
- ◆ Tannstump

Pasienttilstander

- Komplette tannproteser
- Tannproblemer
- Tannløs
- Intratrakeal intubasjon
- Trakeotomi
- Sondeernæring

Pasientposisjoner

- Sittestilling
- Halvt sittende stilling
- Lateral stilling

Sett inkluderer

- 1 hode/hals mannekeng
- 1 mannekengsokkel
- 1 normalt gebiss
- 1 gebiss med tannsykdom
- 1 boks for oppbevaring av gebiss
- 1 simulerte rester

- 1 speil
- 1 tannbørste
- 1 gebissbørste
- 2 rengjøringspinner med svamptupp
- 1 oppbevaringskoffert
- 1 brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: B20xD33xH24,5 cm
Materialer: Myk harpiks, latexfri



Reservedeler

- 11408-020
1 normalt gebiss
- 11408-030
1 gebiss med tannsykdom
- 11408-010
1 simulerte rester

Strap-on stomipleie treningssimulator

MW72

For praktisk trening for å tilegne seg en rekke ferdigheter i stomipleie, gjennom trening med en medstudent, kollega eller i kombinasjon med en helkroppsdukke.

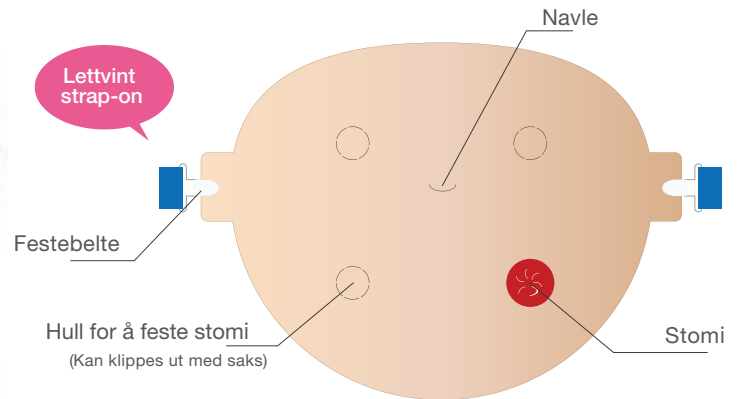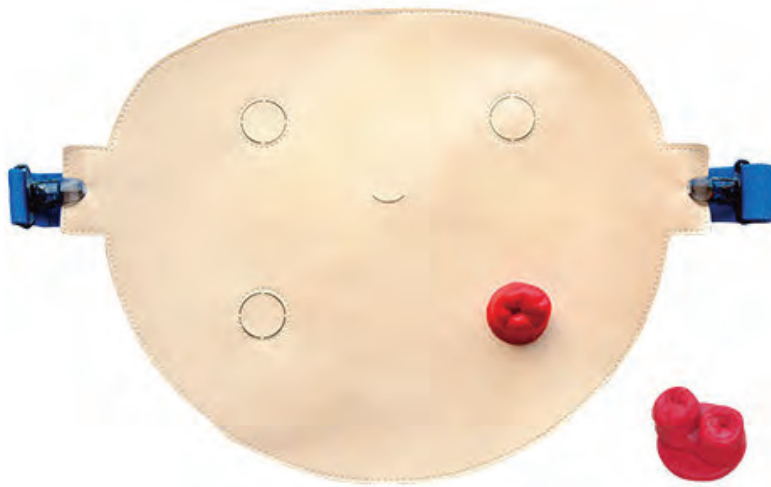

Egenskaper

- Enkel og lett å håndtere.
- To typer stomimodeller, endestomi og løkkestomi, og fire steder for å sette stomi for en rekke treningsscenarier
- Tynt materiale av huden for å simulere rynker som følge med pasientens holdning, mens den passer naturlig på magen til en medstudent
- Anti-skli overflate på huden og beltekoblinger for å lette forberedelse og opplæring.
- Simulert avføring for realistisk trening

Treningselementer

- ◆ Rengjøring og vask
- ◆ Bytte av stomipose
- ◆ Tømming av stomipose
- ◆ Respekt for pasienter gjennom simulering av en pasient



Bytte av stomipose



Rengjøring og vask



Tømming av stomipose

Spesifikasjoner

Størrelse: B35xD3xH26 cm
Materialer: Myk harpiks, hard plast

Sett variasjoner

11465-100
Treningssimulator, ett sett
11435-000
Treningssimulator, fem sett

Settet inneholder

1 Magehud
1 Endestomi
1 Løkkestomi
1 Støtte
1 Reimbelte
1 Simulert avføring
1 Brukermanual

Reservedeler

11465-040
Simulerer avføring, sett med 20 stk.
11465-010
Erstatningsskinn, 1 stk.
11465-050
Belte, 1 stk.

Kateterisering/tarmskylling simulator



Mannlig

MW2A

Kvinnelig

MW52



Se demofilm på YouTube



Grunnleggende høyskvalitets trening i mannlig og kvinnelig uretral kateterisering; perineal pleie og tarmskylling. Myke og anatomisk korrekte genitalia og realistisk følelse av kateterinnføring. Organenheten kan brukes uavhengig uten lumbar torso, og tillater trening med SP1 eller med helkroppss mannekenger i kliniske settinger. Det nylig utviklede modulsystemet muliggjør enkelt oppsett, rengjøring og vedlikehold, noe som sparer tid og kostnader for opplæringen.

1) Simulated/Standardized Patient (SP)

Egenskaper

- Myke genitalia tillater realistisk rengjøring og andre prosedyrer som for eksempel: å skille labia, å holde penis vinkelrett på kroppen
- Vellykket kateterinnføring blir bekreftet av urin (vann) utstrømning.
- Manuell blærekompresjon er mulig.
- Tarmskylling opplæring i sideleie.

Treningselementer


- ◆ Periodisk kateterisering
- ◆ Sentralvenøst kateterisering
- ◆ Perineal pleie
- ◆ Tarmskylling
- ◆ Lokalisering av uretral meatus
- ◆ Rengjøring
- ◆ Kateterinnleggelse og plassering
- ◆ Tilbaketrekking av kateter
- ◆ Manuell blærekompresjon



Innføring av kateter kan observeres gjennom et transparent blære-reservoar



Manuell blærekompresjon

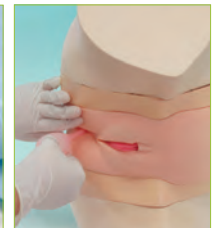

Spesifikasjoner

Størrelse: B34 x D33 x H24 cm
Materialer: Myk harpiks, latexfri

Settet inneholder

1 simulator nedre torso (underliv)
3 ventiler (én er innlemmet i den sammensatte enheten)
1 rektumsenhet
3 dreneringsslang
1 glidemiddel
1 brukermanual

Reservedeler

11381-100-01 clip (små) for urethral-røret
11381-100-02 clip (stor) for rektums-enhet
11433-000-01 clip (stor) for MW52
11381-100-03 urinblære reservoar
11381-100-04 rektumsenhet
11381-300 6 reserveventiler

11433-010 1 stk. erstatning kvinnelig hud
11433-020 2 stk. erstatning kvinnelig meatus smøremiddel
11381-800 1stk. erstatning mannlig hud
11381-410 2 stk. erstatning mannlig meatus
11381-510

Relaterte produkter

MW2C (11381-199-B)
Mannlig genitalia enhet og tilbehør for MW2A er tilgjengelig som MW2C



MW2D (11433-299-B)
Kvinnelig genitalia enhet og tilbehør for MW52 er tilgjengelig som MW2D.



Mannlig

MW2C

Kvinnelig

MW2D

Simulator for suprapubisk kateterpleie

MW58

Mannlig

En omfattende treningssimulator for suprapubisk kateterskifte

MW59

Kvinnelig



Treningselementer


- ◆ Bytte av suprapubiske katetre
- ◆ Suprapubisk kateterpleie (feste kateteret på plass)
- ◆ Plassering av transurethrale ballongkatetre.
- ◆ Klyster i sidestillinger

Egenskaper

- Bytte av suprapubiske katetre
- Trener elevene i å bytte kateter ved bruk av beregninger som katetermobilitet og bekreftelse av urinutslipp
- Suprapubisk kateterpleie (feste kateteret på plass)
- Tilrettelegger for trening i å sikre kateter med gasbind og kirurgisk tape
- Bekreftelse av kateterplassering
- Observasjon av kateteret gjennom en gjennomsiktig blærevegg




Sikring av kateter med gasbind og kirurgisk tape.

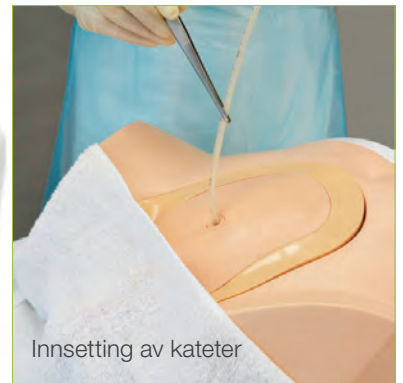

Innsetting av kateter



Observasjon av kateteret

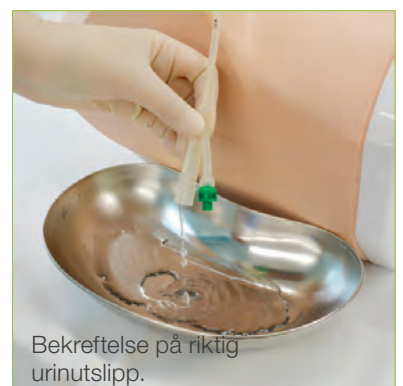

Bekreftelse på riktig urinutslipp.

Settet inneholder

- 1 simulator nedre torso (underliv)
- 1 genitaliaenhet
- 4 ventiler (2 er integrert i den sammensatte enheten)
- 1 skylleflaske
- 3 dreneringsslang
- 1 brukermanual

Strap-on simulator innsetting av kateter/klyster

MW53/54/55

En vulvamodell som kan brukes til å praktisere en rekke kateteriserings- og klyster-teknikker for trening i ekskresjonsassistanseteknikker.

Den mannlige versjon kan brukes av et bredt spekter av studenter, fra sykepleierstudenter til sykepleierstudenter og medisinstudenter.

Egenskaper

- **Anatomisk korrekt struktur gjør det lettere å tilegne seg kroppssans sammen med prosedyren**
- **Kompatibel med ballongkatetre**
- **Vann (simulert urin) renner ut når passende lengde på et kateter er satt inn**

Treningselementer

- ◆ **Rense og aseptisk teknikk**
- ◆ **Kateterinnføring og plassering**
- ◆ **Bekreftelse på urinutslipp**
- ◆ **Fjerning av kateter**
- ◆ **Klyster**

Settet inkluderer

- 1 simulert genitaliaenhet
- 1 reservoarpose
- 1 dreneringsslange
- 1 festestropp
- 1 shorts
- 1 smøremiddel
- 1 kateter for vedlikehold
- 1 brukermanual

Spesifikasjoner

- Størrelse (ca.)
mannlig B8xD21xH18 cm,
kvinnelig B8xD21xH9 cm
- Vekt (ca.)
mannlig 0,5 kg,
kvinnelig 0,4 kg



Settet inkluderer

- 1 simulert genitaliaenhet
- 1 reservoarpose
- 1 dreneringsslange
- 1 festestropp
- 1 shorts
- 1 smøremiddel
- 1 kateter for vedlikehold
- 1 brukermanual

Spesifikasjoner

- Størrelse (ca.)
mannlig B8xD21xH18 cm,
kvinnelig B8xD21xH9 cm
- Vekt (ca.)
mannlig 0,5 kg,
kvinnelig 0,4 kg

Modellvarianter



- | | |
|-----------|------------------------------|
| 11434-000 | MW53 Mannlig |
| 11435-000 | MW54 Kvinnelig |
| 11436-000 | MW55 par (Mannlig/Kvinnelig) |

Sondeernæring simulator (NG, OG og PEG)

MW8



Se demofilm på YouTube

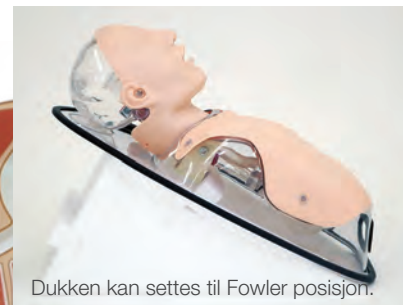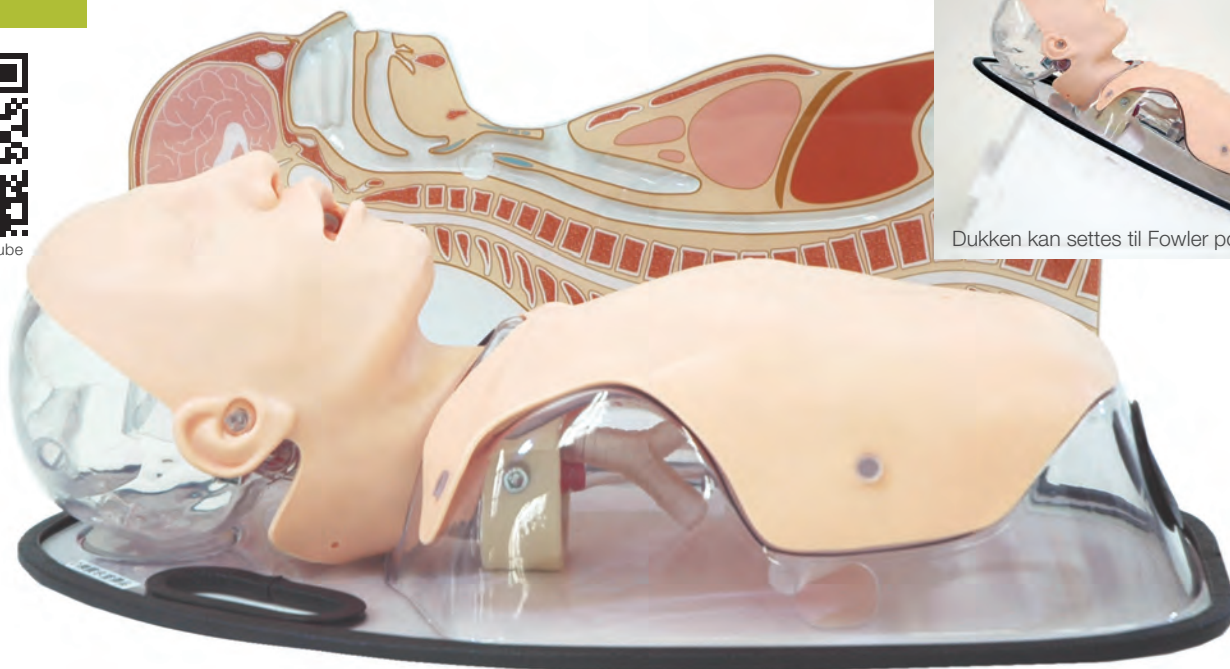

Dukken kan settes til Fowler posisjon.

Sondeernæring simulator er et effektivt treningsverktøy for omsorgspersoner og helsepersonell å erverve ferdigheter av enteral sonde ernæring. Dukken har tre ruter for ernæringssonde og tillater trening med ekte flytende matvarer.

Egenskaper

- Oral / naso gastrisk tubeinnsetting og PEG tubeinnstilling er mulig.
- Tube plassering kan bekreftes ved auskultasjon.
- En gjennomsiktige struktur tillater direkte observasjon av fremdrift og plassering av tuben.
- Dukken kan settes til Fowler posisjon.
- Ekte flytende matvarer (formler) kan administreres.
- Ernærings sonde ruter plansje og brystplate forenkler demonstrasjon og anatomisk forståelse.
- Halsen er fleksibel for å lære riktig nakke-/hodeposisjonering.

Treningselementer

- ◆ **Innføring av ernæringssonde og bekreftelse av tubeplassering (NG / OG)**
- ◆ **PEG tube innstilling og pleie**
- ◆ **Administrasjon av flytende mat (formel)**
- ◆ **Anatomisk forståelse**
- ◆ **Magepumping (Lavage)**



Intranasal og oral innføring av ernæringssonde.



Innføring av ernæringssonde

Bekreftelse på sondeplassering

Luftlyder kan høres med et stetoskop.



PEG pleie

Sondeinnføring i PEG og satt med en ballong.



Administrasjon av flytende mat (formel)

Ekte flytende mat kan administreres gjennom tre ruter.

Sett inkluderer


- 1 mannlig torso
- 1 støttesokkel
- 1 dreneringstube
- 1 trakt
- 1 plastkopp
- 1 plansje med ernæringsruter/brystanatomi
- 1 brystdeksel
- 1 glidemiddel
- 1 brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: B65 x D35 x H23 cm

Reservedeler

- 11384-030 1 ansiktsmaske
- 11386-000-01 dreneringsslange
- 11386-000-02 plansje ernæringsruter/brystanatomi
- 11392-070 band av ansiktshud
- 11229-050 1 glidemiddel

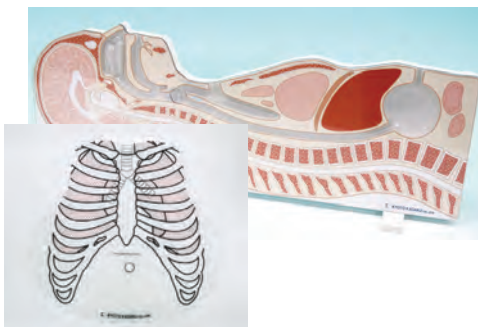

MW5

Plansjer for å lette anatomisk forståelse og demonstrasjon, viser ernæringsruter og brystanatomi, overlapper dukken og kommer med settet.

Luftveissug simulator

M85



En representasjon av menneskelig åndedrettsorganer, designet for praksis i midlertidig luftveissug og kateterinnleggelse. Effektivt verktøy med naturtro taktile kvaliteter for opplæring i luftveissug for kvelningspasienter.

Egenskaper

- Realistisk anatomi inkluderer munn, tunge, oral og nasal svelg, strupe-lokk, luftrør og spiserør.
- Kateteriseringsveier inkluderer oral, nasal eller gjennom trakeostomi åpning.
- Naturlig størrelse på organer tilrettelegger for opplæring i riktig innføringslengde på kateter.
- Sidevindu tillater observasjon av innføringsfremdrift av kateteret.
- Realistisk simulert sputum er klebrig å ta på.
- Modellen er vaskbar og kan enkelt demonteres for rengjøring.

Treningselementer

◆ Midlertidig luftveissug

- Intraoral
- Intranasal
- Endotracheal

11229-060 Munndeksel

Sputum munndeksel kan leveres som ekstradel. Dette dekselet holder det simulerte sputumet inne i munnhulen.



Nasal sug



Oral sug



Trakeal sug

Spesifikasjoner

Størrelse: B45 x D23 x H15 cm
Materialer: Myk harpiks, latexfri

Sett inkluderer

- 1 hode- og halsmodell med luftveisanatomi
- 1 flaske smøremiddel
- 2 katetre
- 1 flaske simulert sputum
- 1 metallbrett
- 1 sprøyte
- 1 oppbevaringskoffert

Reservedeler

- | | |
|-----------|---------------------|
| 11229-020 | 1 skinn med luftrør |
| 11229-070 | 1 simulert sputum |
| 11229-040 | 2 prøvekatre |
| 11229-050 | 1 smøremiddel |

Pittingødem simulator

Product Supervision

Junji Otaki,

Professor of Tokyo Medical University

MW1




Egenskaper

- Gradering av ødemer er basert på "Mosby's guide to Physical Examination (7th ed.)"
- Modellene kan festes til leggen på en SP eller en treningsdukke.
- Pittingødem er klassifisert i fire nivåer etter graden av respons på press og dybden av fordypning.
- Den avtakbare fibulaplatten gjør det mulig med treningssimulering på mykt underlag.

Treningselementer

- ◆ Lære differensiering av pittingødem: fire forskjellige nivåer, og et normalt tilfelle.
- ◆ Lære undersøkelsesprosedyrer for ødemer på leggen.

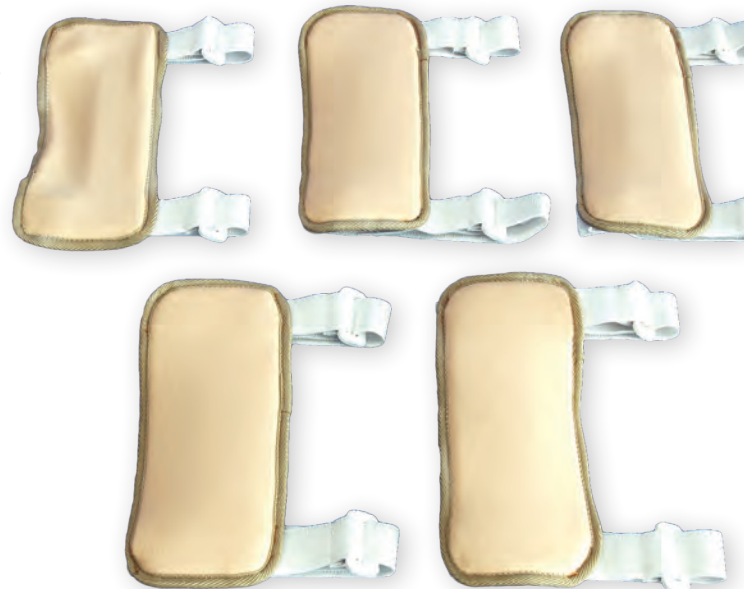

Normal

Ingen fordypning er synlig.



1+ Lys grop

Fordypning med ca. 2 mm dybde.



2+ Moderat grop

Fordypning med ca. 4 mm dybde.



3+ Dyp grop

Årer, ben og ledd er utydelige på grunn av opphovning. Fordypning med ca. 6 mm dybde.



4+ Veldig dyp grop

Fordypning med ca. 8 mm dybde.

Spesifikasjoner


Størrelse: 10 x 23 cm

Materialer: Myk harpiks, latexfri

Settet inneholder

5 modellvarianter av strap-on pittingødem 1 stk. hver

Medisinsk fotpleie simulator

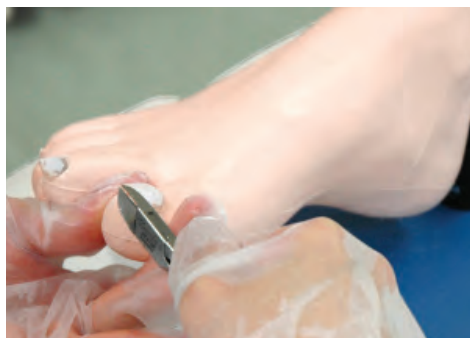

M66



Se demofilm på YouTube

Egenskaper

- Utskiftbare negler, liktorn og hornhud gir gode treningsmuligheter med naturtro følelse.
- Fotmodellen bidrar til å demonstrere anatomiske landemerker, prosedyrer for fotevaluering, fotmassasje og annen daglig behandling.

Treningselementer

- ◆ **Trimming og klipping av tånegler (fortykket negl, inngrodd negl, negl med ringorm)**
- ◆ **Trimming og fjerning av hornhud**
- ◆ **Trimming og fjerning av liktorn**
- ◆ **Fotevaluering (demonstrasjon)**
- ◆ **Fotmassasje (demonstrasjon)**

Spesifikasjoner

Størrelse: B21 x D21 x H28 cm
Materialer: Myk harpiks, latexfri

Settet inneholder

1 fotmodell med dreiestativ
20 tånegler A
(fortykket inngrodd negl)
20 tånegler B
(fortykket negl med ringorm)
10 hornhud
10 liktorn
1 brukermanual

Reservedeler

11273-020
1 reservedelssett for M66
(tånegler A 20 stk,
tånegler B 20 stk,
hornhud 10 stk og
liktorn 10 stk)

11273-030 Reserve tånegler A 20 stk
11273-040 Reserve tånegler B 20 stk
11273-050 Reserve hornhud 10 stk
11273-060 Reserve liktorn 10 stk

Trykksårsimulator

MW63

MW63 trykksårsimulator er en treningsmodell for trykksårpleie. Naturlige detaljer gir mulighet for et bredt spekter av treningsscenarier, inkludert sår-vurdering, ultralydvurdering av dypvevsskade og fjerning av nekrotisk vev.



Se demofilm på YouTube



Egenskaper

- Vurdering av trykksår
- Kompatibel med DESIGN-R 2020 *)
- Vurdering av dypt vev ved ultralyd
- Forebygging og behandling av trykksår / Rensing / Dressing
- Realistisk reproduksjon av menneskelig vev gir nøyaktig treningsmiljø


*) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32859473/>

Treningselementer

- ◆ Trykksår vurdering
- ◆ Palpasjon
- ◆ Ultralydvurdering av isjiasområdet
- ◆ Rengjøring
- ◆ Bandasjering
- ◆ Påføring av topisk medisin
- ◆ NPWT / debridement av nekrotisk vev
- ◆ Forebygging av trykksår

Tilfeller / patologi

- ◆ Sakral trykksår (4 typer)
- ◆ Større trochanter trykksår
- ◆ Isjias trykksår (3 typer inkludert dypvevsskade)

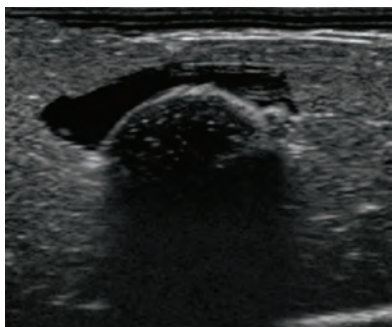

Sett for fjerning av nekrotisk vev Unike egenskaper "Tre-lags struktur"



svart og tørket vev
nekrotisk vevsområde
subkutant vev



Spesifikasjoner

Størrelse: (ca.) B44 × D40 × H38 cm
Vekt: ca. 3,8 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

Production & Development Supervision

MD. PhD, Professor Hiroto Terashi, Plastic and Reconstructive Surgery, Kobe University School of Medicine. Masaharu Sugimoto. Part-time Lecturer, Toyama University of Rehabilitation Medicine and Welfare. Madoka Noguchi, Nursing Department, Kobe University Hospital

Sett innhold – fullt sett

- 1 stk. underkropp torso
- 4 stk. typer sakral trykksårputer: stadium II, stadium III, stadium IV med granulering og stadium IV med lommer
- 1 stk. isjias trykksårpute stadium IV
- 2 stk. typer ekkoputer
- 1 stk. sett for fjerning av nekrotisk vev
- 1 stk. forbruksmaterie sett (simulert puss, blod, ekssudat og nekrotisk vev)
- 1 stk. oppbevaringsboks
- 1 stk. brukermanual


Sett innhold – basic

- 1 stk. underkropp torso
- 4 stk. typer sakral trykksårputer: stadium II, stadium III, stadium IV med granulering og stadium IV med lommer
- 1 stk. isjias trykksårpute stadium IV
- 1 stk. forbrukssett (simulert puss, blod, ekssudat og nekrotisk vev)
- 1 stk. oppbevaringsboks
- 1 stk. brukermanual

Pasientsimulator for skifte av bleier for voksen

Fremmer klar visuell forståelse ved justering av bleie for å sikre pasientens komfort og forhindre lekkasje. Riktig bruk av bleie forbedrer pasientens komfort og daglige aktiviteter (ADL) samtidig som de forebygger liggesår.

MW23

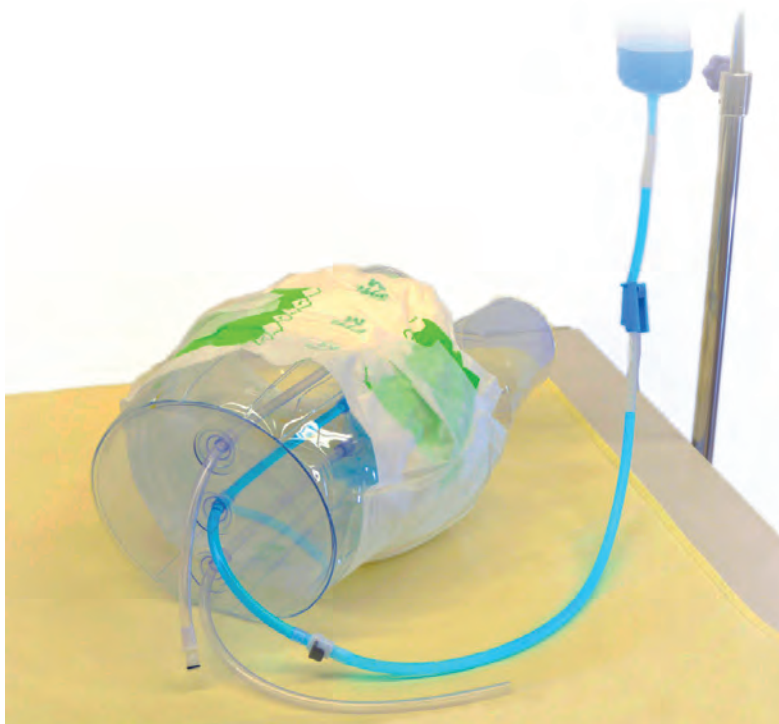

Egenskaper


- Landemerker for en bleie innstilling
- Simulert urin eller vannaktig avføring kan brukes
- Gjennomsiktig nedre del av torsoen tillater direkte observasjon av bleiens indre perspektiv
- Både mann og kvinne pasienter kan simuleres
- Lett og enkel å håndtere

Treningselementer

- ◆ **Bleieifte på voksne pasienter**
- ◆ **Detajert brukermanual medfølger**



mannlige kjønnsorganer

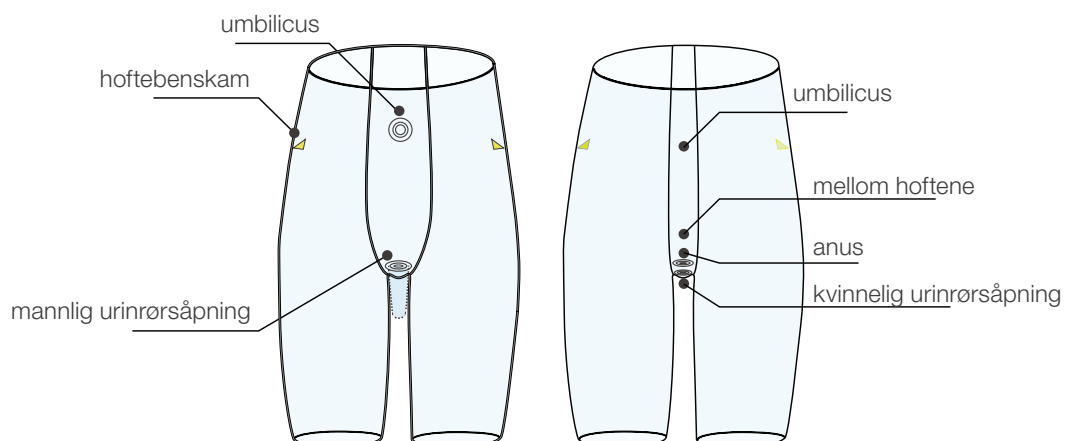

Settet inneholder

- 1 nedre torso-dukke
- 1 mannlige kjønnsorganer
- 1 vanningspose
- 1 tilkoblingsrør
- 1 sprøyte
- 1 begerglass
- 1 simulert vannaktig avføring
- 1 flaske
- 1 manuell pumpe
- 1 sett med simulert urin (sett med 10 vattpinner)
- 1 brukermanual

Reservedeler

- | | | |
|-----------|--|----------|
| 1381-800 | simulert urin (sett med 10 vattpinner) | simulert |
| 11229-070 | vannaktig avføring (sett med 3 pakker) | |
| 11402-010 | 10 bomullspinner blå | |

Hode- og nakkepalpasjonstrener

MW30



Svelging

- Svelgebevegelse for å identifisere og vurdere skjoldbruskkjertelen

Områder

- Ulike avvik

Naturtro følelse

- Smidig, spenstig og delikat tekstur.


Egenskaper

- Gir muligheter for praktisk opplæring.
- Unormale funn for å komplementere trening med sunne simulerte pasienter
- Sørg for at studentene deler den samme taktile følelsen for å spesifisere funnene
- Opprettholde objektive tilnærminger for ferdighetsvurdering

Treningselementer

- Palpasjon av hode, hals for lymfeknuter, skjoldbruskkjertel og spyttkjertler
- Kombiner palpasjonsferdighetene med funn og klinisk resonnement

Områder	Funn
1 Bakre øreknuter	Ødem/Hard
2 Occipitale noder	N/A
3 Overfladiske cervical noder	Ødem/følbar
4 Bakre cervikale noder	Ødem/følbar
5 Dype cervikale noder	Ødem/følbar
6 Pre-aurikulære noder	Ødem/Hard
7 Tonsillære noder	Ødem/følbar
8 Submandibulære noder	Ødem/følbar
9 Submentale noder	Ødem/følbar
10 Supraklavikulære noder	Ødem/Hard/Ubevegelig
11 Subklavikulære (infraklavikulære) noder	Ødem/Hard/Ubevegelig
12 Skjoldbruskkjertelen	Graves sykdom
13 Submandibulær kjertel	Så hard som en forstørret lymfeknute
14 Parotid-kjertel	Så hard som en forstørret lymfeknute

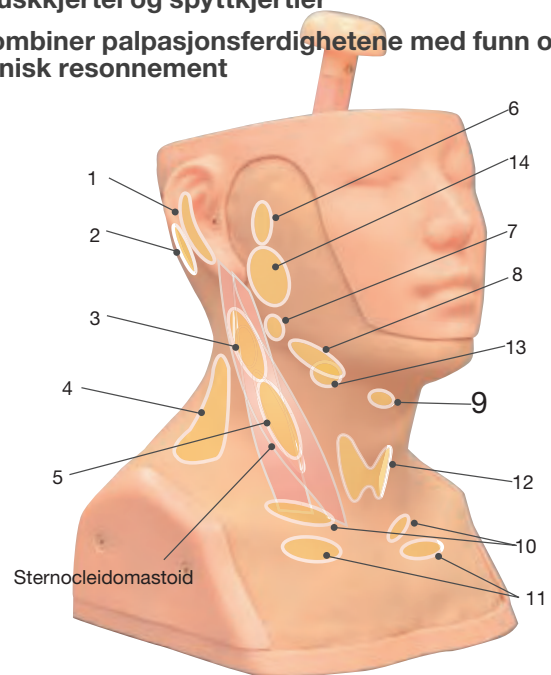

Spesifikasjoner

Størrelse: 29x29x47cm
Vekt: 6,5 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

Settet inneholder

1 hode- og nakke dukke med oppbevaringskoffer
1 brukermanual

MW31

Hode- og nakkepalpasjonstrener OSSE¹

De følbare nodene og kjertlene i standardtypen er fordelt mellom to identiske dukker for bruk i situasjoner som studenteksamener eller testing av studentenes ferdigheter.

Interne funn

Tilfelle A

venstre side: 6/1/3/10
høyre side: 4/5/13/12

Tilfelle B

venstre side: 3/13/ 9/5
høyre side: 4/11/5

¹ OSSE, Objective Structured Supervision Evaluation

Simulator for palpasjon av skjoldbruskkjertel

MW62



Svelging

Svelgebevegelse for å identifisere og vurdere skjoldbruskkjertelen.



Egenskaper

- **Lær å kjenne forskjellen** – Nøyaktig gjen-
givelse av følelsen ved palpasjon av ulike
skjoldbruskkjertelstilstander gir realistisk,
praktisk erfaring som ikke kan oppnås
gjennom bøker eller forelesninger alene.
- **Helhetlig undersøkelseskompetanse**
– Trener hele spekteret av kliniske teknik-
ker: inspeksjon, perkusjon, palpasjon og
auskultasjon, slik de utføres i virkelige
pasientsituasjoner.
- **Forbereder til virkeligheten** – Ideelt for
medisinstudenter, leger i spesialisering og
erfarne klinikere, og et effektivt verktøy til
OSCE og andre praktiske ferdighetstester.

Treningselementer

- ◆ **Treffsikker palpasjon**
Identifisere og vurdere skjoldbrusk-
kjertelens patologier med høy
nøyaktighet.
- ◆ **Støtte til klinisk resonnering**
Bruke taktil informasjon til å under-
bygge diagnostiske vurderinger.



Fire modeller med ulike patologier



Graves' sykdom
(hypertyreose forårsaket av autoimmun sykdom)

Hashimotos tyreoiditt (kronisk autoimmun betennelse i skjoldbruskkjertelen)

Skjoldbruskkjertelkreft (carcinom)

Solitar skjoldbruskkjertelcyste

Spesifikasjoner

Størrelse per modell:
B19,5 x D21 x H26 cm

Vekt per modell: 3 kg

Materialer

Myk harpiks, latexfri

Tilleggsutstyr

Karotis-bilyd ved glandula parotis og glandula submandibularis. Auskultasjon av karotis-bilyd mulig med det simulerte stetoskopet.
Delnummer 11445-030: Simulert stetoskop for MW62.




Nasofaryngeal vattpinne prøvetakingssimulator

MW45



Se demofilm på YouTube

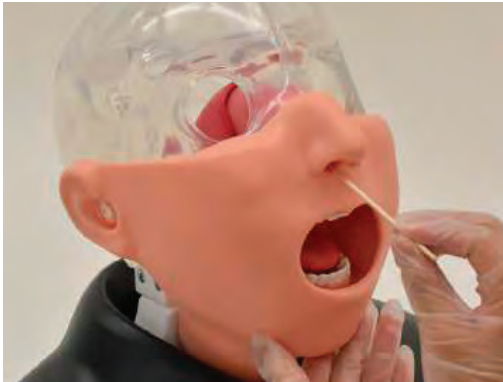


Egenskaper

- Når vattpinnen når riktig posisjon i nesehulen, blir vattpinnen pigmentert blå
- Formen på nesehulen mellom høyre og venstre er forskjellig
- Produktet leveres med en tverrsnittsmo-
dell



Treningselementer

- ◆ Trening på å ta prøver i neshulen med vatt-
pinne
- ◆ Praktisere måter å bruke tungedepressorer
med vattpinner

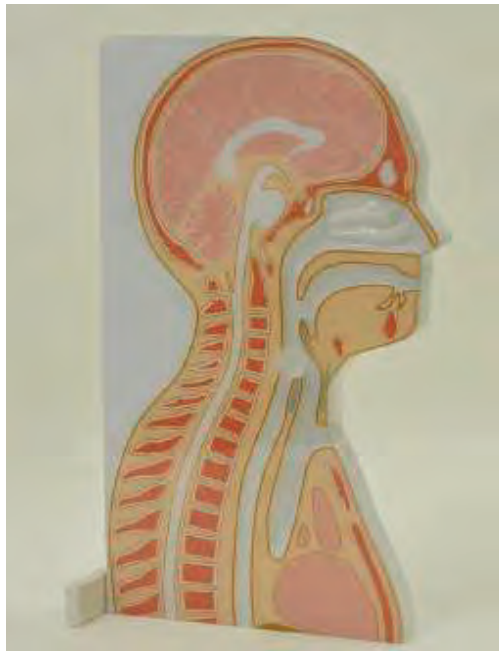

Spesifikasjoner

Størrelse: B42 x D23 x H38 cm
Vekt: 2,15 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

Settet inneholder

- 1 hodemodell
- 1 tverrsnittsmo-
dell
- 1 sprøyte 30 ml
- 1 engangskopp
- 1 eske med vattpinner for farging, 10 stk.
- 1 oppbevaringskoffert
- 1 brukermanual



Se demofilm på YouTube

Simulator for abdomen undersøkelser

Product Supervision

Takahiro Amano, M.D., Senior Advisor for Academic Affairs and Professor, International University of Health and Welfare, Honorary Director Sanno Medical Center, Japan

Kyoko Arai, RN, PHN, PhD, Professor, School of Nursing, University of Shizuoka, Japan

MW43



Utskiftbare organer



Fleksibel, elastisk og delikat tekstur



Åndedrettsbevegelse

Naturlig representasjon av taktile funksjoner i abdominal organer, som er overbevisende nok til å tjene som en målestokk i å dyrke følelsen av kontakt.

Egenskaper

- Fleksibel, elastisk, slitesterk og delikat teksturer som tillater både grunne og dype palpasjon
- Utskiftbare organer
- Åndedrettsbevegelse
- Abdominal auskultasjon

Treningselementer

◆ Visuell inspeksjon

◆ Auskultasjon

- arterie i nyrer
- abdominal aorta
- hoftearterie
- tarmlyder

◆ Palpasjon

- lever, milt, nyre, livmor og lymfom

◆ Perkusjon

- lever, milt og ribben

Benete landemerker


- Bekken
- Ribben
- Nedre ribben (brystkasse)
- Margine costali
- Xiphisternum
- Venusberget
- Anterior superior iliac spina

Lever

- Normal
- Kronisk hepatitt
- Tidlig sen levercirrhose
- Levercirrhose

Inguinalområdet

- Normal
- Lymfom

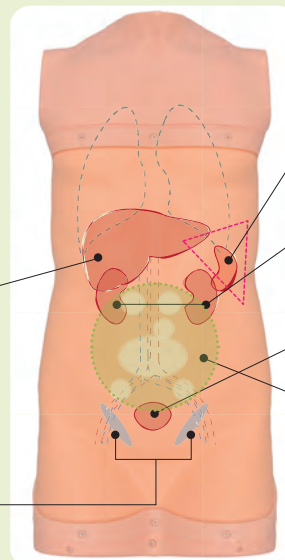

Milt

- Normal
- Forstørret
- Litt forstørret

Nyrer

- Normal
- Hydronefrose
- Polycystisk nyre

Uterus

- Normal
- Myom

Lyder

- Arterie nyrer
- Abdominal aorta
- Hoftearterie
- Tarmlyder

Spesifikasjoner

Størrelse: 40 x 80 x 20 cm

Vekt: 14 kg

Materialer: Myk harpiks, latexfri

Settet inneholder

- 1 mannlig torso enhet
- 1 talkumpulver
- 1 luftbevegelse kontrollenhet
- 2 nyrer (hydronefrose, cyster)
- 2 milt (litt forstørret, forstørret)
- 4 lever (prefektrose, cirrhose, kronisk hepatitt, normal)

- 2 inguinal lymfeknuter (normal, lymfom)
- 2 livmor (normal, fibroid)
- 1 simulert stetoskop
- 1 kontroll
- 1 strømforsyning
- 4 oppbevaringskofferter
- 1 brukermanual

Simulator for fysisk undersøkelse – Physiko

M55



Se demofilm på YouTube



Physiko er en treningssimulator for fysisk undersøkelse beregnet for opplæringsprogrammer for studenter innen medisin og sykepleie. Forhåndsinnstilte pasientscenarier tilrettelegger for trening i vurderingsprosedyrer samt praktisk kunnskap om viktige unormale funn. Egne scenarier kan opprettes for ulike opplæringsprogrammer og individuell ferdighetstrening.


Pasienttilfeller

Physiko har tolv forhåndsinnstilte pasienter som dekke typiske polikliniske problemer som brystmerter og pustevansker.

Tilfelle	Alder, kjønn	Tilstand
Brystmerter	58 år mann	Hjerteinfarkt
	55 år mann	Dissekere aortaaneurisme
	76 år kvinne	Lungeinfarkt
	28 år mann	Brystveggsmarter
Magesmerter	26 år kvinne	Tarmslyng
	19 år mann	Diaré
Bevisstløs	36 år kvinne	Intrakranial hypertensjon
	84 år kvinne	Lungebetennelse
Kortpustethet	66 år mann	Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
	70 år mann	Pulmonal fibrose
	73 år mann	Hjertesvikt
	21 år kvinne	Anemi

Redigerningsmodus

Brukere kan opprette en ny simulert pasient ved å velge hvert funn fra de innebygde data.


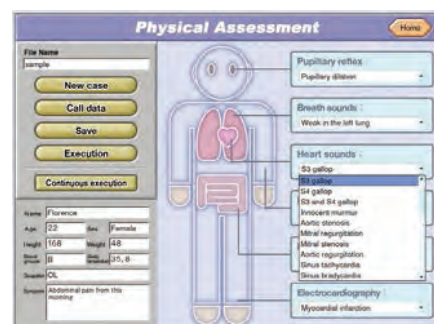


Treningselementer

Vurderingskriterier

- Pupillerefleks
- Blodtrykk
- Auskultasjon på hjertelyder
- Auskultasjon på lungelyder
- Auskultasjon på tarmlyder
- EKG simulering


Individuell ferdighetstrening

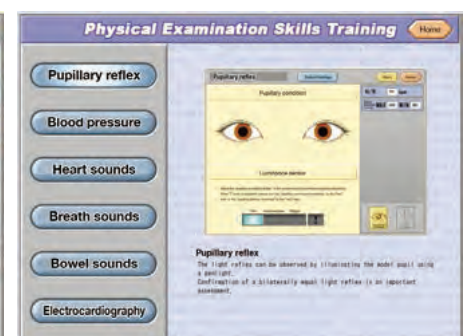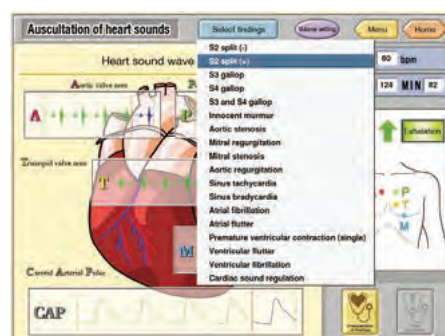

Product Supervision

M55

Toyooki Yamauchi, MD,ND, PhD
Professor
Department of Nursing
Graduate School of Medicine, Nagoya University

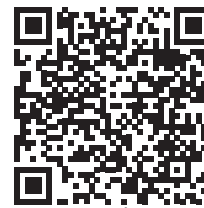

Instruksjoner på YouTube

Lær å lytte

Auskultasjonstrening: undervisning av medisinske studenter til å forutse, beskrive og identifisere funn fra fysiologiske undersøkelser. Målet med auskultasjonstreningen er å gi studentene bevisst praksis i gjenkjenning og tolkning av kliniske funn innhentet under auskultasjon av hjertelyd.

1 Hovedmeny



2 Modulseksjon



3 Pasientseksjon



4 Individuell fysiologisk vurdering



5 Hjertelydtest



Nye moduler med kontraherende scenarier

9 moduler tilrettelegger av opplæringsprogrammer for alle som studerer innen medisin og sykepleie:

- I hver modul er forhåndsdefinerte pasienter forberedt for individuell fysiologisk vurdering.
- Efter fysiologisk vurdering kan kandidatene ta en programmert hjertelydtest for en vurdering av deres kompetansenivå.

Hjerte-rytmer

Modul 1 Sinus takykardi kontra atrieflimmer

Modul 2 PVC¹ kontra atrieflimmer

Hjerte-lyder

Modul 3 Fysiologisk splitt S2 kontra S3

Modul 4 Fysiologisk splitt S2 kontra S4

Modul 5 S3 kontra S4

Hjerte-bilyder

Modul 6 Mitralinsuffisiens kontra strømningsbilyd

Modul 7 Aortastenose kontra strømningsbilyd

Modul 8 Aortastenose kontra mitralinsuffisiens

Modul 9 Aortaregurgitasjon kontra mitralklaffstenose

¹ Prematur ventrikulær kontraksjon



Sett inkluderer

- 1 mannekeng
- 1 bærbar PC
- 1 koblingsboks
- 1 sphygmomanometer enhet
- 1 sett EKG-elektroder
- 1 Sett klær
- 1 brukermanual

Spesifikasjoner

- Størrelse: 155 cm
- Strøm: AC100V 50/60Hz
- Strømforbruk: 70W
- Materialer: Myk harpiks, latexfri

Simulator for fysisk undersøkelse – Physiko Plus

M55B**Product Supervision**

Toyooki Yamauchi, MD, ND, PhD
Professor, Department of Nursing
Graduate School of Medicine Nagoya
University, Japan

Lære å lytte-funksjoner gir større muligheter for trening

«Lære å lytte»-opplæring: Å lære medisinstudenter å forutse, beskrive og identifisere funn fra den fysiske undersøkelsen. Målet med «Lære å lytte» er å gi studentene målrettet og bevisst øvelse i å gjenkjenne og tolke kliniske funn oppnådd ved auskultasjon av hjertelyder.



Egenskaper

Ni moduler med kontrasterende scenarier legger til rette for læring for alle medisn- og sykepleierstudenter.

- I hver modul forberedes forhåndsdefinerte pasientsituasjoner for individuell fysisk vurdering.
- Etter den fysiske vurderingen kan deltakerne gjennomføre en programmert test av hjertelyder.

→ Velg modul



→ Velg en pasient



→ Fysisk vurdering



→ Hjertelydtest




VIKTIGSTE FUNKSJONER

Fysisk vurderingsmodus 1


Pasienttilfeller

Physikos tolv forhåndsinnstilte pasientscenarioer dekker typiske plager som thoraxsmerter og pustevansker

Toppmeny

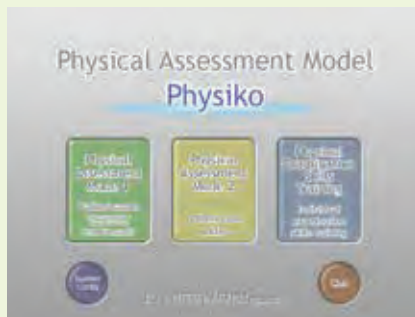

Velg en pasient

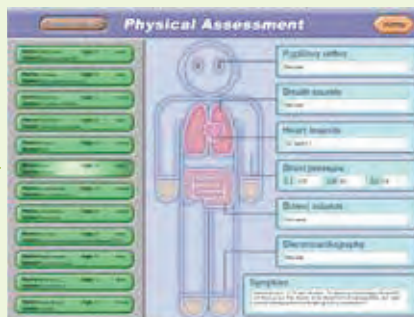


Start en økt



Tilfeller Omfattende undersøkelse av 12 typiske pasienter

Sak	Alder, kjønn	Betingelse
Thoraxsmerter	58, Mann	Hjerteinfarkt
	55, Mann	Disseksjon av aortaaneurisme
	76, kvinne	Lungeinfarkt
	28, Mann	Interkostal muskelverk
Magesmerter	26, kvinne	Ileus
	19, Mann	Diaré

Sak	Alder, kjønn	Betingelse
Bevisstløs	36, kvinne	Hjernehypertensjon
	84, kvinne	Lungebetennelse
	66, Mann	Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Tett følelse	70, Mann	Lungefibrose
	73, Mann	Hjertesvikt
	21, kvinne	Anemi

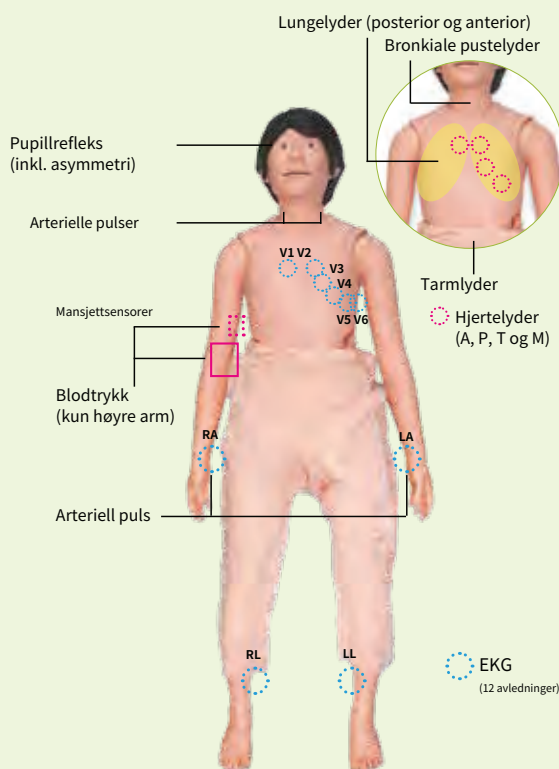

Fysisk vurderingsmodus 2

Redaktør for pasientsaker

Brukere kan opprette nye simulerte pasienter ved å velge fra de innebygde alternativene



Trening i fysisk vurderingsferdigheter

Individuell trening i eksamensferdigheter

Physiko tillater individuell opplæring i vurderingsferdigheter



Pupillrefleks
Blodtrykk
Auskultasjon av lungelyder
Auskultasjon av hjertelyder
Auskultasjon av tarmlyder
EKG-simulering

Settet inneholder

- 1 mannekeng
- 1 koblingsboks
- 1 EKG-elektrodenhet
- 1 bærbar PC
- 1 blodtrykksmålerenhet
- 1 sett med klær
- 1 mikrofon
- 1 brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: 155 cm / 61 tommer
Strøm: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Vekt: 24 kg / 53 lbs
Strømforbruk: 70 W

Materialer

Myk harpiks, hard harpiks
Lateksfri

Kardiologi pasientsimulator "K" versjon 2

MW10



Se demofilm på YouTube




"K", den velkjente modellen for verdens utdanningsinstitusjoner for medisinsk personell i over 20 år, er oppgradert for mer effektiv klinisk trening innen kardiologi.

Egenskaper

- Trådløs fjernkontroll av flere enheter (maks 5 enheter).
- Spilleliste kan opprettes.
- Berøringsskjerm kontrollpanel.
- Klar til bruk med tilkobling til strømforsyning.
- Lydene har blitt tatt opp fra virkelige pasienter, og blir reproduisert ved hjelp av et Hi-Fi lydsystem.
- Vanlige stetoskop kan brukes.
- Auskultasjonsområder som tilsvarer hjerteklaffene er plassert på en mannekeng i naturlig kroppsstørrelse.
- 52 tilfeller av arytmi/EKG-simulering
- Feilindikator
- Hele 36 tilfeller av total pasientsimulering
 - 12 tilfeller av normale hjertelyder
 - 14 tilfeller av simulert hjertesykdom
 - 10 tilfeller av arytmi simuleringer



Se instruksjoner Del 1

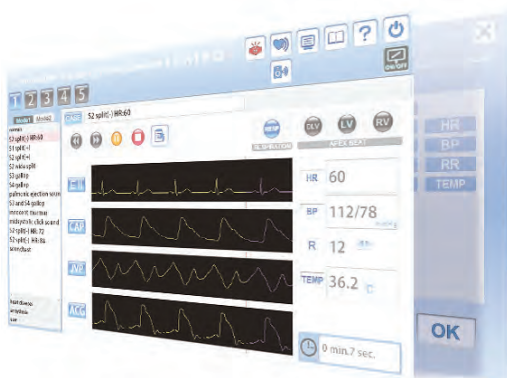

Settet inneholder

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 kardiologi anatomisk modell med sokkel | 1 dataskjerm (27 tommer) |
| 1 bord | 1 kontroll PC |
| 1 sett med høyttalersystem ¹ | 4 lærebøker |
| 1 sett med PC, tastatur og mus ¹ | 1 ribbensguide |
| 1 luftkompressorenhet ¹ | 1 deksel for lagring |
| ¹ Innebygd i enheten og kan ikke fjernes. | 1 brukermanual |
| | Innebygd hjelpefil for programvare |

Spesifikasjoner

Størrelse: B145 x D75 x H170 cm
 Verkt: 145kg/
 Materialer: Myk harpiks, hard harpiks, lateksfri

Strømforsyning

AC100-240 V, 50/60 Hz
 Strømforbruk: 400W

Product Supervision


Tsunekazu Takashina, M.D., Ph.D., F.A.C.C., F.A.H.A. President,
Japanese Educational Clinical Cardiology Society, Osaka
Masashi Shimizu, Ph.D., Professor,
Department of Mechanical and Environmental Informatics
Graduate School of Information Science and Engineering,
Tokyo Institute of Technology

Nye egenskaper

1 Opptil 5 simulatorer om gangen OSCE¹, gruppetrening og scenariobasert simulering

Opptil fem kardiologi simulatorer kan styres av ett trådløst nettbrett.

- Hver simulator kan stilles inn individuelt med forskjellige kardiale tilfelle
- Tilfeller kan kobles raskt på når som helst i løpet av treningen

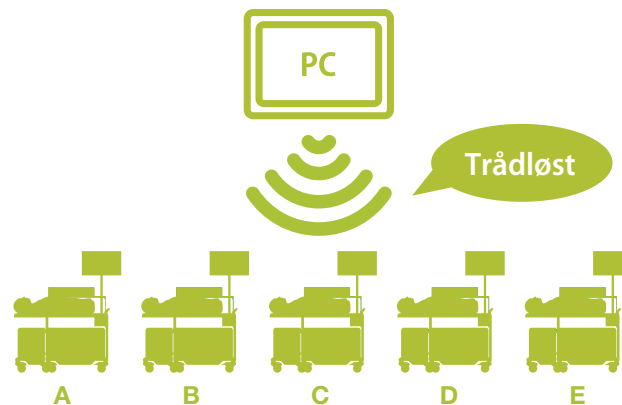

2 Spilleliste

Spilleliste sikrer problemfri trening/OSCE-gruppetrening
Velg opp til 10 kardialtilfeller fra 88 eksempler for å lage en spilleliste



Spillelister opprettes slik:

- 1) Manuelt ved å sette kjøretiden for hvert valgte tilfelle, eller
- 2) ved å lagre en bestemt treningsøkt med flere tilfeller.

3 Klar til bruk

Enkel tilkobling og unit-enhet med alt-i-ett løsning.



4 Feilindikator

Feilindikatoren utfører vedlikehold av systemet for alltid å holde simulatoren i god stand.
Hvis et problem oppstår i systemet, vil en indikator advare deg på skjermen.
Alle systemproblemer blir registrert i systemets logg.



Hjertelyder og bilyder

Auskultasjon av første lyd (S1) og andre lyd (S2) kan læres i forhold til synkroniserte elektrokardiogram, arteriell puls og jugular venøs puls.



Palpasjon av arterier

Små variasjoner i de arterielle pulsbølger under forskjellige hjertelidelser eller arytmier kan detekteres ved palpasjon.



Observasjon av halsblodårer


Styrken og timing av "a" og "u" bølger variere med tilfeller.



Fysiske observasjoner med Simulator "K" ver. 2

Omfattende klinisk undersøkelsestrening

- Observasjon
- Askultasjon
- Palpasjon

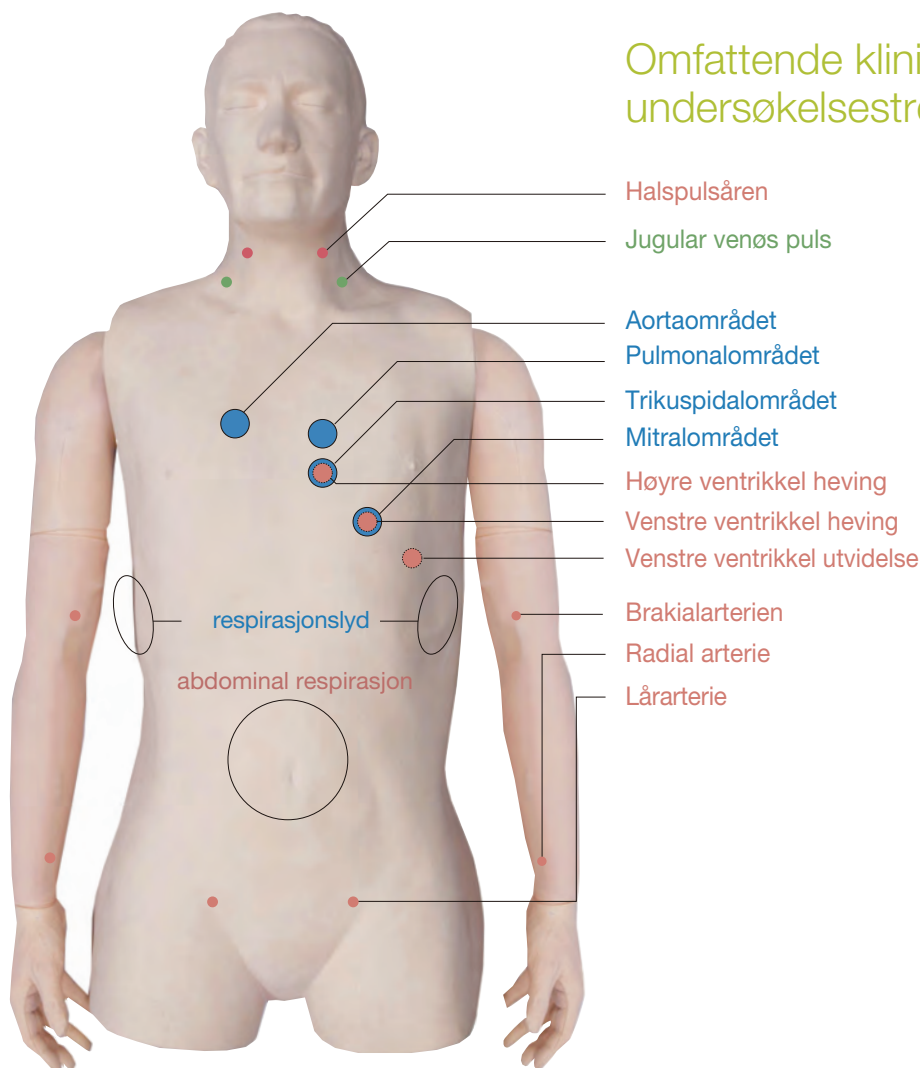

Berøringsskjerm kontrollpanel

Målingene kan overvåkes og fjernstyres fra kontrollenheten (PC).



Se instruksjoner Del 2

Palpasjon av herteimpulser

RV, LV og DLV er simulert og kan palperes.




Overvåkingsskjerm

Sanntids dynamiske diagrammer på skjermen:

- Fonokardiogram
- Sfygmogram (CAP/JVP/ACG)
- Elektrokardiogram (EKG)

Respiratoriske lyder og abdominale bevegelser

Trakeale og bronkiale pustelyder og abdominale bevegelser er simulert for å lette forståelsen av respiratoriske fenomener.

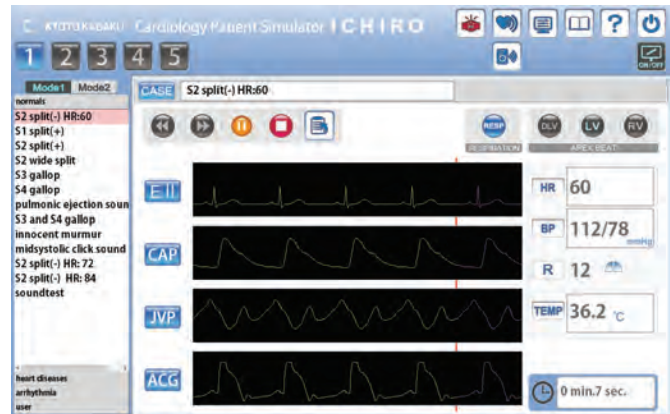

Tilfeller og simuleringsinnhold

Et bredt spekter av tilfeller

Modus 1: Omfattende pasientsimuleringer med lyder, puls, apex og EKG

Nr.	Normal hertesimulering (12 tilfeller)	Nr.	Simulering av hjertesykdom (14 tilfeller)	Nr.	Arytmi (10 tilfeller)
A-01	S2 splitting (-) HR: 60	B-01	aortastenose	C-01	sinusarytmi
A-02	S1 splitting (+)	B-02	mitralinsuffisiens	C-02	sinustakykardi
A-03	S2 splitting (+)	B-03	mitralstenose	C-03	sinusbradykardi
A-04	S2 bred splitting	B-04	aortaregurgitasjon	C-04	prematur ventrikulær kontraksjon (1)
A-05	S3 galopptrytme	B-05	hypertrofisk kardiomyopati	C-05	prematur ventrikulær kontraksjon (2)
A-06	S4 galopptrytme	B-06	mitralstenose insuffisiens	C-06	prematur ventrikulær kontraksjon (3)
A-07	pulmonal utstøtingslyd	B-07	pulmonal valvulær stenose	C-07	sinoatrialt blokk
A-08	S3 og S4 galopptrytme	B-08	atrieseptumdefekt	C-08	atrioventrikulærblokk
A-09	uskyldig bilyd	B-09	ventrikkelseptumdefekt	C-09	atrieflimmer
A-10	midtsystolisk klikkelyd	B-10	trikuspidalklaff insuffisiens	C-10	atrieflutter
A-11	S2 splitting (-) HR:72	B-11	akutt mitralinsuffisiens		
A-12	S2 splitting (-) HR:84	B-12	ductus arteriosus		
		B-13	mitralklaffprolaps		
		B-14	dilatert kardiomyopati		


Modus 2: Arytmi simulering, auskultasjonstrening med EKG

A	B	C	D
A-01 normal sinus R	B-01 atrieflutter	C-01 V VI pacemaker	D-01 vpc (quadrigemini)
A-02 sinus takykardi	B-02 av-blokk	C-02 atrie pacemaker	D-02 vpc (trigemi)
A-03 sinus arytm	B-03 av-blokk & crbbb	C-03 vent pacemaker	D-03 vpc (bigemi)
A-04 apc enslig	B-04 av-blokk (digital)	C-04 av seq pacemaker	D-04 vpc (couplet)
A-05 apc bigemini	B-05 av-blokk (mobitz)	C-05 icrbbb	D-05 pvc (repeterende)
A-06 ektopisk pacemaker	B-06 av-blokk (mobitz)	C-06 crbbb	D-06 pvc (R-på-T-type)
A-07 vandrende pacemaker	B-07 av-blokk (3:1 & 4:1)	C-07 clbbb	D-07 ikke-vedvarende VT
A-08 koronar sinus R	B-08 av & crbbb	C-08 clbbb	D-08 vent takykardi
A-09 sinus bradykardi	B-09 paroksy atr taky	C-09 clbbb (ved ami)	D-09 vent flutter
A-10 ss syndrom	B-10 av junc R (svst)	C-10 wpw syndrom	D-10 vent flimmer
A-11 atrieflimmer	B-11 av junc R (pat)	C-11 wpw syndrom	D-11 vent R (sinus cond)
A-12 atrieflutter	B-12 av junc R	C-12 wpw syndrom	D-12 stigende utløpsrytme
A-13 atrieflutter fib.	B-13 av junc kontraksjon	C-13 vpc (enkelstående)	D-13 agonal rytme

Lungelydsimulator auskultasjonstrening LSAT versjon 2

MW28

CE

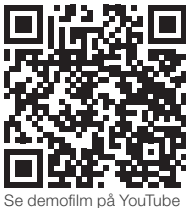

Se demofilm på YouTube



Brukes i 96% av de medisinske fakultetene i Japan

Simulatoren gir en effektiv trening i auskultasjon av respirasjonslyd. Denne unike og eksklusive simulatoren er best egnet for opplæring i klassifisering av lydene og styres av en berøringsskjerm. 36 tilfeller av lungelyder kan spilles av med eller uten hjertelyd. Hvert tilfelle har blitt spilt inn fra autentiske pasienter og er ledsaget av en beskrivelse, samt kliniske data for pasienten, inkludert pasientens sykehistorie, illustrasjoner, røntgen og CT-bilder.

Tilfeller lungelyder

Normal	Abnormal
A01 standard A03 mildt sterk A05 mildt hurtig A07 kraftig hjertelyd	B01 svak: venstre nedre område B02 svak: venstre hele område (adhesjon) B05 svak: venstre hele område (pneumotoraks) B07 fraværende: høyre middle og nedre områder B09 svak: høyre hele område B11 fraværende: høyre hele område B13 svak: hele toraks B15 bronkial pust
Grov knitring	Fin knitring
C01 høyre nedre område C03 begge nedre områder C05 høyre middle område C07 venstre nedre område C09 begge øvre områder C11 hele toraks	D01 begge nedre områder D03 begge midtre nedre områder D05 hele toraks (IPF) D07 hele toraks (NSIP)
Piping	Ronkus
E01 øvre område 600-700Hz E03 øvre område 350-450Hz E05 øvre område 200-1000Hz	F01 trakea og øvre område 150-250 Hz F03 trakea og øvre område 150-450 Hz (polyfonisk) F05 trakea og øvre område 80-120 Hz F07 hele område 80-200 Hz
Forskjellig uavbrutte lyder	Forskjellig
G01 hvin G03 skrik	H01 pleural friksjonsknidninger: høyre nedre område H03 pleural friksjonsknidninger: venstre nedre område H07 Hammans signal H09 Vokal fremitus

Hjertelyder i bakgrunn er tilgjengelig i 5 volumnivåer.

Sett inkluderer

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 torso mannekeng | 1 LAN kabel |
| 1 kontroll PC | 1 LAN adapter |
| 1 PC (innebygd i enheten) | 1 ekstern høyttaler (innebygd) |
| 1 strømadapter | 1 lunge t-skjorte |
| 1 strømkabel | 2 brukermanualer |

Spesifikasjoner

- Størrelse: B39 x D45 x H130 cm
 Strøm: AC100V 50/60Hz
 Strømforbruk: 180W
 Materialer: Myk harpiks, latexfri

Egenskaper

Grunnleggende egenskaper

Auskultasjonsområder




Anterior

Posterior

- **Anterior**
 1. trakea
 2. øvre høyre lungfelt
 3. øvre venstre lungfelt
 4. midtre høyre lungfelt
 5. midtre venstre lungfelt
 6. nedre høyre lungfelt
 7. nedre venstre lungfelt
- **Posterior**
 0. øvre venstre lungfelt
 1. øvre høyre lungfelt
 2. midtre høyre lungfelt
 3. midtre venstre lungfelt
 4. nedre venstre lungfelt
 5. nedre høyre lungfelt
 6. høyre costo-diafragmatiske vinkel
 7. venstre costo-diafragmatiske vinkel

Case informasjon


Bilder av vanlig røntgen, CT og bronkoskopi er inkludert.

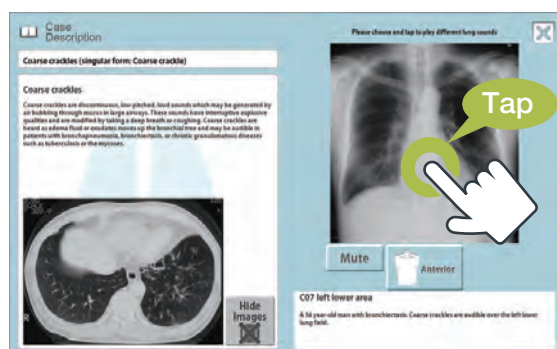

Lungelyd av hvert område kan spilles av ved å trykke på et vanlig røntgenbilde.

Klassifisering av lungelyder

LSAT bruker en klassifisering av respirasjonslyder etter kriterier fra American Thoracic Society og er basert på akustisk analyse av registrerte kliniske lyder. Med denne tilnærmingen, er lungelyder kategorisert som uavbrutte (piping, ronkus eller stridor) eller avbrutte (knitring). Knitring er videre identifisert som fin eller grov.

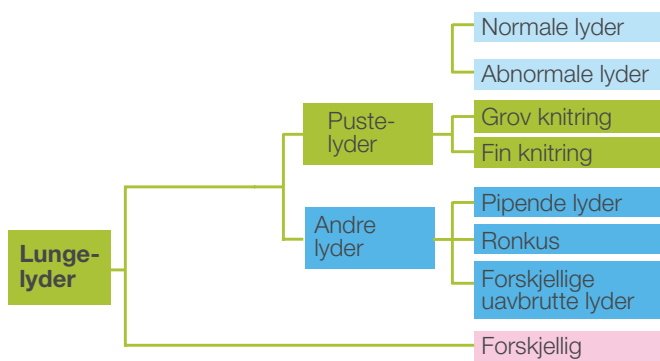

Nye egenskaper



Trådløs multi-enhet drift

Opp til fem "LSAT" kan styres av en trådløs kontroll PC.



- Hver simulator kan innstilles individuelt med hver sitt case.
- Case kan raskt slås på ved å klikke på når som helst i løpet av økten.




Anterior og posterior auskultasjon på samme tid

To eller flere kandidater kan arbeide samtidig.




Indikasjon av innpust og utpust med LED-lys panel

Legg merke til rytmen av pusten mens du lytter til lyden under undersøkelsen.

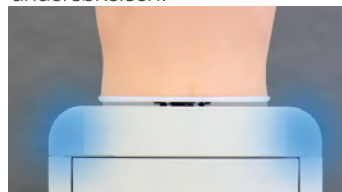

Opprette en egendefinert spilleliste

Velg mellom 36 lydtilfeller. Opprett en egendefinert spilleliste for å optimalisere treningsøktene.

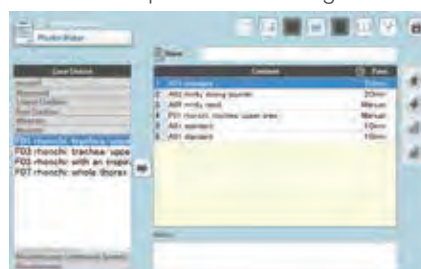

Feilindikasjonssystem

Simulatoren skanner automatisk for feil under oppstart.



Pediatrisk lungelyd auskultasjonssimulator

MW57



Bli kjent med egenskaper og særpreg for pediatriske pasienter. Tilegne seg kliniske ferdigheter i aksjon.

■ Respirasjonsfrekvens

Respirasjonsfrekvensen kan justeres mellom 15 og 50 pust per minutt, og viser nøyaktig pediatriske pasienter fra nyfødte til skolealder.

■ Puls

Hjertefrekvensene stilles automatisk inn i henhold til respirasjonsfrekvensene, f.eks:

- Respiratoriske 20 pust/min: hjertefrekvens 90 slag/min
- Respiratoriske 40 pust/min: hjertefrekvens 90 slag/min

Hjertelyder kan slås av når det er nødvendig.

■ Forplantning av lyder

Forplantning av lyder på brystet er en karakteristisk avgjørende for pediatriske pasienter. For eksempel overføres lyder fra øvre lungfelt lettere til nedre lungfelt enn hos voksne pasienter.

■ Kroppsstørrelse

Overkroppen er designet for å representere en pasient på 1-5 år. Å ikke ha et bestemt ansikt gjør det mulig å avbilde en rekke pediatriske pasienter i forskjellige treningsscenarier.

Tilfeller lungelyder

Normal	Abnormal
A01 standard	B01 svak: venstre nedre område B03 svak: venstre hele område B05 svak: høyre nedre område B07 svak: høyre hele område
Grov knirring	Fin knirring
C01 høyre nedre område C03 begge nedre områder C05 høyre middle område C07 venstre nedre område C09 begge øvre områder C11 hele toraks	D01 begge nedre områder D03 hele områder
Piping	Ronkus
E01 øvre område 600-700Hz E03 øvre område 350-450Hz	F01 trakea og øvre område F03 hele område
Forskjellig uavbrutte lyder	Forskjellig (kombinerte tilfeller)
G01 stridor	H01 grove knirring og rhonchi H03 fin knirring og pipelyd

Hjertelyder i bakgrunn er tilgjengelig i 5 volumnivåer.

Sett inkluderer

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 torso mannekeng | 1 LAN kabel |
| 1 kontroll PC | 1 LAN adapter |
| 1 PC (innebygd i enheten) | 1 ekstern høyttaler (innebygd) |
| 1 strømadapter | 1 lunge t-skjorte |
| 1 strømkabel | 2 brukermanualer |

Spesifikasjoner

- Størrelse: W39 × D39 × H98 cm, 35 kg
 Strøm: AC100V 50/60Hz
 Strømforbruk: 180W
 Materialer: Myk harpiks, latexfri



Se demofilm på YouTube

Egenskaper

Grunnleggende egenskaper

Auskultasjonsområder




Anterior

Posterior

- **Anterior**
 1. trakea
 2. øvre høyre lungfelt
 3. øvre venstre lungfelt
 4. midtre høyre lungfelt
 5. midtre venstre lungfelt
 6. nedre høyre lungfelt
 7. nedre venstre lungfelt
- **Posterior**
 0. øvre venstre lungfelt
 1. øvre høyre lungfelt
 2. midtre høyre lungfelt
 3. midtre venstre lungfelt
 4. nedre venstre lungfelt
 5. nedre høyre lungfelt
 6. høyre costo-diafragmatiske vinkel
 7. venstre costo-diafragmatiske vinkel

Case informasjon


Bilder av vanlig røntgen, CT og bronkoskopi er inkludert.

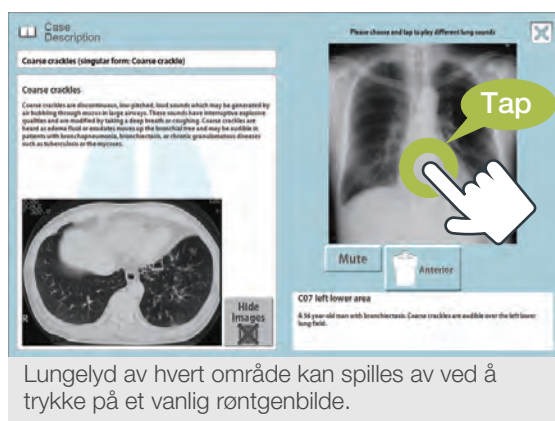

Lungelyd av hvert område kan spilles av ved å trykke på et vanlig røntgenbilde.

Klassifisering av lungelyder

LSAT bruker en klassifisering av respirasjonslyder etter kriterier fra American Thoracic Society og er basert på akustisk analyse av registrerte kliniske lyder. Med denne tilnærmingen, er lungelyder kategorisert som uavbrutte (piping, ronkus eller stridor) eller avbrutte (knitring). Knitring er videre identifisert som fin eller grov.

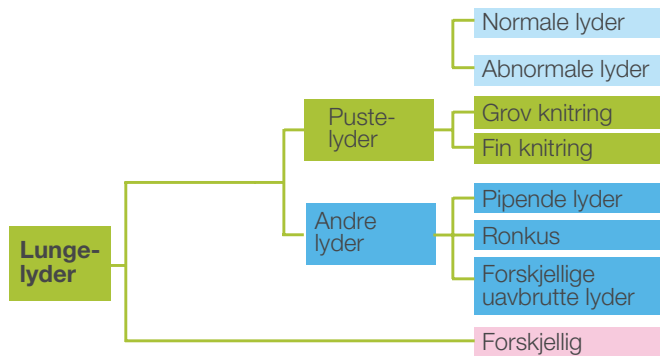

Nye egenskaper

Trådløs multi-enhet drift

Opp til fem "LSAT" kan styres av en trådløs kontroll PC.



- Hver simulator kan innstilles individuelt med hver sitt case.
- Case kan raskt slås på ved å klikke på når som helst i løpet av økten.


Anterior og posterior auskultasjon på samme tid

To eller flere kandidater kan arbeide samtidig.




Indikasjon av innpust og utpust med LED-lys panel

Legg merke til rytmen av pusten mens du lytter til lyden under undersøkelsen.

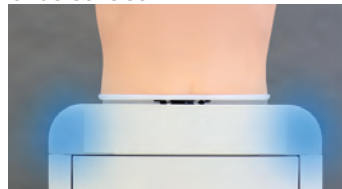

Opprette en egendefinert spilleliste

Velg mellom 36 lydtilfeller. Opprett en egendefinert spilleliste for å optimalisere treningsøktene.

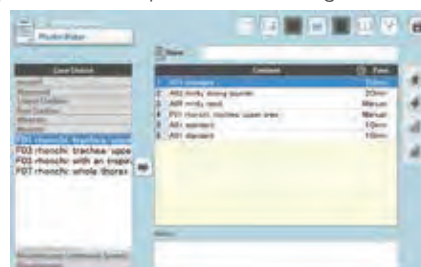

Feilindikasjonssystem

Simulatoren skanner automatisk for feil under oppstart.



Pasientsimulator "K" Plus treningssystem versjon 2

MW2810

CE



En effektiv kombinasjon for både lunge- og kardiologiske undersøkelser

Med to simulatorer i ett, en pasientsimulator for lungelydauskultasjon samt kardiologiske undersøkelser, er denne modellen en komplett duo for brystundersøkelser. Med 36 lungelydtilfeller og hele 88 kardiologiske tilfeller utgjør pasientsimulator "K" Plus treningssystem et bredt spekter av scenarier, og blir et veridfullt verktøy i undervisning og treningssesjoner.

Treningselementer

- ◆ Omfattende trening i kardiopulmonal fysiske undersøkelser
- ◆ Skaffe pålitelige ferdigheter i auskultasjonsferdigheter av brystet
- ◆ En grundig forståelse med realistiske fysiske anatomiske funn



Auskultasjon av hjertelyder



Observasjon av halsvenene



Auskultasjon av lungelyder

Egenskaper

Pasientsimulator "K" Plus treningssystem versjon 2

1. Trådløs fjernkontroll med kontrollpanel på berøringsskjerm
2. Opptil fem systemer kan brukes samtidig. (Alle fem i enten kardiologimodus eller lungelydmodus)
3. Klar til bruk med tilkobling til strømforsyning
4. Stor overvåkingsskjerm for visuell forståelse
5. Enestående lyd kvalitet: tilfeller er registrert fra reelle pasienter
6. Naturlig utbredelse av lyd
7. Forklaringsvinduer for hvert tilfelle




Kardiologi pasientsimulator:

1. 36 tilfeller av total pasientsimulering
2. 52 tilfeller av arytmie/EKG simulering
3. Observasjon av halsvenene
4. Palpasjon av hjerterimpulser (RV, LV og DLV)
5. Palpasjon av arterier
6. hjertelyder og bilyder



Lungelydauskultasjon simulator:

1. 36 lungelydtilfeller: posterior og anterior, med og uten hjertelyd som bakgrunn
2. Lydvolum, frekvens av åndedrett og driftstiden er kontrollerbare .

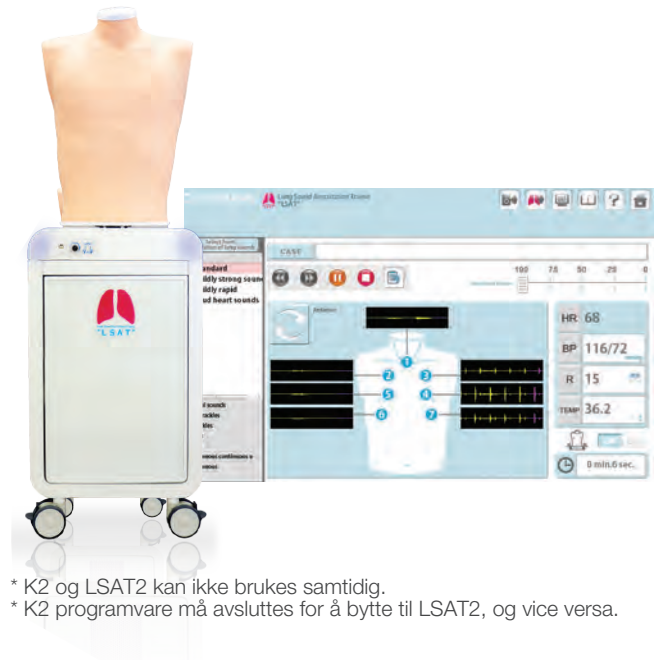

* K2 og LSAT2 kan ikke brukes samtidig.
* K2 programvare må avsluttes for å bytte til LSAT2, og vice versa.

Sett inkluderer

- 2 enheter (hver enhet har en PC, en høyttaler, et tastatur og en mus)
- 1 kontroll-PC
- 1 brystsjablon
- 4 lærebøker
- 1 t-skjorte for LSAT2

Spesifikasjoner

Hovedenhet (K ver.2):

Størrelse: W140 x D 75 x H170 cm

Vekt: 145 kg

Strøm: AC100V 50/60Hz

Strømforbruk: 400W

Materialer: Myk harpiks, latexfri

Enhet (LSAT ver.2):

Størrelse: W39 x D45 x H130 cm

Strøm: AC100V 50/60Hz

Strømforbruk: 180W

Blodtrykksmåling simulator ver. 2

MW7B



Manuell inflasjon



Palpasjon



Korotkoffs lyd

Blodtrykksmåling simulator forenkler treninger i å skaffe faglig kompetanse med objektiv vurdering.



Se demofilm på YouTube



Egenskaper

- De forhåndsinnstilte eksempler basert på WHO's klassifisering.
- Blodtrykksverdiene kan styres digitalt på tre punkter, Faser I, IV og V
- Realistisk auskultasjon av fase I til V Korotkoff lyder
- Radiale arteriepulser synkronisert med lyd og mansjettrykk
- Deflasjonsfrekvensen kan overvåkes numerisk

- Hørbart alarmsignal ved overdreven mansjettrykk
- Tilfeldig avspillingsmodus tilrettelegger for gjentatte forsøk i egenlæring og gruppestudier
- Auskultatorisk gap og "ingen Korotkoff V" tilstand samt ulike blodtrykksstilfeller

Treningselementer

- ◆ **Mansjett plassering**
- ◆ **Manuell mansjettinflasjon**
- ◆ **Auskultasjon av Korotkoff lyder**
- ◆ **Palpasjon av radialpuls**
- ◆ **Blodtrykksmåling**
- ◆ **Mansjettdeflasjon**

Synlige numeriske verdier

- Hastighet på mansjettrykkdeflasjon og blodtrykksverdi vises
- digitalt, og gir en objektiv vurdering av ferdigheter.
- Simulatoren kan kobles til eksterne høyttalere (ikke inkludert) for avspilling av Korotkoffs lyd i klasserommet

Forhåndsinnstilte eksempler

Ønskelig, normal, prehypertensjon, hypertensjon (nivå 1-3), isolert systolisk hypertensjon, auskultatorisk gap, ingen Korotkoffs V.

Spesifikasjoner

Størrelse: 67 x 18 x 22 cm
Vekt: 2,5 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri
Spennings: AC100V 50/60Hz
Strømforbruk: 10 W

Settet inneholder

1 Armmodell
1 Kontrollpanel med AC-adapter
1 Aneroid sphygmomanometer enhet
1 Brukermanual
1 Bæreseske

Ni forhåndsinnstilte tilfeller

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| • Hypotensiv | • Alvorlig hypertensjon |
| • Normal | • Isolert systolisk hypertensjon |
| • Prehypertensjon | • Auskultatorisk gap |
| • Mild hypertensjon | • Fravær av fase V korotkoff lyder |
| • Moderat hypertensjon | |



Øre undersøkelsessimulator II

Øre undersøkelsessimulator II er en oppgradert modell for å skaffe seg trygg og pålitelige ferdigheter for undersøkelse av den eksterne akustiske øregangen og trommehinnen med et direkte otoskop. Inkludert er en alarm som gir signal når smertefull innsetting oppdages. Alarmen har to moduser: selvlærende modus (lydsignal), og instruktørmodus (lydløs med lyssignal).

MW12


Se demofilm på YouTube



Instruksjoner på YouTube

Egenskaper

- Alarm mot smertefull innsetting: lydsignal (selvlæringsmodus) og rødt lyssignal (stille modus).
- Ni hovedtilfeller er forhåndsinnstilt.
- Raskt å skifte mellom tilfellene.
- Ørekanaler kommer i to størrelser.
- Anatomisk korrekt myk øremodell som muliggjør trening i å rette øregangen ved å trekke øret (pinna) bakover.
- Trening med et virkelig otoskop.
- Dukkens hode kan vippes.
- Trening er mulig på både venstre og høyre øre.

Treningselementer

- ◆ Øreundersøkelse med otoskop
- ◆ Fjerning av ørevoks og fremmedlegemer

Tilfeller

- Normal
- Alvorlig otitis media (SOM)
- Mukoid otitis media (MOM)
- Kronisk otitis media med perforering
- Akutt suppurativ otitis media (AOM)
- Kolestatom
- Tympanosclerosis
- Traumatiske perforeringer

Settet inneholder

- 1 mannekeng hode og skulder
4 typer øreenheter. - ett par hver:
- Undersøkelse øre (normal)
 - Undersøkelse øre (stenose)
 - Fremmedlegeme øre (normal)
 - Fremmedlegeme øre (stenose)

- 1 sett av fremmedlegemer:
- simulert ørevoks,
 - liten leke,
 - små svampfragmenter og
- 1 skje
1 brukermanual

Alarm mot smertefull innsetting

Spesifikasjoner

Størrelse: B42 x D21 x H39 cm
Vekt: 1,5 kg

Reservedeler

- 11391-010 øreenheter og fremmedlegemer sett
- 4 typer øreenheter - 1 par hver undersøkelse øre (normal), undersøkelse øre (stenose), fremmedlegeme øre (normal), fremmedlegeme (stenose)
 - 1 sett med fremmedlegemer simulert ørevoks, små leker, små svampfragmenter og en skje



normal



cholesteatoma

Øye undersøkelsessimulator (3 trinn)

M82

Øye undersøkelsessimulator (2 trinn)

M82A



Se demofilm på YouTube

Product Supervision



Japan Society for Medical Education
Working Group with the cooperation of:
Kansai Medical University Department of Ophthalmology




* Oftalmoskop
er ikke inkludert.




Normal retina

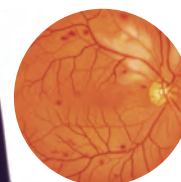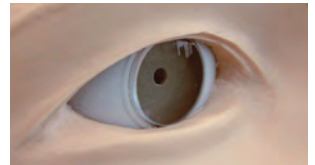Hypertensiv
retinopati

Liten pupille

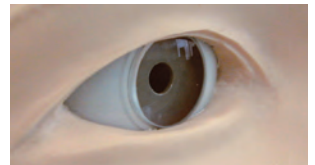

Midium pupille

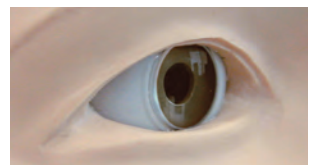

Stor pupille


Undersøkelsessimulatoren for øye er en nyskapende simulator for fundusundersøkelse, utformet for å få til undersøkelser av øyebakgrunnen med brukerens eget oftalmoskop. Forskjellige tilfeller kan settes opp for studentene ved å bruke ulike kombinasjoner av slides, dybde- og pupilldiametre. Mykt og smidig materiale gjør det mulig med praktisk simulering av virkelige undersøkelsesprosedyrer, som f.eks. å heve et øyelokk.

Egenskaper

- 10 tilfeller av fundus lysbilder er tilgjengelig for opplæring i å identifisere vanlige øyesykdommer.
- Lysbildene er fra faktiske kliniske bilder.
- Øyeeple utstyrt linse gjengir den visuelle akse nært opp til det menneskelige øyet som gir en realistisk visning av netthinnen.
- Mykt og smidig materiale av dukken gjør praktisk trening av undersøkelsesprosedyrer, for eksempel heve øyelokket.
- Dybden på funduslysbilder kan stilles i tre nivåer: Hypermetrope, normal, eller myopisk visninger.
- Rødreleksjon kan simuleres.
- Forskjellige størrelser av pupillen kan innstilles i 3 trinn i M82 og 2 trinn i M82A

Treningselementer

◆ Fundusundersøkelse med direkte oftalmoskop

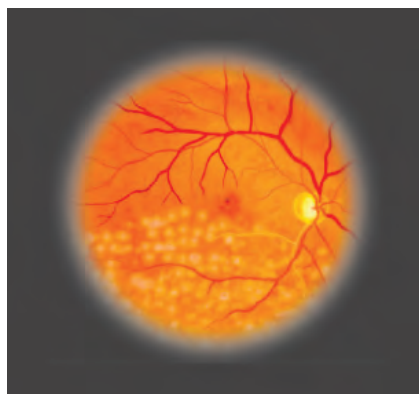

Tilfeller

- Normal øyebakgrunn
- Hypertensiv retinopati: arteriolar vasokonstriksjon grad 3, arteriosklerose grad 1, blødninger og bomulsflekker, enkel åreskjuling
- Enkel/bakgrunn diabetisk retinopati: mikroaneurisme, blødninger og kraftig eksudat
- Papilloedem (kronisk fase)
- Papilloedem (akutt fase)
- Glaukom optisk atrofi: Glaukom optisk disc kopping og defekt nervefiber
- Retinal åreokklusjon (akutt fase): flammeformet blødning og bomulsflekker
- Retinal åreokklusjon (etter retinal laser fotokoagulering)
- Toksoplasmose: chorioretinitis
- Alderrelatert makuløs degenerasjon: makuløs eksudasjon og subretinale blødninger

Settet inneholder

- 1 anatomimodell med hode og skuldre
 - 3 trinn (2 og 3,5 og 5 mm diameter)
 - 1 slideholder med innstilling for 3 trinns dybde
- 1 sett med slides (10 tilfeller)
- 1 støvpensel
- 1 onnbevarinaskoffert

Spesifikasjoner

- Størrelse: B42 x D22 x H38 cm
- Vekt: 2 kg


Reservedeler

- 11220-010
- 1 sett utkiftbare fundusslides (sett med 10 tilfeller)



Prostata og rektal simulator

MW20

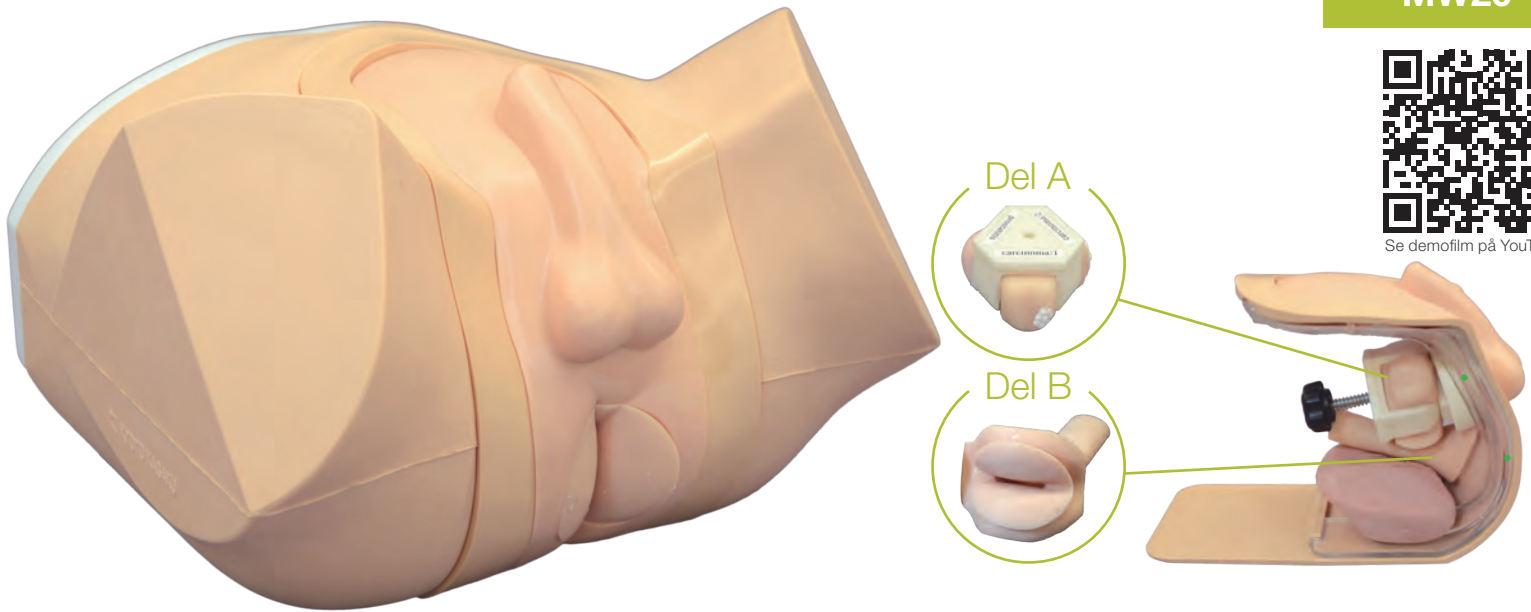

Prostata og rektal simulator inkluderer 9 typer prostata og 4 typer rektum som er lett utskiftbare og kan plasseres på 3 forskjellige måter.

Egenskaper

- Ni typer prostata simulere ulike scenarier
- Fire rektum enheter
- Trening med flere prostata og rektale tilfeller er sammenfallende og tidseffektivt
- Lateral posisjonering, ryggleie og utsatt
- 3 roterende enheter med 9 prostata kan enkelt skiftes

Treningselementer

- ◆ Digital-undersøkelse av prostata og rektum
- ◆ Innsetting og bruk av analskop og proktoskop



Deler


A Ni typer prostata



- | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| #1 normal | #4 prostatitt | #7 karsinom 3 |
| #2 forstørrelse 1 | #5 karsinom 1 | #8 karsinom 4 |
| #3 forstørrelse 2 | #6 karsinom 2 | #9 karsinom 5 |

Deler

B Fire rektum enheter

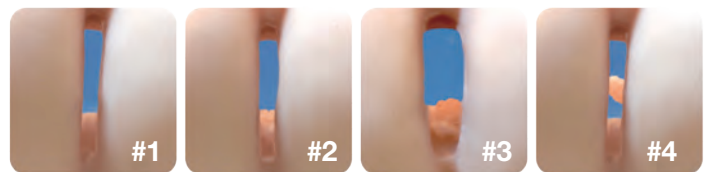

- | | |
|--------------------------|--|
| #1 normal | #3 stor karsinom |
| #2 liten karsinom | #4 polyp kombinert med liten karsinom |

Settet inneholder

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 3 prostata enheter: | 1 vaselin |
| -9 prostata | 1 anatomisk modell |
| 4 rektum enheter | 1 oppbevaringskoffert |

Spesifikasjoner

Størrelse: B34 x D33 x H24 cm
Materialer: Myk harpax, latexfri

Reservedeler

- 11399-010 prostataenhet A (normal, utvidelse 1 og 2)
- 11399-020 prostataenhet B (prostatitt, karsinom 1 og 2)
- 11399-030 prostataenhet C (karsinom 3,4 og 5)
- 11399-040 endetarm (normal)
- 11399-050 endetarm (liten karsinom)
- 11399-060 endetarm (stort karsinom)
- 11399-070 endetarm (polyp og lite karsinom)
- 11399-080 hud

Simulator for digital rektalundersøkelse

M92


Se demofilm på YouTube

Simulator for digital rektalundersøkelse er enestående og utviklet for opplæring i differensiering av rektale svulster og polypper ved palpasjon.

Egenskaper

- Fire utskiftbare rektum enheter for identifisering av lesjon typer.
- Normal prostata eller endocervix kan også palperes.
- Naturtro rektum kan palperes opptil 7 cm dybde.

- Svært naturtro sphinctermotstand og rektumveggen gir verdifull praksis i DRE (Drug Recognition Expert) trening før kandidatene får prøve seg på pasienter.

Treningselementer

◆ Rektalundersøkelse

Inkluderer

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 lumbartorso (unisex) | 1 prostataenhet |
| 4 rektumenheter: | 1 endocervixenhet |
| 1 normal | 1 boks med vaselin |
| 2 rektale svulster | 1 oppbevaringskoffert |
| 1 rektum med polypper | |

Spesifikasjoner

Størrelse: B37 x D28 x H30 cm

Reservedeler

- 11269-210 rektumenhet #1 (normal)
- 11269-220 rektumenhet #2 (svulst A)
- 11269-230 rektumenhet#3 (svulst B)
- 11269-240 rektumenhet #4 (rektum med polypper)
- 11269-150 prostataenhet
- 11269-160 endocervixenhet

Simulator for prostataundersøkelse

M53B


Se demofilm på YouTube

Undersøkelses simulatoren for prostata gir realistisk opplæring i prostatapalpasjon med mykt

Egenskaper

- 1. Ti tilfeller av prostata er montert på en roterende skive inne i kroppen.
- 2. Tilfellene er lett utskiftbare.
- 3. Tre pasientposisjoner mulig: ryggeleie, mageleie og sideleie.

Tilfeller

- 10** prostatatilfeller:
- | | |
|--------------|--------------|
| 2 normal | 5 karsinomer |
| 2 forstørret | 1 prostatitt |

Treningselementer

◆ Digital palpasjon av prostata

Inkluderer

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 mannlig lumbartorso | 1 boks med vaselin |
| 1 rotasjonsenhet | 1 par hansker |
| 10 prostatatilfeller: | 1 oppbevaringskoffert |
| - 2 normal, 2 forstørret, | |
| - 5 typer med karsinomer og | |
| - 1 prostatitt | |

Spesifikasjoner

Størrelse: B40 x D32 x H24 cm

Reservedeler

- 11272-040
- 1 utskiftbar anuspute

Product Supervision

Dr. Osamu Yoshida, Professor Kyoto University
Faculty of Medicine, Department of Urology
Dr. Takashi Katayama, Professor Toyama
Medical and Pharmaceutical University
Department of Urology

3D Kolonoskop treningssimulator NKS

Product Supervision

Katuhisa Noda, MD, Noda-Genki Clinic


Takatoshi Kitada, MD, Kitada Clinic

Yasumoto Suzuki, MD, Matsushima Clinic


MW24




Se demofilm på YouTube

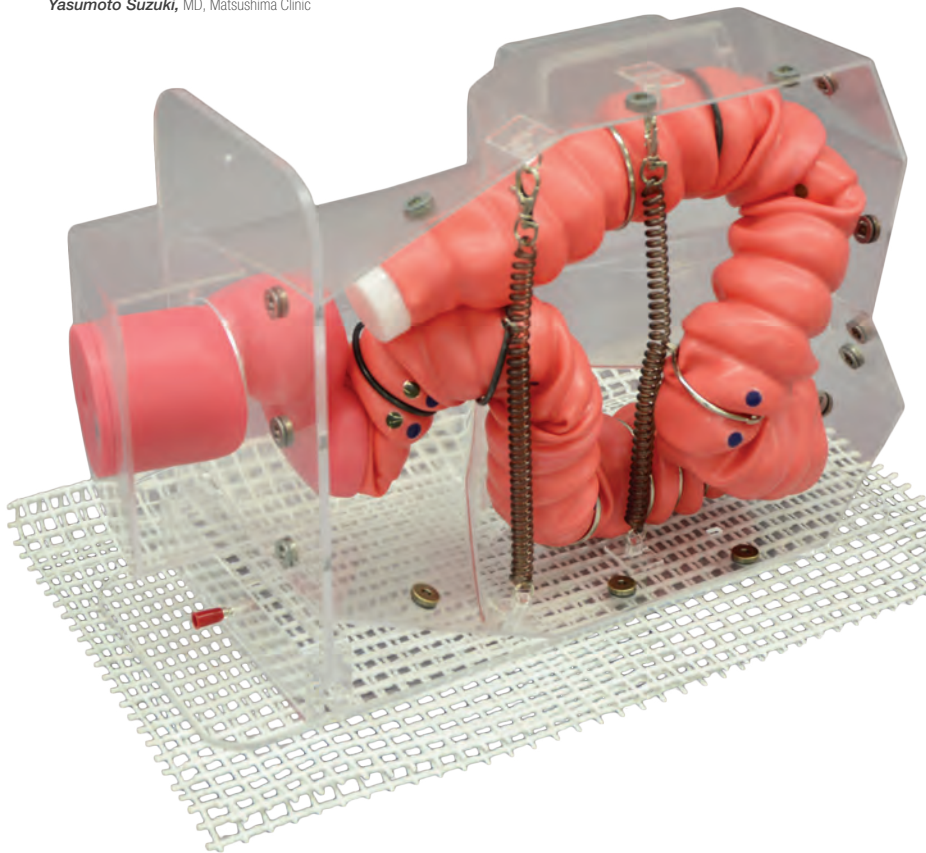

Kort alfa-løkke

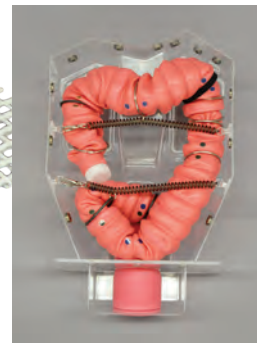

Lang alfa-løkke

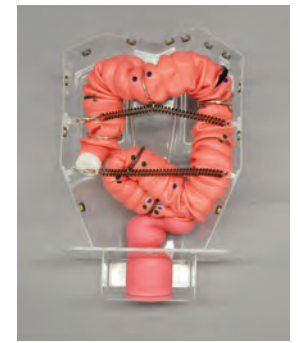

N-løkke

Tredimensjonal representasjon av kolon, basert på analytisk studie av CT-koloskopi (CTC) data.

Den tredimensjonale strukturen i tykktarmen gir praktisk trening i en rekke ferdigheter som for eksempel forebygging av sløyfeforming, reduksjon av sløyfer, inkludert en sløyfe ved LCF, samt innføringsteknikk som skaper en sløyfe med vilje.

Egenskaper

- Transparent skjelettkropp gir direkte observasjon av posisjonen til spissen av kolonoskopet samt formen på tykktarmen.
- Stabil rektal anatomi: Simulatoren er designet for å skaffe koloskopiferdigheter som bruker tre Houston-ventiler som landemerker, og som vises i samme posisjon hver gang.
- Sigmoid-kolon kan forhåndsinnstilles for å ta opp noen av de tre vanligste morfologiene, som er fra analyse av CTC. Mønstrene kan endres raskt ved å skyve festene og flytte tykktarmen.
- Simulatoren er helt vannavstøtende og kan lett rengjøres med vann.
- Lettvekt og kompakt, lett vint håndtering og transport.

Treningselementer

◆ Koloskopinnføring i tre grunnleggende mønstre:

- Kort alfa-løkke (trekk tilbake teknikk)
- Lang alfa-løkke (trykk fremover teknikk)
- N-sløyfe (trekk tilbake / trykk fremover teknikk)

◆ Koloskopinnføring i tre pasientstillinger:

- Venstre sideveis
- Høyre lateral
- Rygggrad

◆ Manuell abdominal kompresjon

Spesifikasjoner

Størrelse: 43 x 28 x 16 cm

Vekt: 6 kg

Materialer: Myk harpiks, latexfri

Settet inneholder

- 1 skjelettkropp
- 1 bukhinne
- 1 rammebunn
- 1 kolon-rektumrør med en hette og en plugg
- 1 sklisikker mat
- 1 plastbeger
- 15 smøremiddel
- 15 kolonoskop gel
- 1 oppbevaringskofferter
- 1 brukermanual

Reservedeler

- 11403-010 kolon-rektumrør med en hette og en plugg
- 11403-020 smøremiddelpakke blå (15 x 50 ml)
- 11403-030 kolonoskop gel (20 ml hver)

*) Kolonoskop ikke inkludert.

Endoskop treningssimulator (ETS)

MW39



Spesielt utviklet for å tilfredsstille de nye treningsbehovene fra American Surgery Flexible Endoscopy Curriculum. Dette systemet består av en rett kolonenhet en anatomisk kolonenhet som lar kandidatene få endoskopiske ferdigheter gjennom praksis.

Egenskaper

- Fundamentale ferdigheter i navigering av endoskop hjelp av manipulering av endoskopet
- Grunnleggende endoskopferdigheter
- Arbeider med retrofleksjon
- Forhindrer, håndterer og reduserer løkker
- Grundig mukosal (slimhinne) inspeksjon


Treningselementer

◆ Rett kolonmodell

- Skopmanipulering
- Endoskop målretting
- Retrofleksjon

◆ Anatomisk kolonmodell

- Håndtering av løkker
- Mukosal (slimhinne) inspeksjon

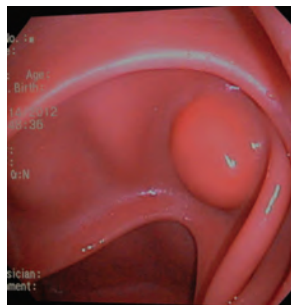

Se demofilm på YouTube

Spesifikasjoner

Størrelse: voksen naturlig størrelse
Vekt: 6.5 kg
Materialer: Myk harpiks, hard plast

Settet inneholder

- 1 anatomisk kolonmodell
- 1 adomen huddeksel
- 1 støtte
- 1 sklisikker matte
- 1 rett kolonmodell
- 1 simulert biopsiverktøy
- 1 illustrasjon overlegg for skopmanipulering
- 1 ekstra lim
- 1 Strømadapter
- 1 konsentrert smøremiddel
- 1 endoskop smøremiddel
- 1 kolon endestykke
- 1 Plast flaske
- 1 spatel
- 1 brukermanual


Reservedeler

- 11419-010
Rett kolonrør
- 11419-020
Kolon-rektumrør
- 11419-030
Kolonrørarmaturer (7 ringer uten fjær, 3 ringer med fjær)
- 11361-040
Smøremiddel for kolon-rektumrør (blå pakninger) 30 stk à 50 ml
- 11361-050
Endoskop smøremiddel (rosa pakker) 30 stk à 20 ml
- 11419-040
Simulert biopsiverktøy

* Kolonoskop ikke inkludert.

Kolonoskop treningssimulator

M40

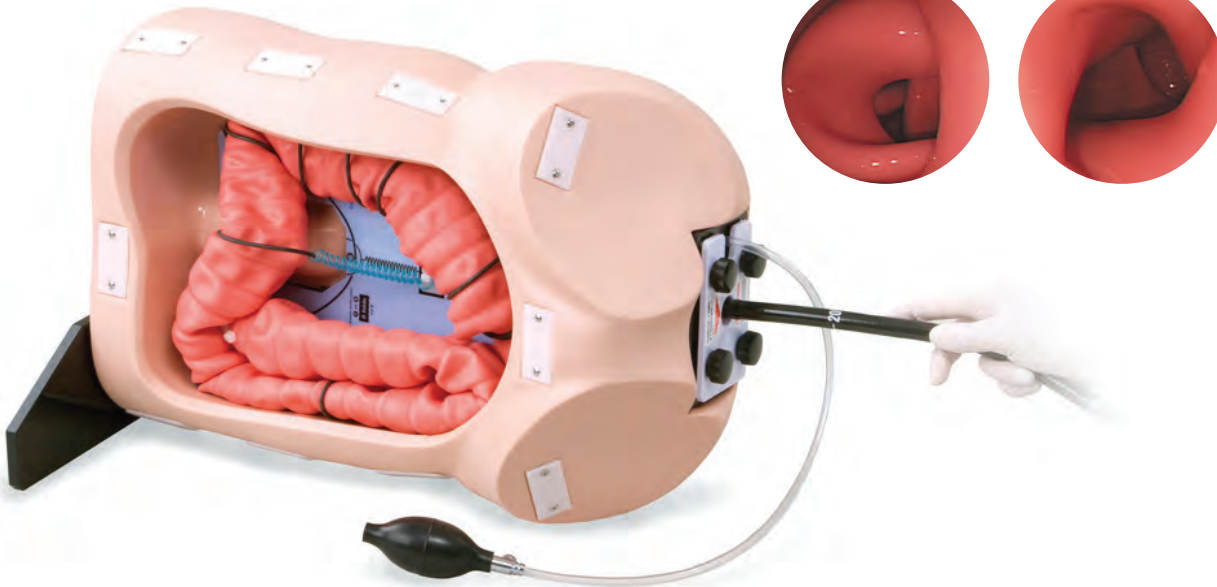

Det myke, fleksible tykktarmsrøret gir en naturtro respons ved bruk av et kolonoskop og muliggjør trening av ferdigheter som å forhindre "løkker" og trygg manøvrering frem til blindtarmen.

Egenskaper

- Fra enkle og ukompliserte tilfeller til vanskelige og sensitive variasjoner, er denne opplæringssimulatoren designet for å gi rom for et bredt spekter av utfordringer for både studenter og profesjonelle.
- Kolonrøret kan gjøres lufttett, for å muliggjøre insufflasjon og sug.
- Anal sfinkteråpning kan manipuleres med en håndpumpe.

Treningselementer

◆ Koloskopi

Innsetting av kolonrøret



Justerbar åpning av anus



Åpen



Lukket

Plasser kroppen i riktig posisjon




Sideleie



Ryggleie

Velg vanskelighetsgrad på trening

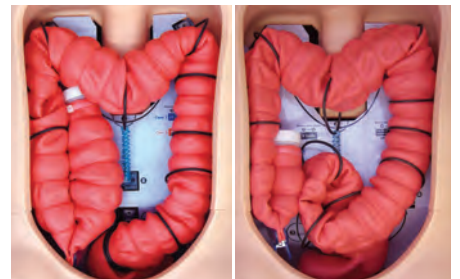

Settet inkluderer

- 1 abdomenmodell
- 1 kolon/rektumrør
- 1 anusenhet
- 1 luftballong
- 1 abdomenhud deksel
- 1 sett kolon festeinnretning
- 5 kolon layoutguider (6 tilfeller totalt)
- 1 konsentrert gel/smøremiddel pakke

- 1 plastflaske
- 1 bordstøtte
- 1 gummiduk
- 1 anusplugg
- 1 brukermanual
- 1 treningsguide
- 1 oppbevaringskoffert

Spesifikasjoner

B48 x D22 x H30 cm
Størrelse: 48 x 22 x 30cm
Vekt: 6,5kg
Materialer: Myk harpiks, hard harpiks, latexfri

Reservedeler

- 11361-010 kolon/rektumrør
- 11361-120 anus enhet
- 11361-030 kolon festeinnretning
- 11361-020 sett kolon layoutguide

- 11361-040 gel/smøremiddel for tykktarm-endetarm rør (blå pakker) 30stk x 50ml hver
- 11361-050 endoskop gel/smøremiddel (rosa pakker) 30stk x 20ml hver

* Kolonoskop ikke inkludert.

Strap-on for intramuskulær injeksjon

M67C

For praksis mellom studenter, simulerte pasienter og mannekeng, for å lette deres forståelse av den intramuskulære injeksjonsprosessen og kommunikasjonen.



Se demofilm på YouTube



Egenskaper

- ◆ Vanntanken er plassert inne i denne treneren.
- ◆ Realistisk taktil følelse av hud og acromion gjør det mulig å palperer det anatomiske landemerket.
- ◆ Lett å drenere.

Treningselementer

- ◆ Intramuskulær injeksjonstrening
- ◆ Covid-19 vaksinasjonsopplæring

Sett inkluderer

1 hovedenhet (ramme, hud, bløtvev, muskler, acromion, dreneringsreservoar, belter)
1 brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: W10.5 x D26 x H5.5
Materiale: Myk harpiksx, latexfri
Anbefalt sprøyte: IM needle 23G

Reservedeler

11297-220 erstatningsskinn
11297-230 erstatningsdel for bløtvev
11297-240 erstatningsmuskulær del

Treningssett for intramuskulær vaksinasjon

MW64

Dette treningssettet for intramuskulær vaksinasjon vil unektelig være til hjelp med trening av de tusenvis av helsepersonell som er involvert i COVID19-vaksinering fordi det er enkelt, lett å bruke og krever svært lite vedlikehold.



Egenskaper

- ◆ Simulert deltamuskel i armen, er palperbar, noe som muliggjør realistisk trening på intramuskulære injeksjoner.
- ◆ Dybden på puten er 11/2" (38,1 mm)
- ◆ Injeksjonsputen har en svært absorberende svamp innebygd, slik at du faktisk kan injisere væsken gjentatte ganger.
- ◆ Dette vaksinasjonsopplæringssettet kan brukes sammen med en av våre pasientpleie simulatorer eller en medstudent.

Treningselementer

- ◆ Intramuskulær injeksjon av vaksine i deltamuskelen

Sett inkluderer

5 vaksinasjonstreningssputer
5 puteholdere
5 strap-on belter
1 brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: W12 x D14 x H5.5 cm
Materiale: Myk harpiksx, latexfri
Anbefalt sprøyte: IM needle 23G

Reservedeler

11454-010 Pad for vaksinasjonstreningssett, sett med 5 stk
11454-020 Pad for vaksinasjonstreningssett

Arteriell punksjonstrening håndledd

Product Supervision

Dr. Hiroshi Koyama,
Medical Director, General Internal Medicine National
Hospital Organization Kyoto Medical Center



Radial arteriepunksjon er en vanlig metode for blodprøvetaking og arterie kateterisering. Det er imidlertid en utfordrende ferdighet for studentene å mestre. Denne innovative simulatoren er utviklet for å gi opplæring i arteriell punksjon med en svært virkelighetsnær følelse.

Egenskaper


- Arteriell puls kan palperes
- Realistisk motstand i vevet og blodårevæggen kan føles med nålen.
- Naturlig flashback av kunstig blod inn i nålen kan observeres.
- Radial arteriell katetere kan simuleres.
- Ingen punksjonsspor forblir på injeksjonsstedet.
- Ettgreps, lekkasjefrie skjøter.
- Enkel rengjøring.

Treningselementer

- ◆ Radial arteriell punksjon
- ◆ Arterie blodprøvetaking
- ◆ Radial kateterplassering



Radial arteriell katetere

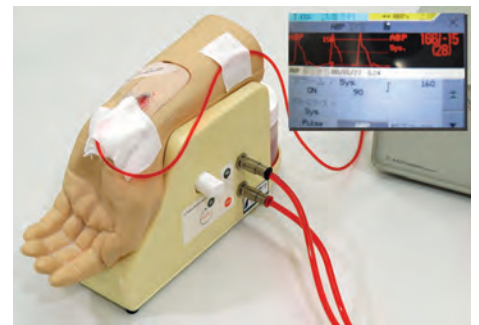

IABP Måling
(Arterietrykk verdier er ikke simulert)

Settet inkluderer

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 modell av håndledd og underarm | 1 skje |
| 1 sirkulasjonspumpe | 2 plastbeholdere |
| 2 sett med punksjonshud (indre og ytre hud) | 2 tilkoblingsslanger |
| 4 arterier | 1 vinylduk |
| 1 silisiumtape | 1 oppbevaringskoffert |
| 1 beholder med fargepulver (rød) | 1 brukermanual |

Spesifikasjoner

Størrelse: B20 x D9 x H16 cm
(mannekengstørrelse)
Størrelse: B20 x D16 x H13 cm
(pumpestørrelse)
Strøm: AC100-240V, 50/60 Hz
Materiale: Myk harpiks, latexfri

Reservedeler

- 11351-010
1 erstatning hudsett
(sett av ytre og indre deler)
11351-030
4 erstatning silisiumtape
11351-040
4 erstatning arterier




Instruksjoner på YouTube

Ultralydveiledet PICC treningssimulator

MW18





Se demofilm på YouTube

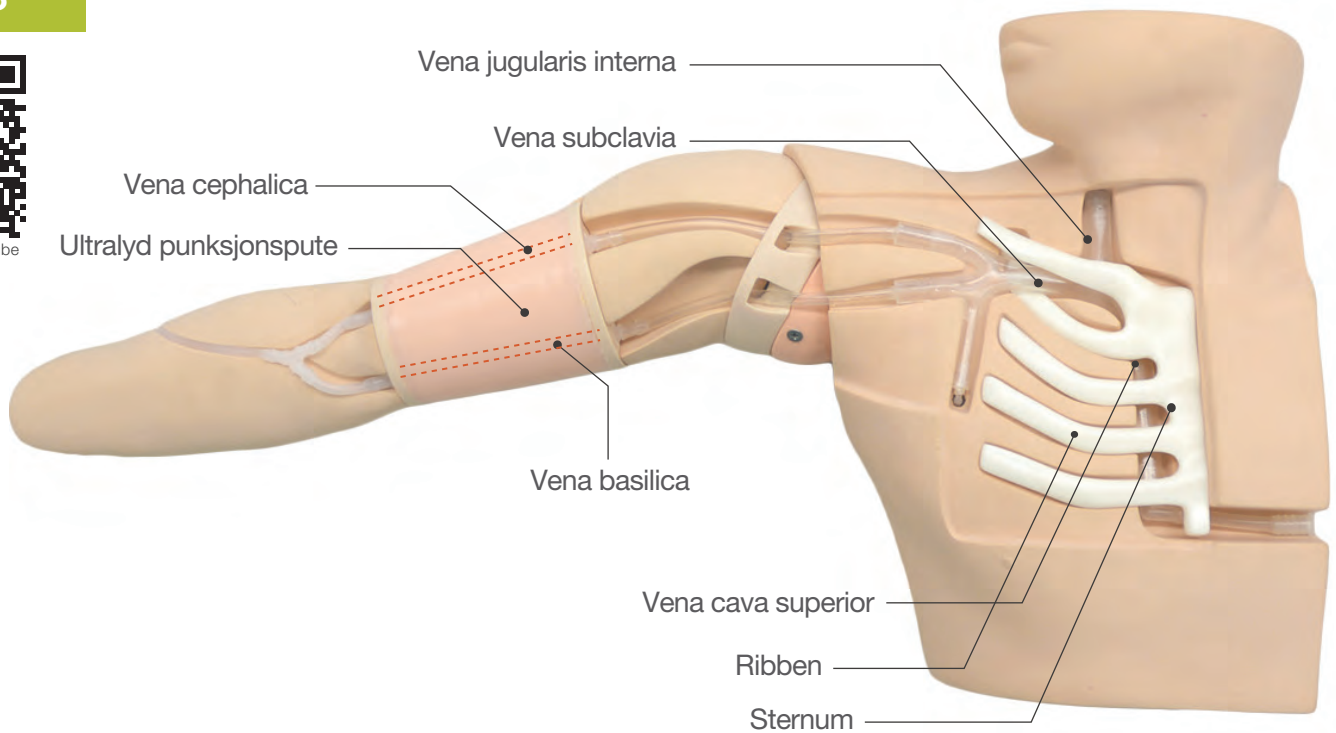

Egenskaper

- Utmerket bildekvalitet og visualisering av nålespissen for ultralydveiledet venetilgang
- Bevegelig skulder
- Gir trening i en rekke prosedyrer fra nålestikk til kateternål-plassering
- «Flash-back» bekreftelse på vellykket venetilgang
- Ribben og høyre krageben er inkludert for å bestemme lengden av kateteret samt gi anatomisk korrekt forståelse av en PICC nål lokalisering.
- Anatomisk korrekt forgrening av årer
- Simulering av feilposisjonering av kanylen

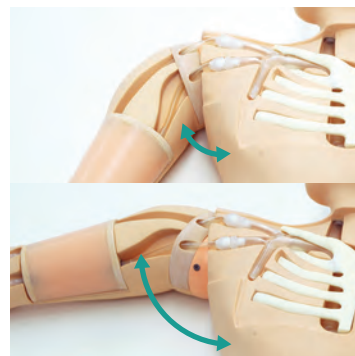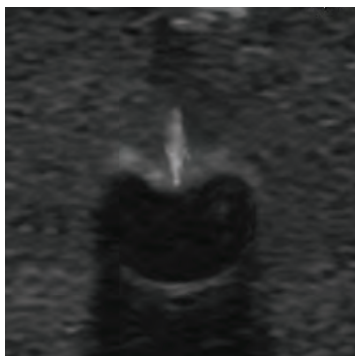

Sett inkluderer

- 1 mannlig øvre torso med høyre arm
- 2 PICC punksjonsputer
- 10 simulerte blodpinner (vattpinne)
- 1 sprøyte
- 1 beholder
- 1 brukermanual
- 1 oppbevaringskoffert

Spesifikasjoner

Størrelse: B40 x D60 x H15 cm
Vekt: 4,5 kg
Materialer: Myk harpiks, hard harpiks, latexfri

Reservedeler

11348-010
2 PICC punksjonsputer




Perifert innsatt sentralkateter (PICC) regnes for å være en trygg tilnærming for å plassere et kateter i den sentrale linje, og bruk av ultralydveiledning anbefales for å redusere risiko for pasientene.

Denne helt nye simulatoren er den eneste modellen i sitt slag som gir opplæring i fulle prosessuelle ferdigheter fra nålinnsetting, manipulering av PICC, til plassering av den distale nålespissen i SVC. Begge basilic og cephalic årer er forberedt for tilgang med ulike nivåer av utfordringer i kanylering. Det ultralydklargjorte stikkstedet er utskiftbart. Den bevegelige skulderen muliggjør trening i posisjonering av armen for å unngå mulig feilposisjonering av kateteret. Anatomisk korrekt bifurkasjon av venen i øvre bryst gir realistisk motstand av ytre vegger og muliggjør simulering av komplikasjoner som feilposisjonering av kateter i jugulare, thoracodorsale og subklavikulære vener.

Simulatoren er ideell for praktisk opplæring av medisinsk personell, spesialsykepleiere og radiografer.

Treningselementer

- ◆ **Pasientposisjonering**
- ◆ **Seldingers teknikk**
- ◆ **Valg av stikkstedet**
- ◆ **Peel-away kanyleteknikk**
- ◆ **Ultralydveiledet venetilgang**
- ◆ **Innføring av kanylen inn i SVC**

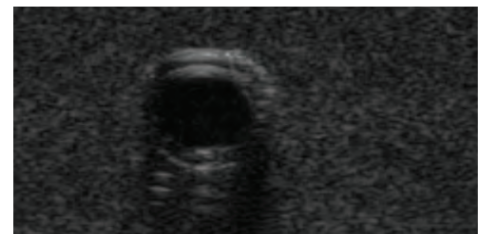

Valg av punksjonssted



Ultralydveiledet punksjon



Guidewire innsetting



Dilasjon



Kanylering

Nye innovative pads

Nyutviklede engangs pads er en innovativ del av denne treningsenhet.



CVC* katetersimulator II

M93UB


Se demofilm på YouTube

Product Supervision

Masahiro Tanabe, M.D., Ph.D., Professor Director General Medical Education Center Chiba University School of Medicine

Kinya Sando, M.D., Ph.D., Professor Director Department of Human Dietetics Graduate School of Human Science Osaka Shoin Women's University


Masanori Hoki, M.D., Ph.D., Professor Department of Human Dietetics Graduate School of Human Science, Osaka Shoin Women's University

 Joho Tokumine, M.D.Ph.D.
Department of Anesthesia, Kawatetsu Chiba Hospital


CVC (Central Venous Catheter) katetersimulator II gir effektiv opplæring i både landemerke- og ultralydveiledet sentralvenøs kateterisering. For begge prosedyrer, er innledende trening forberedt slik at kandidatene kan utvikle sine ferdigheter i rekkefølge. Denne simulatoren er den eneste i sitt slag som gir simulering av vanlige komplikasjoner inkludert feil lokalisering.


Egenskaper

- Naturtro ultralydveiledet CVC.
- Landemerke punksjonspute med anatomisk korrekte åreforgreninger simulerer mekaniske komplikasjoner inkludert pneumothorax, feillokalisering og arterie punksjon.
- Transparent anatomisk blokk for anatomisk forståelse og manipulasjon av guidewire.
- Innledende ultralyd treningsblokk for å tilegne seg det grunnleggende i ultralydveiledet venøs tilgang.
- Begge vener, vena jugularis interna og vena subclavia (aksillær), er tilgjengelig.

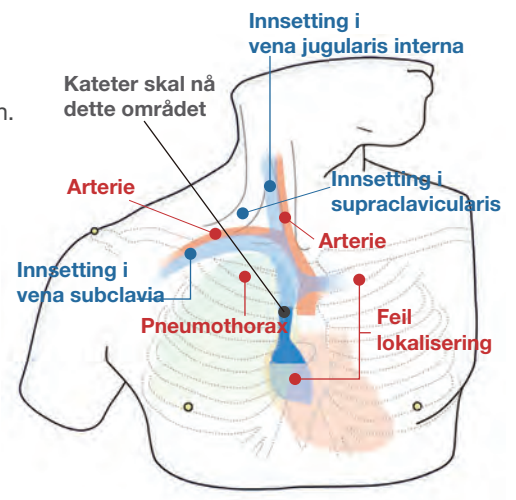

Treningselementer

- ◆ Ultralydveiledet CVC
- ◆ Landemerkeveiledet CVC
- ◆ Ultralydveiledet venøs tilgang
- ◆ Forebygging av mekaniske komplikasjoner

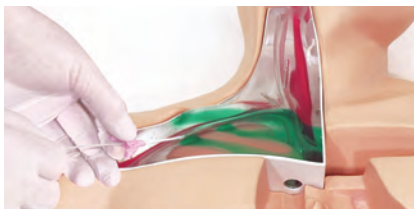

Transparent anatomisk blokk



Ultralyd punksjonspute



Ultralyd treningsblokk

Sett inkluderer

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1 mannlig overkropp mannequin | 1 luftballong |
| 1 landemerke punksjonspute | 2 plastbeholdere |
| 1 transparent anatomisk blokk | 1 skylleflaske |
| 1 innledende ultralyd treningsblokk | 1 sprøyte |
| 1 hud for kanyleringstrening | 1 prøvesprøyte |
| 1 rødt fargepulver | 1 prøvenål |
| 1 blått fargepulver | |

* Central Venous Catheter

Spesifikasjoner


 Størrelse: B40 x D20 x H34 cm
Vekt: 2,3 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

Reservedeler

- | | |
|-----------|---|
| 11347-280 | 2 landemerke punksjonspute |
| 11347-170 | 2 ultralyd punksjonspute |
| 11347-210 | 2 innledende ultralyd treningsblokker |
| 11347-240 | 2 CVC plasseringsputer |
| 11347-250 | pulseringsenhet for CVC plasseringspute |
| 11347-260 | 1 pulseringsenhet (for M93UB) |
| 11347-320 | skylleflaske |

CVC* katetersimulator III

M93C

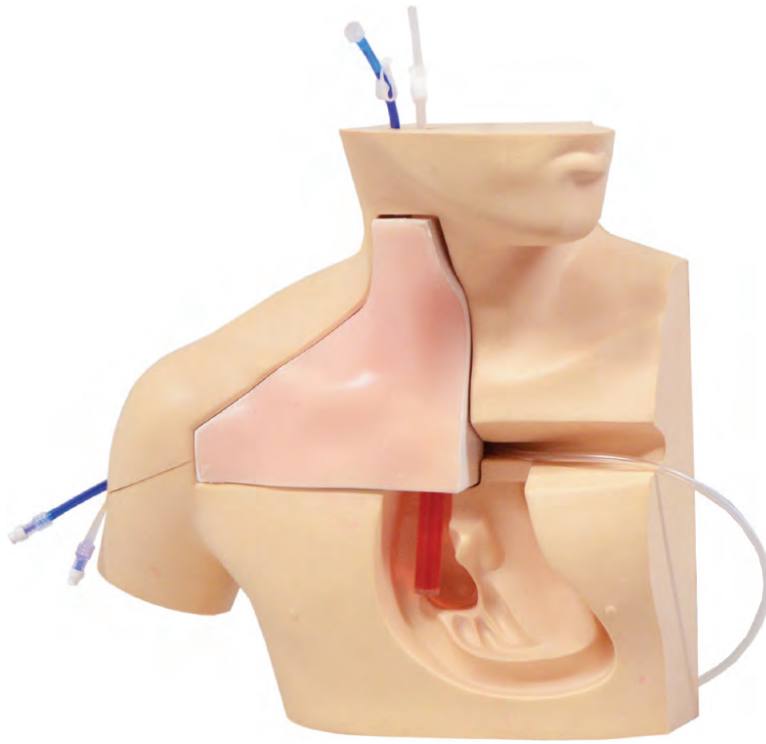

Treningselementer

- ◆ Ultralydveiledet CVC
- ◆ Landemerke guidet CVC
- ◆ Ultralydveiledet venetilgang
- ◆ Forebygging av mekaniske komplikasjoner

CVC (Central Venous Catheter) katetersimulator III gir opplæring i en sekvens av prosessuelle ferdigheter fra nåleinnsetting til kateterisering, inkludert Seldinger teknikk.

CVC katetersimulator III gir opplæringsmuligheter i en rekke prosessuelle ferdigheter fra å fastsette innstikkstedet, plassering av kateteret – uten avbrudd. Både landemerke og ultralydveiledet kateterisering er mulig.

Egenskaper

- Gjentatt innsetting:
Forbedret friksjonsfritt vev i padden tillater Seldinger teknikk og gjentatte innsettinger og fjerning av katetret med mindre nålestikkmerker igjen på overflaten på padden.
- Både landemerke og ultralydveiledet CVC:
Anatomisk riktig struktur forenkler opplæring i både landemerke og ultralydveiledet CVC.
- Mekaniske komplikasjoner, for eksempel arteriell punksjon og pneumotoraks kan simuleres for opplæring.
- Nytt materiale
Nær menneskelig vevsmateriale i padden gir naturtro følelse i kateteret.
- Realistisk venøs kollaps



Palpasjon




Flash-back bekreftelse




Plassering guide-wiren og trer inn dilatatoren



Kanylering

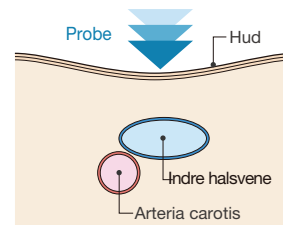

- Indre halsvene og halspulsåre
- Subclavia vene & arterie
- Superior vena cava
- Ribben
- Sternum
- Lunge

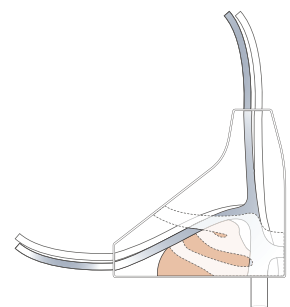

Sett inkluderer

- 1 mannlig overkropp mannekeng
- 2 CVC landemerke punksjonspad
- 1 hud for kanyleringstrening
- 1 gjennomiktig anatomisk blokk
- 2 arterieslange (transparent): 2 typer
- 2 veneslange (blå): 2 typer
- 2 venerør

- 1 pulseenhet (for landemerke teknikk)
- 1 skylleflaske (for UG teknikk)
- 1 plastbeholdere
- 2 fargepulver (rød/blå)
- 1 prøvenål
- 1 sprøyte (2,5 ml, 50 ml)
- 1 innledende ultralyd treningsblokker REAL VESSELS

Reservedeler

- (11347-210)
- 2 innledende ultralyd treningsblokker REAL VESSELS
- (11347-240)
- 2 CVC plasserings pads
- (11347-260)
- 1 pulseenhet
- 11347-320
- skylleflaske

Spesifikasjoner

Størrelse: B40 x D20 x H34 cm

Materialer: myk harpiks, hydrogel, hard harpiks, latexfri

* Central Venous Catheter

Ultralydveiledet torakocentese simulator

MW4



Se demofilm på YouTube

Fremoverbøyd



Product Supervision

Takahiro Amano, M.D.
Vice President
Senior Vice-Dean, Postgraduate School
Professor and Director, Center of Postgraduate Medical Education
International University of Health and Welfare
Honorary Director, Sanno Medical Center

Sittestilling



Ultralydveiledet torakocentese simulator har to typer punksjonsenheter: midtre scapulærlinje og midtre aksillærlinje.


Egenskaper

- Utmerket ultralydbildet.
- Ribbeina kan palperes.
- Strap-on punksjonsenheter for å lære pasienten posisjonering og ansikt-til-ansikt kommunikasjon.
- Kroppstorso for enmanns trening.
- Tilgang to områder: høyre midtre scapulærlinje og venstre midtre aksillærlinje.
- Volum på pleuraleffusjon kan kontrolleres for å angi ulike utfordringer på forskjellige ferdighetsnivåer.

Treningselementer

- ◆ Pasientposisjonering
- ◆ Gjenkjenning av anatomiske landemerker ved ultralyd
- ◆ Vurdering av pleuravæske nivå og volum
- ◆ Lokalisering av innstikkstedet
- ◆ Nålinnsetting og tapping av pleuravæske

● Utmerket ultralydbildet

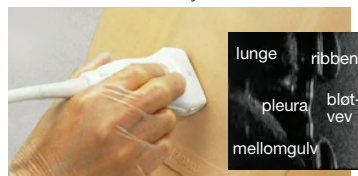

Anatomi inkluderer:
ribben, pleura, bløtvev og mellomgulv

● Ribbena kan palperes



Midtre aksillærlinje enhet: 6. til 9. ribbe
Midtre scapulærlinje enheter: 8. til 11. ribbe

● Vellykket nåleplassering: tapping av væsken




Realistisk følelse av nålspissmotstand
og nålpenetrasjon

● Strap-on punksjonsenheter



Strap-on punksjonsenheter for å lære pasienten
posisjonering og ansikt-til-ansikt kommunikasjon

● Simulering av risiko for komplikasjoner

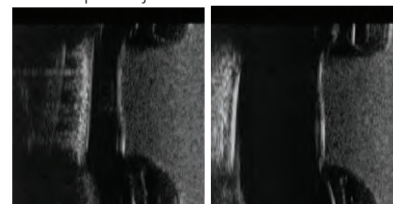

Volum på pleuraleffusjon kan kontrolleres for å angi
utfordringer på forskjellige ferdighetsnivåer

● Bekreftelse av punksjonsretning



Forklaringsmodell for å tilegne seg
anatomisk forståelse

Ultralydveiledet torakocentese simulator

– strap-on sett –

MW4A



Se demofilm på YouTube



Ultralydveiledet torakocentese simulator med strap-on punksjonsenheter som letter hybride treningsøkter (festes rundt brystkassen).

Egenskaper

- Utmerket ultralydbilde.
- Ribben kan palperes.
- Realistisk nålspissmotstand og nålpenetrasjonsfølelse.
- Strap-on punksjonsenheter for å lære pasienten posisjonering og ansikt-til-ansikt-kommunikasjon
- To områder for tilgang: rett midtre scapulær linje og venstre midtre aksillærlinje
- Volum av pleuraleffusjon kan kontrolleres for å angi forskjellige nivåer på utfordringer.

Treningselementer

- ◆ Pasientposisjonering
- ◆ Lokalisering av anatomiske landemerker med ultralyd
- ◆ Vurdering av nivå og volum av pleuravæske
- ◆ Fastsettelse av innstikkstedet
- ◆ Nåleinnsetting og tapping av pleuravæske

Product Supervision


Takahiro Amano, M.D.
Vice President
Senior Vice-Dean, Postgraduate School
Professor and Director, Center of Postgraduate Medical Education
International University of Health and Welfare
Honorary Director, Sanno Medical Center

● Trening med SP*




Strap-on punksjonsenheter for å lære pasientposisjonering og kommunikasjon

● Utmerket ultralydbilde

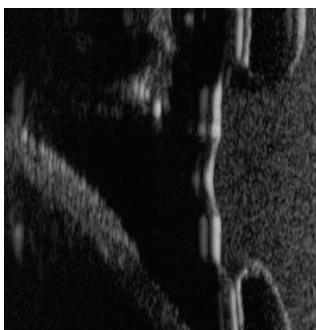


Anatomii inkluderer: ribben, pleura, bløtvev og diafragma

● Simulering av risiko for komplikasjoner

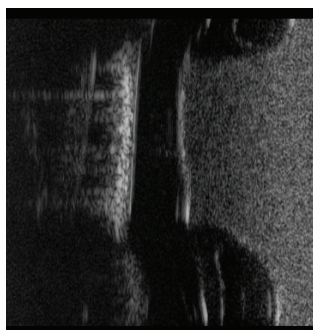

Volumet av pleuræffusjon kan kontrolleres for å simulere forskjellige utfordringsnivåer

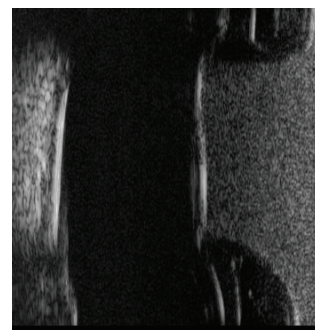

* Standard pasient

Ultralydveiledet perikardiocentese simulator

MW15


Se demofilm på YouTube

Product Supervision

Takahiro Amano, M.D.
 Vice President
 Senior Vice-Dean, Postgraduate School
 Professor and Director, Center of Postgraduate Medical Education
 International University of Health and Welfare
 Honorary Director, Sanno Medical Center



Opplæring for trygg Pericardiocentesis med ultralyd veiledning

Denne simulatoren gir kandidatene virkelighetsnær erfaring i å sette nålen under ultralydveiledning, plassere nålen i "perikardsekken" og tappe perikardvæske.

Egenskaper

- Punksjonspad er slitesterk og utskiftbar.
- Landemerker for palpasjon og ultralydlandemerker er forberedt for å praktisere subxiphoid tilnærming og parasternal tilnærming.
- Realistisk nålespissfølelse når nålen gjennomtrenger «perikardsekken»

Treningselementer

- ◆ **Pasientposisjonering**
- ◆ **Visualisering av pericardialvæske under ultralydundersøkelse**
- ◆ **Landmarkepalpasjon**
- ◆ **Nålestikk til perikardområdet**
- ◆ **Tapping av perikardeffusjon**

● **Palpasjon av landemerker**



Identifisering av "Larrey's punkt" (venstre xifisternal forbindelsespunkt) for nålestikk.

● **Ultralyd veiledet perikardiocentese**



Sette inn nålen til perikardområdet med ultralydveiledning.

● **Tapping av**



Ventriklene, ribben, hjerteposen, lever og hovedpulsåren bekreftes.



Ultralydveiledet torakocentese/- perikardiocentese simulator

MW17

Product Supervision

Takahiro Amano, M.D.
Vice President
Senior Vice-Dean, Postgraduate School
Professor and Director, Center of Postgraduate Medical Education
International University of Health and Welfare
Honorary Director, Sanno Medical Center




Se demofilm på YouTube


Trening på begge punksjons-
ferdigheter i 1 modell.



Torakocentese

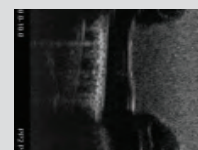

Perikardiocentese

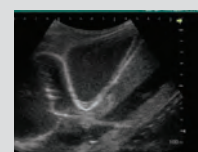

Inkludert i settene MW4, MW15, MW17, MW4A

	MW4 Thoracen- tesis	MW15 Pericardio- centesis	MW17 Fullt-sett	MW4A Strap-on- sett
1 voksen brystmodell med avstandsstykke	●	●	●	
1 midtre aksillærlinje. (beholder med organer, punksjonspute og stropper)	●		●	●
1 midtre-scapulærlinje enhet (beholder med organer, punksjonspute og stropper)	●		●	●
1 punksjonspute for pericardiocentesis		●	●	
1 pute for posisjonering	●	●	●	
1 forklaringsmodell for torakocentese	●		●	
1 brukermanual	●	●	●	●

Tilbehør				
1 skyllesett	●		●	
1 trakt	●		●	●
1 50 ml sprøyte	●	●	●x2	●
1 koblingslange		●	●	
1 rør med treveis stoppekran	●		●	●
1 plastbeholder	●		●	●

Lumbalpunksjon simulator II

M43B/43B-B



Se demofilm på YouTube



Fem typer epidural punksjonsblokker forsterker treningen med ulike nivåer av utfordringer.

Product Supervision

Takahiro Amano, M.D.
Vice President
Senior Vice-Dean, Postgraduate School
Professor and Director, Center of Postgraduate Medical Education
International University of Health and Welfare
Honorary Director, Sanno Medical Center



Egenskaper

- Simulatoren M43B gir en virkelighetsnær simulering av lumbalanatomi inkludert landemerker.
- Gir en naturtro følelse av både hud og vevsmotstand mot spinalnålen.
- Tilbyr studentene mulighet til å måle CSF væsketrykk, prøvetaking av CSF væske og øve på epiduralanestesisprosedyrer i klinisk realistiske forhold.
- Epiduralblokk med utmerket nålespissfølelse.
- Tap-av-trykkteknikk med vann eller luft kan også bli simulert.
- Lumbalregion støttefundament for enten enkeltpersoner eller gruppepraksis.
- Fem ulike typer punksjonsblokker: Normal CSF, overvektig CSF, senior CSF, senior overvektig CSF.

Treningselementer


- ◆ **Palpasjon av landemerker**
- ◆ **Lumbalpunksjon**
- ◆ **CSF prøvetakning**
- ◆ **CSF trykkmåling**
- ◆ **Epiduralanestesi**
- ◆ **Anatomisk forståelse**



Palpasjon av landemerker



CSF trykkmåling

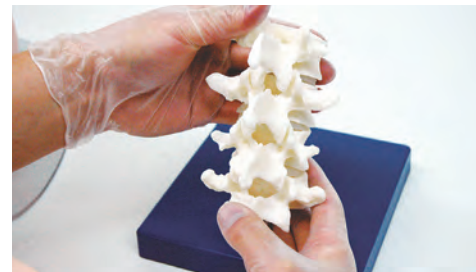

Modell av lumbalryggssøyle

Settet inkluderer

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 modell av lumbalregion | 3 lumbalregion støtteunderlag: |
| 6 lumbal punksjonsblokker | sittende stilling, |
| 2 normal CSF, | sideleie, for gruppeopplæring |
| 1 overvektig CSF, | 1 modell av lumbalryggssøyle |
| 1 senior CSF, | 1 reservoarpøse, slange, stativ og sprøyte |
| 1 senior overvektig CSF, | 1 brukermanual |
| 1 epidural | 1 oppbevaringskoffert |
| 1 lumbalregion hudovertrekk | |

Spesifikasjoner

Størrelse: B33 x D21 x H30 cm
Materialer: myk harpiks, latexfri

Reservedeler

- 11348-090 LP blokk (normal CSF)
- 11348-110 LP blokk (overvektig CSF)
- 11348-120 LP blokk (senior CSF)
- 11348-130 LP blokk (senior overvektig CSF)
- 11348-140 epiduralblokk
- 11348-150 lumbalregion hudovertrekk
- 11348-160 støttestativ

Ultralydkompatibel lumbal-/epidural punksjon

M43E







Denne ultralydkompatible punksjonsblokken er anatomisk riktig og tilbyr realistiske ultralydbilder. Inkludert er vertebrae lumbales, processus spinosus, processus articularis superior vertebrae, processus transversus vertebrae, cavitas epiduralis og dura mater spinalis.

Egenskaper

- Ultralyd landemerker i lumbal ryggspyte kan visualiseres.
- Reservedeler er slitesterke for flere treningsøkter.
- Simulatoren kan plasseres oppreist eller i sideleie.
- Transparent blokk gjør nålens bane og plassering synlig.
- Modellen av lumbalregionen gir en rekke opplæringsmuligheter ved å legge til utskiftbare opplæringsblokker for landemerker og fluoroskopiske prosedyrer.

Treningselementer

- ◆ Ultralydveiledet spinalpunksjon
- ◆ Ultralydveiledet epidural anestesi
- ◆ CSF prøvetaking og CSF trykkmåling

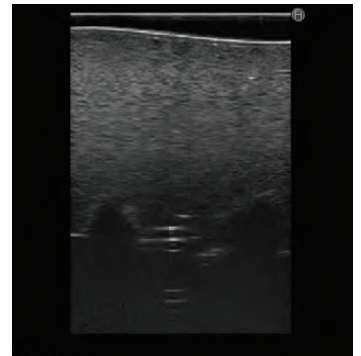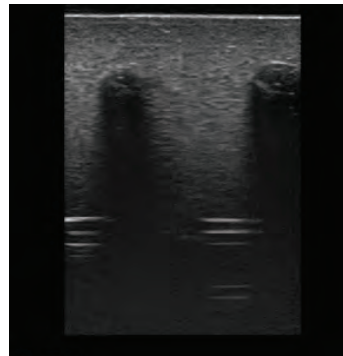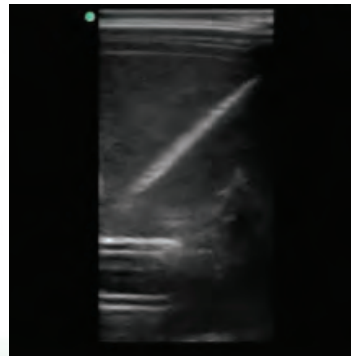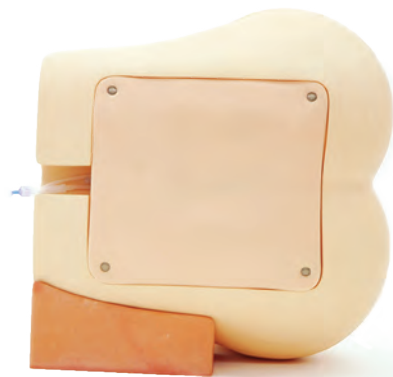

Settet inkluderer

- 1 lumbalregion modell
- 1 ultralyd lumbalpunksjons-/epiduralblokk
- 1 lumbalregion huddeksel
- 2 lumbalregion støtteblokker (vertikal stilling / lateral stilling)
- 1 skyllepose / slange / støtteblokk og sprøyte

Spesifikasjoner

Størrelse: B33 x D21 x H30 cm
Materialer: myk harpiks, polyurethane elastomer, latexfri

Reservedeler

11348-190 ultralyd lumbal punksjons-/epiduralblokk
11348-230 ultralyd lumbalregion hud cover for M43E


Epiduralanestesisimulator

MW3



Se demofilm på YouTube

Epiduralanestesisimulatoren tilbyr en rekke treningsmetoder på både thorax- og lumbalområdet med en punksjonsblokk som inkluderer ryggvirvlene fra T7 til L5.

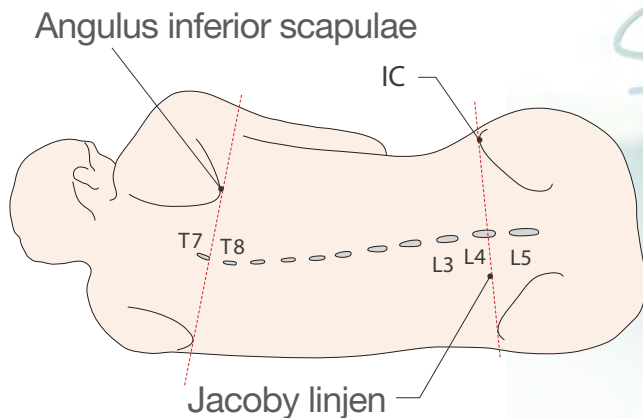

Egenskaper

- Anatomisk korrekt ryggstøyle som omfatter ryggvirvlene fra T7 til L5.
- Innebygde landemerker for palpasjon: IC, Angulus inferior scapulae og spinous prosess.
- Virkelighetstro motstand og gjennomtrengningsfølelse av nålespissen.
- Både venstre og høyre laterale stillinger er mulig.
- Simulerer tap av motstand mot saltvann eller vann
- Den brede punksjonsputen tillater paramedian tilgang samt median tilnærming.

Treningselementer

- ◆ Epiduralanestesiprosedyrer på både thorax og lumbalområdet
- ◆ Lumbalpunksjon



Settet inkluderer

- 1 naturlig størrelse unisex torso
- 5 punksjonsputer
- 1 støttesokkel
- 1 50 ml sprøyte


Spesifikasjoner

- Størrelse: B48 x D23 x H29 cm
- Vekt: -
- Materialer: Myk harpiks, latexfri

Reservedeler

- 11382-010
- 2 stk. reserve punksjonspute

Strap-on venepunksjon simulator

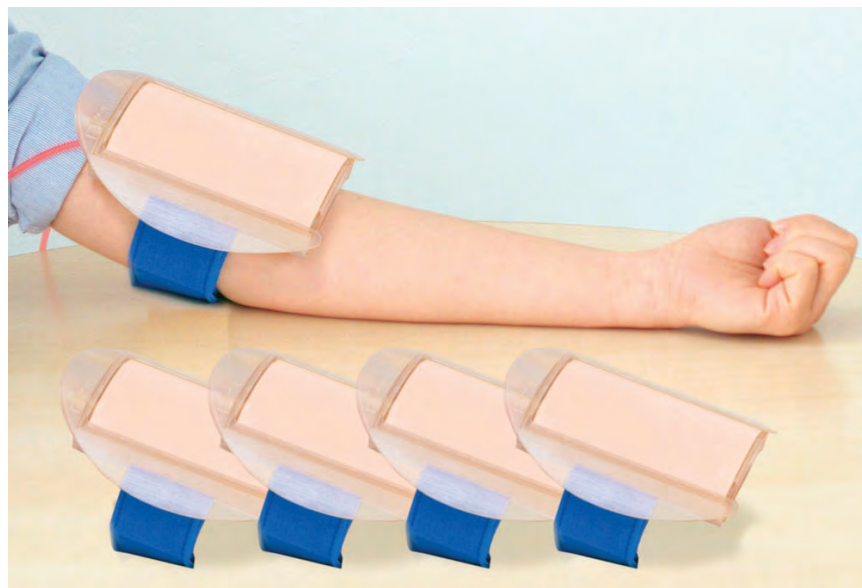

Strap-on venepunksjon simulator er et enkelt, økonomisk treningssett for intravenøs injeksjon.

Denne treningsmodellen er beregnet på å være fastspent på overarmen på en treningsassistent (standardisert pasient) eller på en opplæringsmodell i naturlig størrelse.

MW50


Egenskaper

- Realistisk vev og blodåreveggmotstand.
- Veneslange kan fylles ved hjelp av en myk plastflaske som fungerer som en manuell pumpe.
- Tre veneslanger er innebygd: 2 normale og 1 tynn.

Treningselementer

- ◆ **Blodprøvetaking**
- ◆ **Intravenøs injeksjon**



Settet inkluderer

5 holdere
5 punksjonspute (m/strap-on belte)
5 støtterammer med belte
5 injektorslange
5 avløpsslange
5 injeksjonsflasker

Spesifikasjoner

Størrelse (ca.)
holder: W11,9 x D13,9 x H2,5 cm
punksjonspute: B6,3 x D10,9 x H2,8 cm
materiale: myk/hard harpiks, latexfri

Intrakutan injeksjon treningssimulator



Denne simulatoren gir opplæring for Intrakutan injeksjon på den indre underarm. Hevelse av huden vil dannes når riktig injeksjonsprosedyrer blir fulgt.

Egenskaper

- Naturlig berøringsfølelse og motstand på injeksjonsstedet er svært lik en menneskelig arm. Den simulerer den menneskelige hudens elastisitet og muliggjør realistisk punksjonspraksis.
- Injeksjonspadene er lett utskiftbare.
- Ingen nålespor gjenstår.

Treningselementer

- ◆ **Intrakutan injeksjon**

M94


Se demofilm på YouTube

Settet inkluderer

5 punksjonspads
1 underarm modell
1 støtteblokk

1 oppbevaringskoffert
1 brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: B20 x D20 x H8 cm
Materiale: Myk harpiks, latexfri

Reservedeler

11346-010
1 punksjonspad

Simulator intravenøs arm III

MW49



Se demofilm på YouTube




Egenskaper

- To typer injeksjonsputer for plassering av vene-linje (underarm/håndbak)
- To typer injeksjonsputer for cubital fossa (vanlige og holdbare)

Treningselementer

- ◆ Anatomi av armen
- ◆ Vakuumslange blodprøvetaking
- ◆ Palpasjon / Intravenøs injeksjon
- ◆ IV-kanyleplassering og dryppinfusjon
- ◆ Blodprøvetaking med sprøyte/Flash-back-bekreftelse


Fire områder for punksjonsplassering

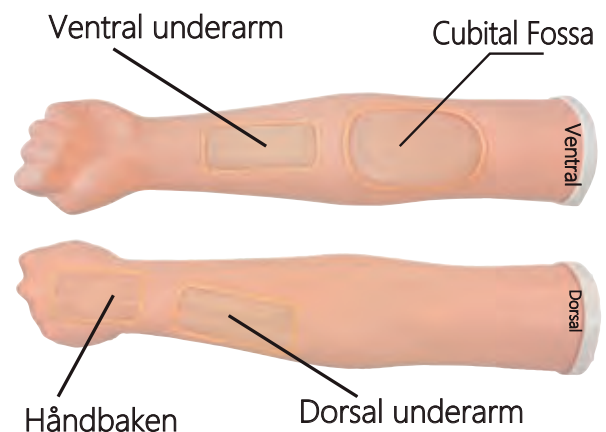

Settet inkluderer

- 2 armmodeller
- 2 støtteblokker
- 2 injeksjonsputer (R-pad)
- 2 injeksjonsputer (D-pad)
- 4 injeksjonsputer (underarm/antebrachial)
- 2 injeksjonsputer (baksiden av hånden)
- 1 sirkulasjonspumpe med plastkrukke
- 2 flasker med stativ for simulert blod
- 1 simulert blod (vattpinnepakke med 10 stk.)
- 2 plansjer armanatomi blodårer
- 1 oppbevaringskoffert
- 1 brukermanual

Sirkulasjonspumpe

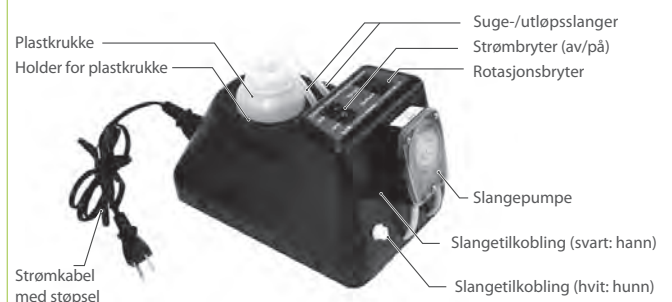

Spesifikasjoner

Størrelse (ca.)
 mannlig B8 × D21 × H18 cm
 kvinnelig B8 × D21 × H9 cm

Vekt (ca.)
 mannlig 0,5 kg
 kvinnelig 0,4 kg

Simulator for innlegging av perifer venekateter

Simulator for innlegging av perifer venekateter gir fulle prosessuelle ferdigheter fra injeksjon til å feste venekanyler.

MW9



Se demofilm på YouTube



Median antebrachium vene



Dorsal vene



Egenskaper

- Alle opplæringsferdigheter for administrasjon av perifer venøs tilgang
- To innstikksteder: median antebrachium vene og dorsal vene
- Praksis for forlengelse av håndens hud og angiopressur administrasjon
- Holdbar punksjonspad med venekanyler

Treningselementer

- ◆ **Bruk av staseslange**
- ◆ **Bekreftelse på stikksted**
- ◆ **Desinfisering av punksjonsstedet**
- ◆ **Punksjon med venepunksjonskanyler**
- ◆ **Bekreftelse av tilbakestrømning i punksjon**
- ◆ **Angiopressur og fjerning av kanyler**
- ◆ **Innsetting av infusjonsslange**
- ◆ **Bekreftelse av naturlig drypp**
- ◆ **Preparasjon av stikkstedet**
- ◆ **Injeksjon av medisinsk løsning med infusjonsslange**



Punksjon med kanyler



Bekreftelse av tilbakestrømning i punksjon



Angiopressur og fjerning av kanyler



Bekreftelse av naturlig drypp



Fiksering av stikkstedet



Injeksjon av medisinsk løsning med infusjonsslange

Sett inkluderer

- 1 armmodell
- 2 injeksjonspads for dorsal vene på hånden
- 2 injeksjonspads for median antebrachium vene
- 1 flaske for simulert blod
- 1 stativ for flaske med simulert blod

- 1 infusjonssett
- 1 infusjonspose
- 1 sprøyte (50 ml)
- 1 plastbeger
- 10 simulerte blodpinner (vattpinne type)
- 1 brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: B52 x D10 x H10 cm
Strømkilde: AC100V, 50/60 Hz
Materialer: myk harpiks, latexfri

Reservedeler

- 11388-200
- 2 injeksjonspads for median antebrachium vene
- 11388-300
- 2 injeksjonspads for dorsal vene hånd
- 11388-400
- 10 simulerte blodpinner (vattpinne type)

Gluteus Maximus injeksjonssimulator

M74



Se demofilm på YouTube



Epiduralanestesisimulatoren tilbyr en rekke treningsmetoder på både thorax- og lumbalområdet med en punksjonsblokk som inkluderer ryggvirvlene fra T7 til L5.

Egenskaper

- Den naturlige dukken for nedre torso består av tre lag: hud, muskler og skjelett.
- Trochanter major, anterior superior iliaca columna og sacrum kan palperes for å identifisere injeksjonsstedene.
- Tre metoder for intramuskulær injeksjon: Quarter-Trichotomi, Hochstetter-metoden og Clark-metoden.
- Indikatoren viser nøyaktigheten av nåleplasseringen og dens dybde.
- Riktig kanyleplassering kan bekreftes ved å kunne injisere væske.
- Ingen nålespor etterlates.

Treningselementer

- ◆ **Intramuscular injection**



Settet inkluderer

- 1 dukke nedre torso
- 1 stativ for Hochstetter-metoden
- 1 indikator
- 1 strømadapter
- 1 sett med sensorputer
- 1 brukermanual

Spesifikasjoner

- Størrelse: W32 x D35 x H20 cm
- Vekt: 3,2 kg
- Materialer: Myk harpiks, latexfri

Reservedeler

- 11213-010 hud
- 11213-020 sensor for punkteringspute
- 11213-030 sensor for Hochstetters område
- 11213-040 sensor for Clarks område

Laparoskopisk sutursimulator

– evalueringssystem kompakt –

Kvantitativ tilbakemelding kombinert med realistisk praktisk erfaring

MW56



Se demofilm på YouTube



Product Supervision

Makoto Hashizume, Professor, Center for Advanced Medical Innovation, Kyushu University, Japan

Munenori Uemura, PhD Professor (Assistant), Center for Advanced Medical Innovation, Kyushu University, Japan

Egenskaper

- Innovative vurderingskriterier og kvantitativ måling gir objektiv tilbakemelding til kandidatene.
- Kandidatenes personlige ferdighetsvurdering kan lagres for gjennomgang og analyse.
- Faktiske kliniske instrumenter kan brukes.
- Realistisk og naturtro suturduk.
- Kunne lage dine egne kriterier eller justere kriteriegrense til kandidatens nivå.

Treningselementer

◆ Laparoskopisk suturering (enkel avbrutt sutur)

Bedømme suksess eller fiasko

- Er såret suturert uten en lekkasje?
- Er sutur fullført gjennom muskulært lag til mukøs lag?
- Er ligatur passende for sutur?
- Hvor mye åpent område er det i mukøs lag?
- Hvor lang tid tar suturprosedyre?



Naturtro tarmkanal

Tarmkanalen har fire lag med respektive egenskaper. Når de holdes med tang og sutur, reagerer disse fire lagene som ekte vev.

Enkelt oppsett



Spesifikasjoner

Størrelse: B150xD200xH130mm evalueringsenhet
Vekt: 1,5 kg evalueringsenhet
Materialer: Myk harpiks, latexfri
Strømkilde: AC100V 50/60Hz
Strømforbruk evalueringsenhet: 26VA
Strømforbruk PC: 40VA

Settet inkluderer

1 laparoskopisk sutur evalueringsenhet
1 strømkabel for evalueringsenhet
1 sett med huddukholder
1 kabel
1 tastatur
1 PC
1 strømkabel for PC
30 sett med suturduker
1 oppbevaringsboks
1 brukermanual

Reservedeler

11395-010
30 sett med suturduk
1 sett består av indre lag og ytre lag

Laparoskopisk treningsboks, monitor, tenger og kamera er ikke inkludert i settet.

Laparoskopisk sutursimulator – evalueringssystem –

MW16



Se demofilm på YouTube



Laparoskopisk sutursimulator evaluerer ferdigheter i laparoskopisk intestinal sutur, samt enkel hudsutur. Simulatoren forenkler også grunnleggende opplæring i laparoskopi.

Egenskaper

- Denne modellen evaluerer ferdigheter i laparoskopisk sutur i intestinalområde.
- Evalueringsdata på kandidatens ferdighetsnivå kan lagres.
- Intestinale deler er laget av naturtro materiale. Naturlig nålspissrespons kan føles ved punksjon og innføring.
- Utstyret kan lagres i unit-modellen og er alltid klar til bruk.
- Lekkasetest med luft for å validere effektiv sutur.

3 treningsmoduser

Laparoskopisk intestinal sutur




Bruk av pinsett i grunnleggende trening på suturferdigheter. Kandidatens ferdigheter kan evalueres etter 5 kriterier.

Laparoskopiske pinsettrening



Kandidatene lærer å bruke pinsett i den innebygde treningsboksen inkludert i unit-modellen.

Evaluering av hudsutur under direkte observasjon

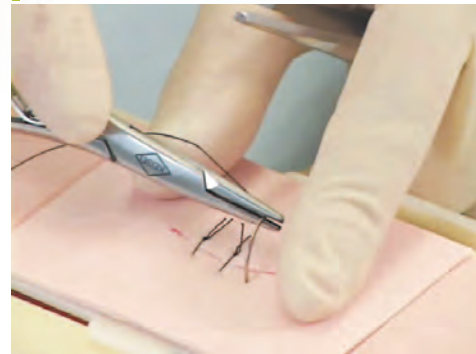

Uten bruk av treningsboksen, kan unit-modellen brukes til hudsutur under direkte observasjon.

Product Supervision

Makoto Hashizume, Professor, Center for Advanced Medical Innovation, Kyushu University, Japan

Munenori Uemura, PhD Professor (Assistant), Center for Advanced Medical Innovation, Kyushu University, Japan

Stor skjerm gir god oversikt for gruppelæring


Stor monitor viser:

- En pågående demonstrasjon for gruppeundervisning.
- Lagret evalueringsdata for gjennomgang i gruppediskusjoner

Lagret evalueringsdata for selvlæring

Dataskjermen viser siste evalueringsdata.

- Kandidatens nåværende suturferdigheter kan sammenlignes med lagrede data fra tidligere treningsøkter.
- Hjelper kandidaten å forstå sin opplæringsfremskritt og forbedringer.

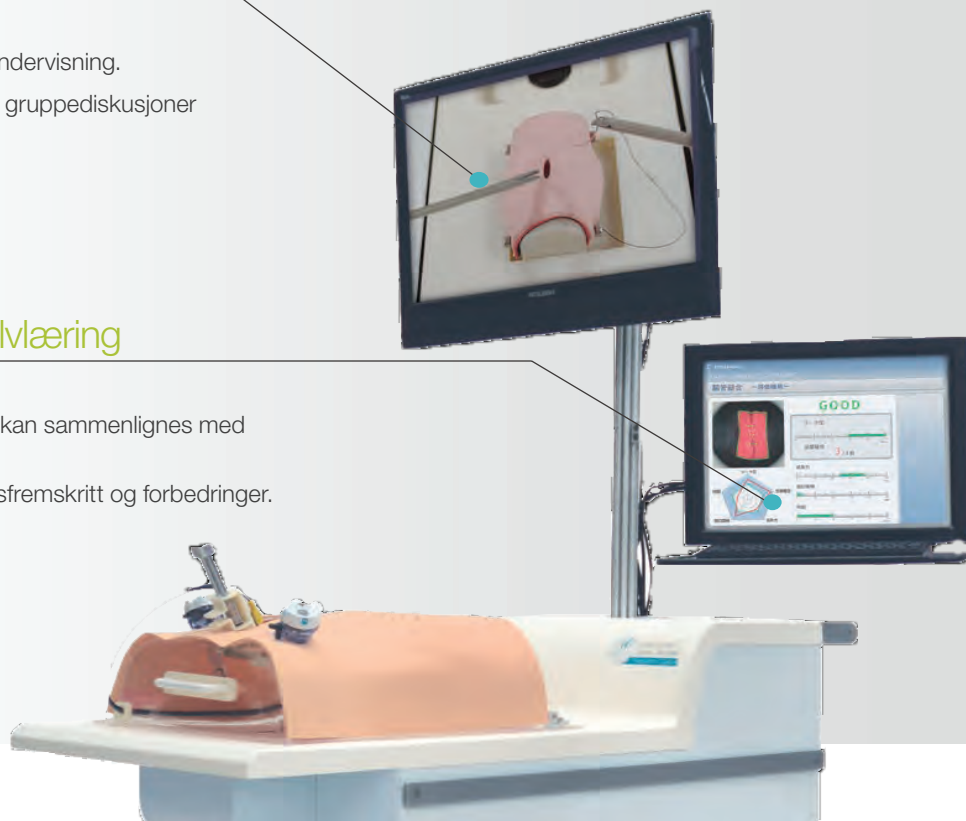


Naturtro intestinalområde

Intestinalområdet består av fire lag:

Serosa lag, muskellag, submukøse lag og mukøse lag.

Når du bruker tang for suturering, vil disse fire lagene bevege seg som realistisk og naturtro hud.

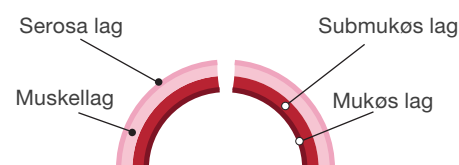

Evalueringselementer

Skjermbildet med resultat viser numeriske suturferdigheter i intestinalområdet etter fem kriterier.

Bekreftelse på vellykket sutur er basert på de første 2 kriteriene:

"lekkasjetrykk" og "fullstikts sutur".



- 1 Er det suturert uten lekkasje?
- 2 Er sutur fullført gjennom fra muskellaget til slimhinnelaget?
- 3 Er ligaturen hensiktsmessig for suturen?
- 4 Hvor stor er åpningen av det mukøse laget?
- 5 Hvor lang tid tar det å fullføre sutureringsprosedyren?

Sett Inkluderer

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| 1 skjerm | 1 videokamera for prosedyre-opptak | 1 sett med trokarer |
| 1 berøringsskjerm | 1 torso kropp | 1 beholder |
| 1 videokamera for evaluering (tarmkanalsutur) | 1 enhet base | 30 suturduk (tarmkanal) |
| 1 videokamera for evaluering (hud sutur) | 1 skriver | 30 suturduk (hud) |
| | 1 tastatur | 1 brukermanual |

Spesifikasjoner

Størrelse: B50 x L110 x H160 cm
 Vekt: 93 kg
 Strømkilde: AC100-240 V, 50/60 Hz
 Strømforbruk: 180 VA
 Materiale: Myk harpiks, latexfri

Suturering treningsmodell — fullt sett

M83


Se demofilm på YouTube



Ulike typer simulert hud for å trene på grunnleggende ferdigheter i suturering.

Egenskaper

- Du kan utforme et sår for trening. Den kunstige huden kan kuttes lett og hvor som helst for å lage et nytt sår.
- Den myke huden er laget av slitesterkt materiale.
- Enkle og slitesterke støtter holder den myke huden buet og opprettholder spenningen i de rørformede modellene.
- Alle instrumenter for praksistrening er inkludert i pakken.

Treningselementer

◆ Fire ferdigheter i suturering:

- abdominal hud sutur,
- blodkar sutur,
- intestinal sutur,
- lemmer hud sutur



Abdomen



Blodåre



Tarm



Lemmer

Settet inkluderer

- 1 sett med simulert hud, kanaler og støtter
- Abdominal sett: 2 mageskinn, 1 støtte
 - Blodkar sett: 5 smale rør
 - Tarm sett: 5 brede rør, 1 støtte
 - Lemmer sett: 2 tynn hud, 1 støtte

- 1 sett med instrumenter
- nålholdere,
 - suturnåler, saks,
 - suturtråder og pinsett
- 1 oppbevaringskoffert

Reservedeler

11219-030

1 abdominal hud

11219-050

5 blodkar

11219-070

5 intestinal tarmar

11219-010

5 lemmer hud

Spesifikasjoner


Materialer: myk harpiks, latexfri

Suturering evalueringssimulator

M57B

Evaluering av sutureringsferdigheter for raskere og bedre læring

Enkel avbrutt sutur i hud kan evalueres kvantitativt ved validerte evalueringselementer. Objektivt vurdert score og registrering av læringskurve oppmuntrer studentene til å forbedre sine ferdigheter.

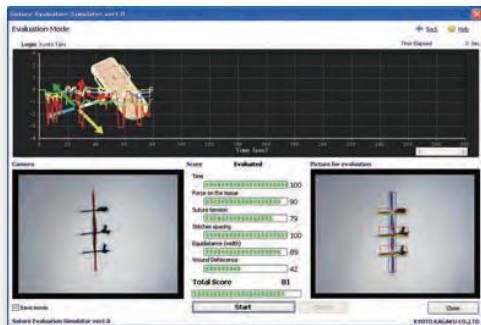

Egenskaper

- Det er tre moduser for ulike opplæringsformål
 - **Evaluering:** objektiv vurdering for selvstendig læring
 - **Læring:** referanse til eksempler og registrerte data
 - **Eksamen:** ferdighetsvurdering av en instruktør
- Evaluering analysert på 6 kriterier fører studentene til "ønskelig" ferdigheter i suturering.

Treningselementer

- ◆ **Sutur:** Enkel avbrutt sutur
- ◆ **Ligatur:** Instrumentknyting

Evalueringsskriterier

Sensorene måler kraft og spenning på huden.

- 1 Tid
- 2 Kraft på vev
- 3 Suturspenning



USB-kamera for bildeevaluering

- 4 Avstand sting
- 5 Ekvidistanse (bredde sting)
- 6 Sårdehiscens

Settet inkluderer

- 1 fundament
- 1 hud sutureringsenhet
- 40 enheter simulert hud
- 1 USB-enhet
- 1 programvare (CD)
- 1 demonstrasjonsfilm (CD)
- 1 oppbevaringskoffert
- 1 brukermanual
- * PC ikke er inkludert i standardsettet

Sett variasjoner

- M57B
- Sutur evalueringssimulator (PC Set)
- * Programvare installert

Reservedeler

- 11230-010
- 40 enheter simulert hud

Laparoskopisk suturering evalueringssimulator

M57C2

Kvantitativ vurdering av sutureringferdigheter ved hjelp av laparoskopisk tang.

For egenskaper, treningselementer og evalueringsskriterier se M57B.



Settet inkluderer

- 1 M57C2 sutureringsenhet
- 40 enheter simulert hud
- 1 USB-enhet
- 1 programvare (CD)
- 1 demonstrasjonsfilm (CD)
- 1 brukermanual


* Treningsboks og PC er ikke inkludert i standardsettet

Sett variasjoner

- M57C2
- laparoskopisk sutur evalueringssimulator (PC Set)
- * programvare installert

Reservedeler

- 11230-010
- 40 stk. simulerte hud

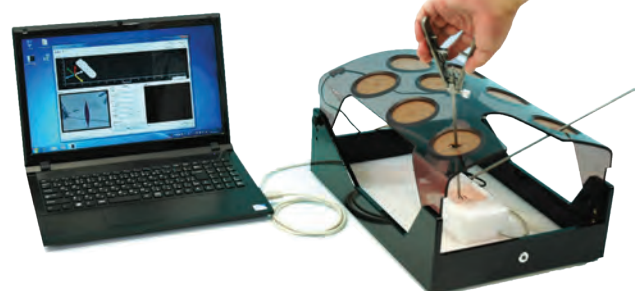

*Treningsboksen er ikke inkludert i standardsettet.

Vanskelig luftveishåndtering simulator – evalueringssystem –



MW11



Se demo film på YouTube



Vanskelig luftveishåndtering simulator evalueringssystem er verdens eneste system som tilbyr objektiv tilbakemelding på intuberingsferdigheter utført "hands-on" med en virkelighetstro luftveismanekeng og med virkelige instrumenter. Sanntids visualisering av ytelsen på hver evalueringspunkt bidrar til å vurdere kandidatenes ferdigheter, så vel som å identifisere de områder hvor kandidatene har behov for ytterligere forbedringer.

Egenskaper

- Vellykket intubasjon bekreftes basert på tiden det tar å fullføre samt dobbel lungeventilasjon.
- Evalueringspoeng blir kvantitativt overvåket og vist på skjermen
(i. Sniffeposisjon, ii. Trykk på fortenner, iii. Bladets posisjon, iv. Trykk på tungen, v. Løft på strupelokket, vi. Slangeposisjonering, vii. Mansjettrykk)
- Resultater og evalueringsdata kan lagres for hver trening og oppbevares i henhold til innloggingskonto for gjennomgang og tilbakemelding.
- En rekke scenarier for vanskelige luftveier kan stilles inn på kontrollpanelet.
- Alt-i-ett enhet er praktisk for trening.

Treningselementer

- ◆ **luftveishåndtering på ulike scenarier**
- ◆ **Å lære seg de viktige elementene ved luftveishåndtering**

Kombinasjoner av DAM simulator serien tilrettelegger for en effektiv ferdighetstrening

Foruten de dataene som blir evaluert av simulatoren, vil repeterende trening på kliniske ferdigheter med MW13 og MW14 forbedre kandidatens ferdigheter mer effektivt.



MW14

► P.8



MW13

► P.6

DAM Simulator
Evaluation system
KYOTO KAGAKU

Demonstrasjonsmodell

Treningsmodell


Product Collaboration

Atsuo Takanishi Laboratory of Faculty of Science and Engineering, Waseda University




Intubasjonsresultat display

Vellykket intubasjon evalueres etter nødvendig tid og dual lungeventilasjon.

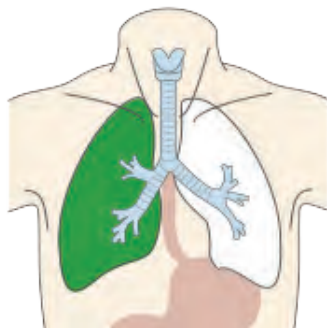

Tekniske evalueringselementer

Objektiv ferdighetsevaluering blir gjennomført med 23 innebygde sensorer kalibrert etter ferdighetsnivået til en profesjonell.

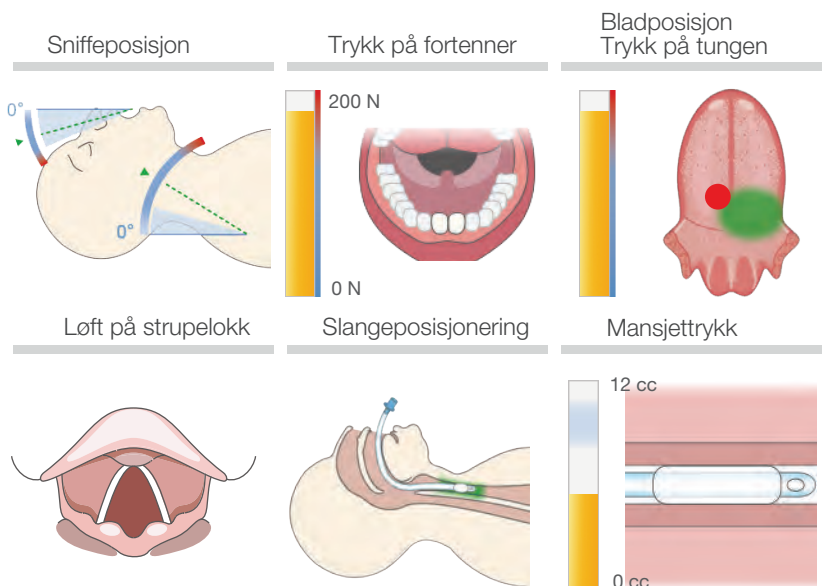

Normal og 3 vanskelighetsgrader

Normal	Intubasjon vanskelighetsgrad		
Normal ★	Låst kjeve ★★	Stiv nakke ★★★	Mikrognati ★★★★★

Ulike vanskelighetsgrader for intuberingsprosedyren kan settes på kontrollpanelet. Nivåene er definert som "Normal" med 3 ekstra nivåer.

Et utvalg av læringsmoduser for ulike formål

Vanskelig luftveishåndtering simulator evalueringssystem gir to læringsmoduser.

1 Selvlæringsmodus (Personlig konto modus)

Brukeren kan opprette en personlig konto når ferdighet-treningen starter. Resultatene lagres som brukerens egne data.

2 Gjestelæringsmodus (Gjestekonto modus)

Hvis dataene ikke trenger å lagres, kan brukeren begynne å trene som gjestebruker uten å opprette en personlig konto.



LOGG INN

Brukeren logger seg på personlig konto eller gjestekonto.

VELG ET CASE

Brukeren velger et case og apparatur.

START TRENING

Starter trening i intubasjon og henviser til brukerens resultater.

EVALUERING

Bruker spiller av den innspilte treningen, gjennomgår ferdighets-evaluering og forbedringer.

LAGRE OG SKRIV UT

Data kan lagres og evalueringsresultatet kan eksporteres.



Settet inkluderer

- 1 enhet basen
(inkludert 1 video kamera, 1 skjerm, 1 mannekeng)
- 1 skriver
- 1 stereo miniplugg
- 1 tastatur
- 1 smøremiddel for mannekeng

Spesifikasjoner

- Størrelse: B50 x D110 x H160 cm
- Vekt: 82 kg
- Strømkilde: AC100-240V, 50/60 Hz
- Strømforbruk: 120 VA
- Materialer: myk harpiks, latexfri

Opptak av brukerens data støtter ferdighetsforbedring og treningsplan

Ferdighetsevalueringen kan lages. Dette hjelper brukeren i gjennomgang av sine ferdigheter og grad av forbedring.

5 siste treningsøkter kan gjennomgå for å analysere kandidatens forbedringer.

Ferdighetstrening blir klassifisert etter vanskelighetsgrad. Suksessprosent blir beregnet ut fra brukerens 5 siste treningsøkter. Innspilte treningsøkter og ferdighetshistorie kan velges ved å klikke på fanene på skjermen for å spilles av og gjennomgå.



Data kan lagres for senere gjennomgang

Alle brukerens registrerte data kan gjennomgå ved å trykke på dataknappen øverst til høyre på skjermen.

	Date	Result	Difficulty	Tool	Time	Sniffing Position	Force on Inlet	Force of Tongue	Lift Epiglottis	Tube Positioning	Cuff Pressure
☒	2013/11/13 00:00	●	Lock Jaw	Laryngoscope	00:29:56	16" (★★★)	32" (★★★)	100N (★★★)	★★★	★★★	★★★
☐											
☐											
☐											
☐											

Unit-type modell forenkler forberedelser, trening og lagring

- Tynn og kompakt design. Kontrollenhet og kabler er inkludert i enheten.
- Nødvendige apparater og forbruksvarer for ferdighetstrening kan lagres inne i enheten.
- Enheten er mobil når støpselet er frakoplet.
- Klar til bruk og enkel å lagre.

Innspilling, kjøring og gjennomgang

Treningsøkter kan tas opp med det utstyrte videokameraet og for midlertidig lagring av evalueringsverdiene. Når et video laryngoskop brukes, kan videofilmen fra enheten også registreres.

Reservedeler

11392-040	1 bryst hud
11392-050	5 pairs of lungs
11392-060	5 mager
11392-090	1 ansiktsmaske
11390-010	sensor-installerte tunger
11390-020	sensor (blade force and position)

Anbefalte enheter

Macintosh laryngoskop: bladstørrelse 4
 Trakealtube: indre diameter 7,5 mm
 Video laryngoskop: AWS-S100L



Vanskelig luftveishåndtering simulator

– treningsmodell –

MW13



Vanskelig luftveishåndtering simulator tilbyr enestående erfaring i DAM*-trening med stor variasjon i innstilling av treningselementer. Nøyaktig anatomi og realistisk følelse av luftveiene vil møte kravene på alle nivåer av trening.

* DAM: Difficult Airway Management

Egenskaper

- 24 varianter pasientscenario (inkludert ett normaltilfelle):
3 stadier munnåpning, 2 stadier nakkefleksibilitet, 2 tungestørrelser og 2 posisjoner stemmebånd.
- Fortennene er avtagbart ved bruk av stor kraft.

Treningselementer

- ◆ Luftveis åpningsteknikker
- ◆ Maske-bag ventilering
- ◆ Preintubasjon luftveisvurdering
- ◆ ” Sniffestilling”
- ◆ Trykksetting av ekstern larynx for å forbedre laryngeal visning
- ◆ Intraoral/intranasal intubering
- ◆ Bruk av orofaryngeal luftvei (OPA)
- ◆ Bruk av nasofaryngealt luftvei (NPA)
- ◆ Bruk av larynksmaske luftvei
- ◆ Bruk av laryngeal videoskop
- ◆ Bekreftelse av vellykket ventilasjon av: 1) observasjon av thorax og abdominal bevegelse (lungeekspansjon, mageinflasjon) eller 2) auskultasjon av brystet
- ◆ Varsling av feil prosedyre inkludert spiserørintubasjon og ensidig intubasjon
- ◆ Sikre tube plassering med tape eller Thomas TM Trachealtube holderSet

Settet inkluderer

- 1 Mannekeng
- 3 Fortenner
- 1 Gel/smøremiddel
- 1 Sprøyte
- 1 Oppbevaringsveske
- 1 Brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: B70 x D39 x H25 cm
Vekt: 6,6 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

Reservedeler

- | | |
|-----------|------------------|
| 11392-010 | 10 fortenner |
| 11392-090 | 1 ansiktsmaske |
| 11392-040 | 1 brystdeksel |
| 11392-080 | 2 reserve tunger |
| 11392-050 | 5 par lunger |
| 11392-060 | 5 mager |

Variasjoner av DAM Innstillinger



Nakke fleksibilitet
(Naturtro kjevebevegelse)
- Normal
- Rigid



Munn åpning
- Normal
- Intermedial
- Vanskelig



Tunge
- Normal
- Oppsvulmet



Laryngospasmer
- Normal
- Laryngospasmer

Variasjoner av DAM Trening



**Luftvei
åpningsteknikker**
Naturtro artikulasjon muliggjør
trening på hodehelning/hakeløft
samt teknikker for kjevestilling.



**Intraoral intubasjon med
Laryngoskop**
Så snart hodet er satt i
«sniffestilling», kan intubasjon
med laryngoskop utføres.



**Bekreftelse på trakealtube
plassering**
Plassering av tuben kan be-
kreftes ved auskultasjon eller
bevegelse av thoracoabdominal
området.



**En rekke ferdigheter
på luftveishåndtering**
Intubasjon med et laryngoskop,
BVM ventilasjon, nasal intuba-
sjon, laryngeal maske ventila-
sjon, samt bruk av en video
laryngoskop

Opplæring i akutte, prehospital og kliniske situasjoner

Produsert med en robust konstruksjon som gir en stabil base for
opplæring i ulike situasjoner, inkludert prehospitalt scenarier.

Valgfritt utstyr

11384-100 Bronkofiberskopi
treningsmodell
(tilgjengelig)



Anbefalt utstyr

Macintosh laryngoscope,
bladstørrelse: 3, 4
Trakealtube,
indre diameter: 7,0 mm, 7,5 mm


Laryngealmaske
Luft-Q, størrelse: 3,5
LMA Supreme, størrelse: 4
I-gel, størrelse: 4

Vanskelig luftveishåndtering simulator – demonstrasjonsmodell

MW14



Se demofilm på YouTube

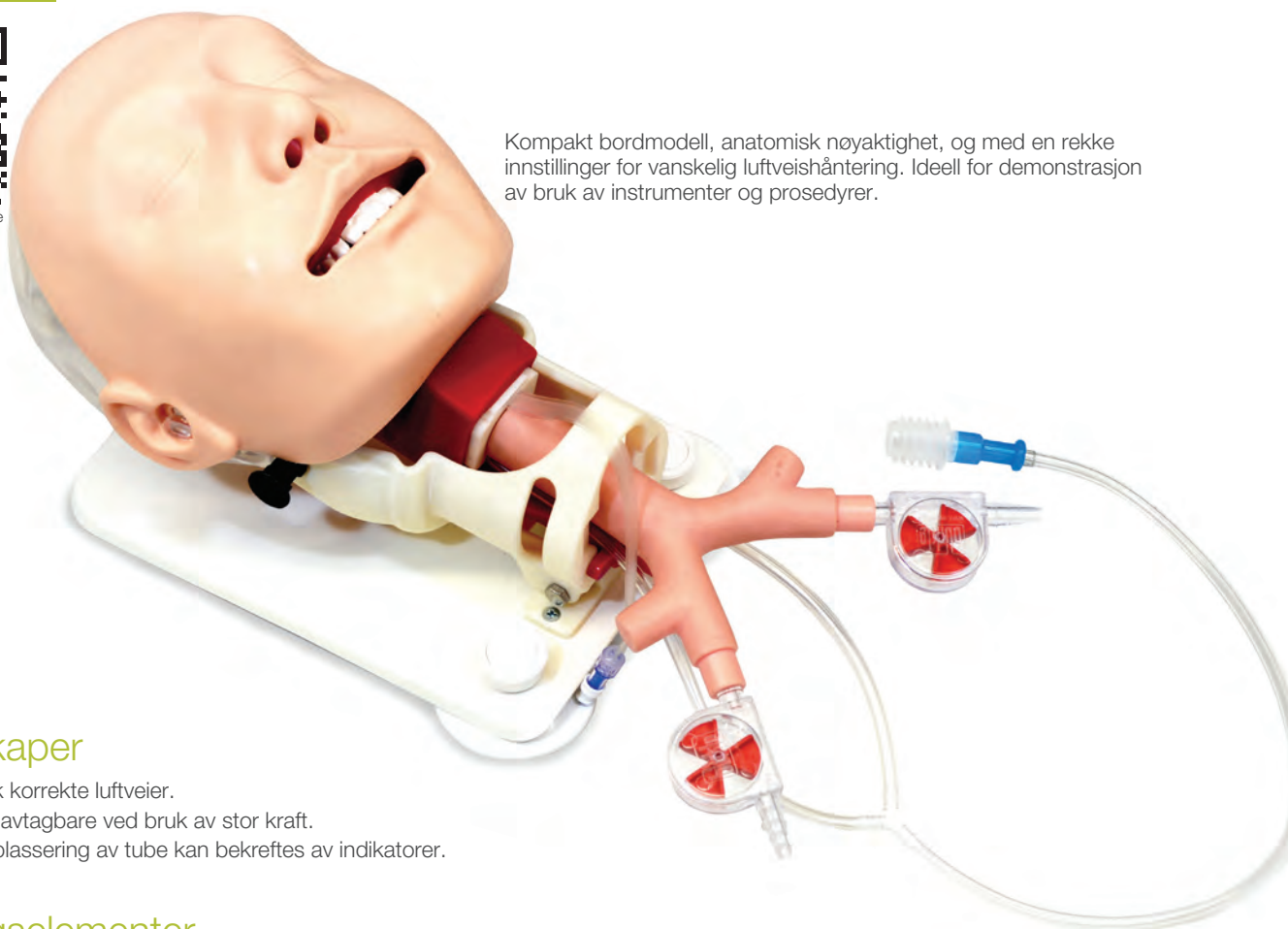

Kompakt bordmodell, anatomisk nøyaktighet, og med en rekke innstillinger for vanskelig luftveishåndtering. Ideell for demonstrasjon av bruk av instrumenter og prosedyrer.

Egenskaper

- Anatomisk korrekte luftveier.
- Fortenner avtagbare ved bruk av stor kraft.
- Vellykket plassering av tube kan bekreftes av indikatorer.

Treningselementer

- ◆ Teknikker for åpning av luftveier (hode- og kjevestilling)
- ◆ Ventilering ved bruk av maske-bag
- ◆ Preintubasjon luftveisvurdering
- ◆ «Sniffestilling»
- ◆ Trykksetting av ekstern larynx for å forbedre laryngeal visning
- ◆ Intraoral/intranasal intubasjon
- ◆ Bruk av orofaryngeale luftvei (OPA)
- ◆ Bruk av nasofaryngeale luftvei (NPA)
- ◆ Bruk av larynksmaske
- ◆ Bruk av laryngealt videoskop
- ◆ Bekreftelse av vellykket ventilering ved indikatorer
- ◆ Varsling av feil prosedyre inkludert spiserørintubasjon og unilateral intubasjon
- ◆ Sikring av tube plassering med tape eller Thomas™ endotrakeal tubeholder

Settet inkluderer

- 1 Mannequin
- 3 Fortenner
- 1 Gel/smøremiddel
- 1 Sprøyte
- 1 Oppbevaringsveske
- 1 Brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: B45 x D20 x H25 cm
Vekt: 2,65 kg
Materialer: myk harpiks, latexfri

Reservedeler


11393-010 1 Ansiktsmaske
11392-080 2 Reservetunger
11392-010 10 Fortenner

Anbefalt utstyr

- Macintosh laryngoskop
bladstørrelse: 3, 4
- Slange for luftveier
indre diameter: 7,0 mm, 7,5 mm
- Laryngealmaske
Luft-Q, størrelse: 3,5
LMA Supreme, størrelse: 4
I-gel, størrelse: 4

Valgfritt utstyr

11384-100 Bronkofiberskopi treningsmodell
(tilgjengelig)

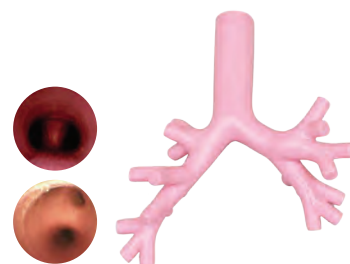

Vanskelig luftveishåndtering simulator – for bronkofiberskopi

MW19




Vanskelig luftveihåndtering simulator for bronkofiberskopi forenkler treninger i innsetting og håndtering av et bronkofiberskop. Anatomisk korrekt luftrør og bronkier gir et realistisk bilde gjennom bronkofiberskopet, og muliggjør gjenkjenning av bifurkasjoner.

Egenskaper


Anatomisk korrekt luftrør og bronkier som inkluderer trakeal bifurkasjon for segmentale bronkier.

Treningselementer

- ◆ Innføring og håndtering av et fiberskop
- ◆ Gjenkjenning av bifurkasjoner med et fiberskop
- ◆ Luftvei åpningsteknikker (hodehelling, kjevestilling)
- ◆ «Sniffestilling»

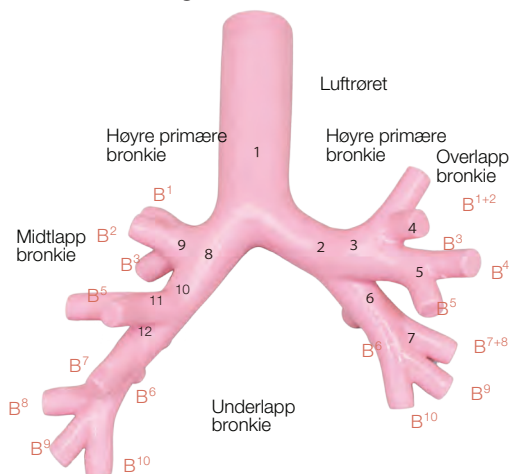


1 trakeal bifurkasjon

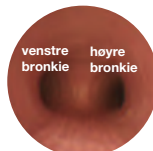

2 bifurkasjon for venstre lapp bronkie




3 bifurkasjon for venstre overlapp

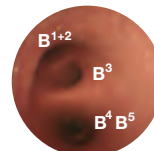


4 bifurkasjon av segmental bronkie i venstre overlapp




5 bifurkasjon av segmental bronkie i lingula

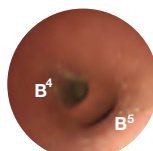


6 bifurkasjon for venstre underlapp

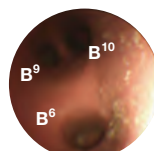

7 bifurkasjon av segmental bronkie i venstre underlapp

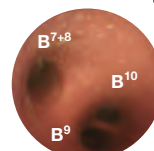

8 bifurkasjon mellom høyre overlapp bronkie og midtlapp bronkie

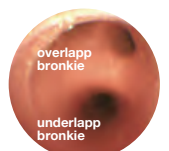

9 bifurkasjon for høyre overlapp



10 bifurkasjon mellom høyre midtlapp bronkie og underlapp bronkie



11 bifurkasjon av segmental bronkie i høyre midtlapp



12 bifurkasjon av segmental bronkie i høyre underlapp



Settet inkluderer

- 1 manekeng
- 3 fortenner
- 1 gel/smøremiddel
- 1 sprøyte
- 1 oppbevaringsveske
- 1 brukermanual

Spesifikasjoner

Størrelse: B45 x D20 x H25 cm
Vekt: 2,65 kg
Materialer: my harpiks, latexfri

Reservedeler

- 11393-020 1 ansiktsmaske
- 11392-080 2 reservetunger
- 11392-010 10 fortenner
- 11229-050 glidemiddel

Trakeostomisimulator – treningsmodell

MW60

Simulator for perkutan trakeostomi, punksjon og innsnitt i cricothyroid vev



Se demofilm på YouTube







Egenskaper

- Anatomisk korrekt cricoid brusk og skjoldbrusk med naturtro berøringssanser.
- Flergangs bruk er mulig ved rotasjon av den simulerte huden som dekker halsen.
- Klebende skiver/sugekopper holder simulatoren på plass under prosedyren.

Treningselementer

- ◆ Trakeostomi
- ◆ Perkutan trakeostomi
- ◆ Punksjon og innsnitt i cricothyroid vev

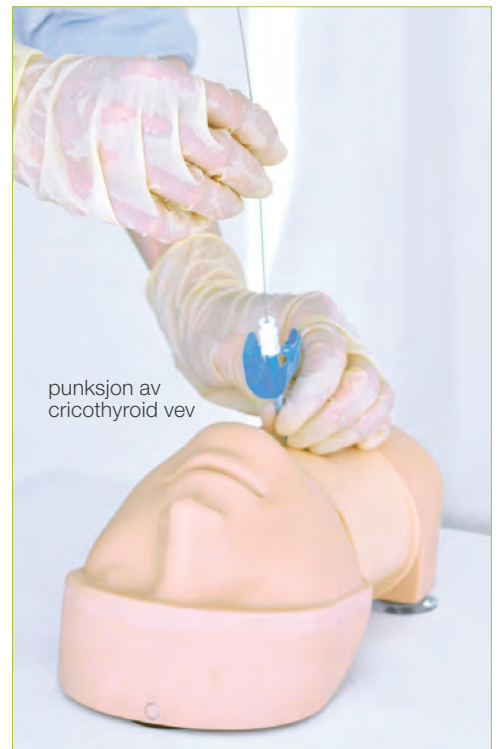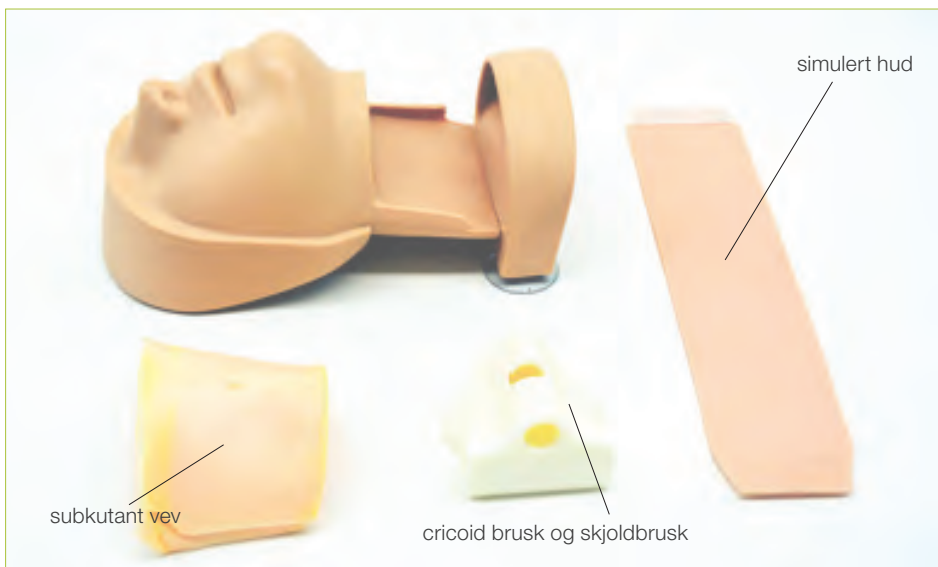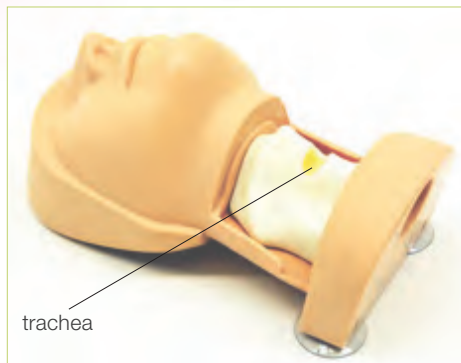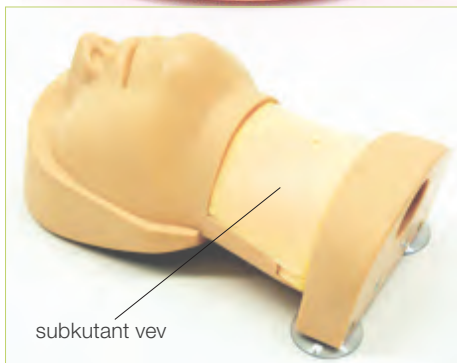

Spesifikasjoner

Størrelse: B13,5 × D24 × H12,5 cm
Vekt: 1,7 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri

Settet inneholder

1 simulator hode og hals
1 hud for trakeostomi
1 subkutant vev for trakeostomi
1 cricoid brusk og skjoldbrusk
1 brukermanual

Reservedeler

11442-010 hud for trakeostomi (sett med 3)
11442-020 subkutant vev for trakeostomi (sett med 3)

FAST/AKUTT abdomen fantom "FAST/ER FAN"

Product Supervision

Junji Machi, MD, PhD

University of Hawaii at Manoa and Kuakini Medical Center

US-5



Se demofilm på YouTube




FAST / ER FAN gir simulert trening i FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma); en ultralydundersøkelse rettet mot påvisning av nærvær av fri væske i traumatiske pasienter.

Egenskaper


- Et innovativt fantom for repeterende trening på FAST som et supplement til ATLS primær undersøkelse.
- Patologier inkluderer kolecystitt, en aortaaneurisme og en lesjon på tykktarmen.

Treningselementer


- ◆ Intern blødning ved perihepatic, perisplenic, bekken og pericardium område.
- ◆ Sonografi for akutte pasienter. Synlige numeriske verdier

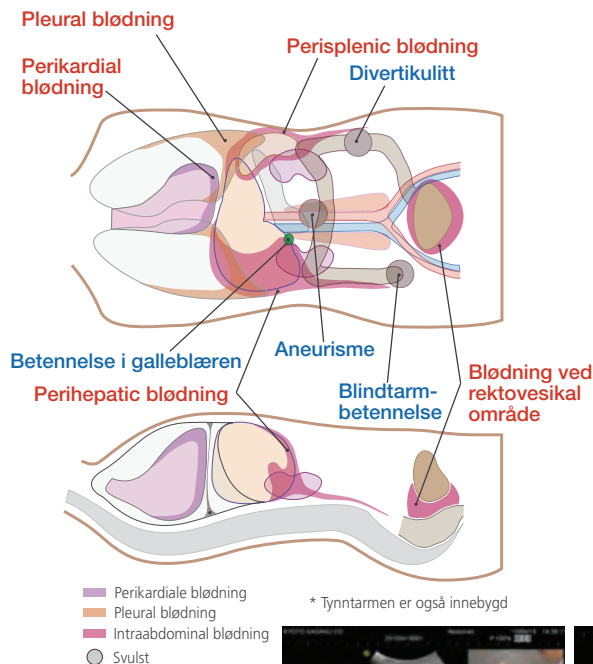

Fast

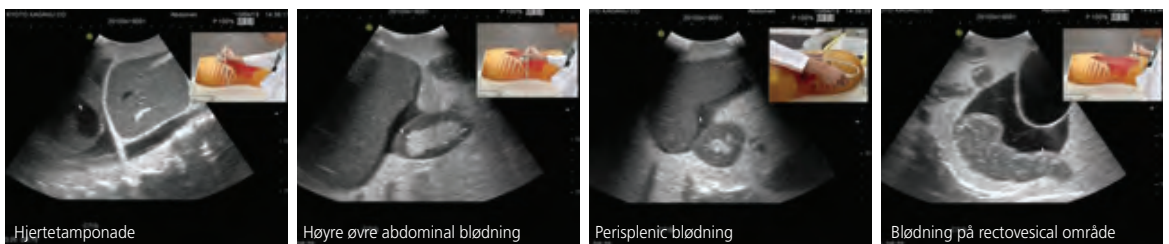

Akutt abdomen

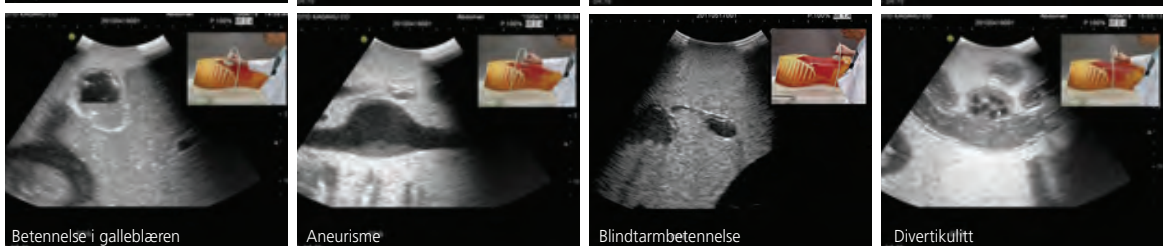

Spesifikasjoner

Størrelse: B62 x D30 x H24 cm
Vekt: 30 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri


Settet inneholder

1 ultralyd fantom med bæresokkel
1 oppbevaringsboks
1 treningsmanual (DVD)


* Ultralydsonde følger ikke med

Fantom intravesikal urinvolum

US-16

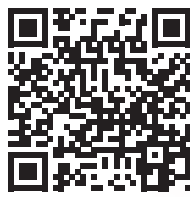

Se demofilm på YouTube

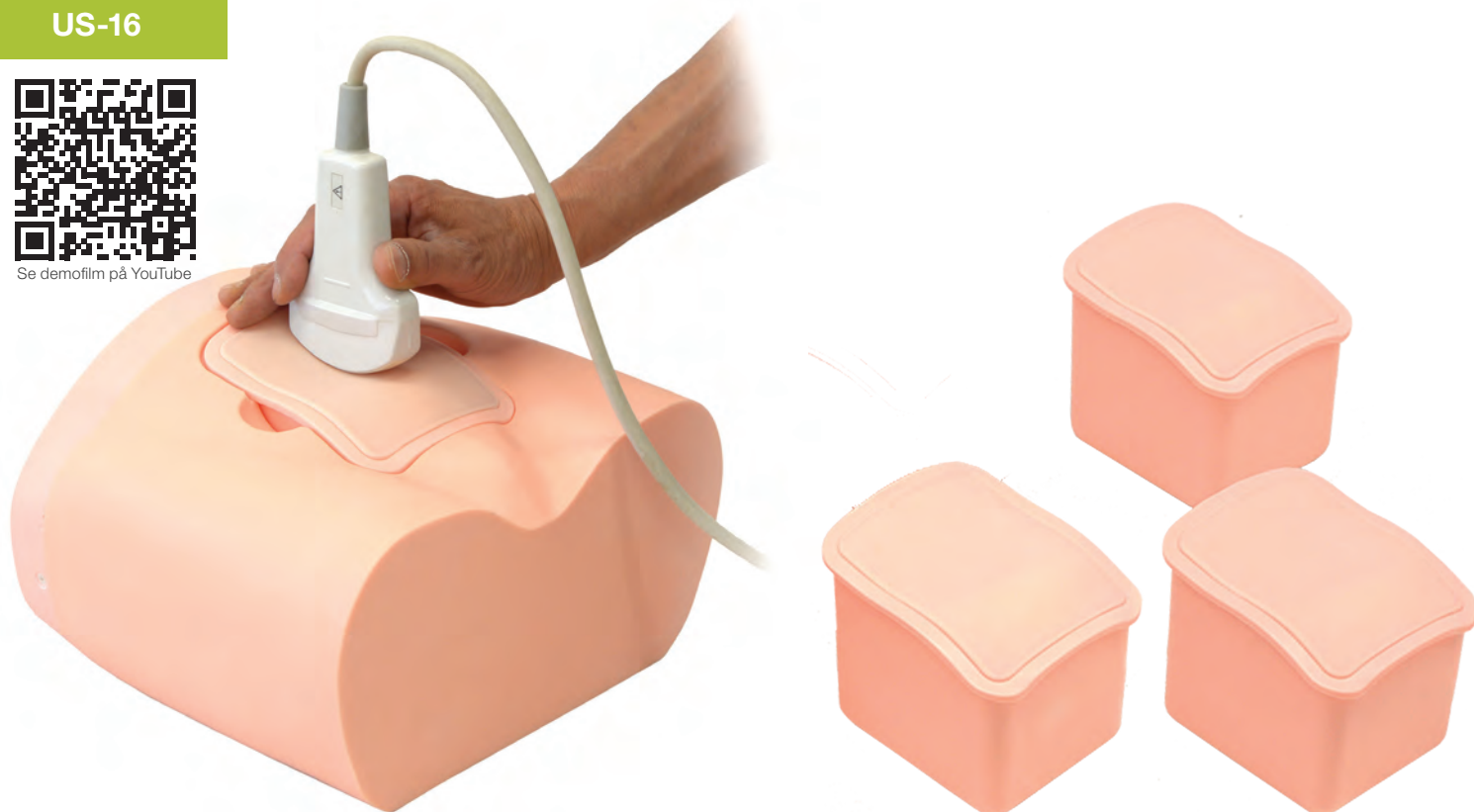

Lommestørrelse ultralyd blir stadig mer populært og begynner å bli brukt mer i daglig omsorg for undersøkelse. Denne metoden er foretrukket da kateterisering kan forårsake urinveisinfeksjon.

Egenskaper

- 4 varianter av utskiftbare innsatser har ulike pasientscenarier.

Treningselementer

- ◆ Trening på håndtering og manipulering av transdu-sere på ultralyd i urinblære
- ◆ Skanning av urinblære for å måle i urinvolum samt urinblæreundersøkelse



Urinvolum 50mL



Urinvolum 150mL



Urinvolum 300mL



Urinretensjon + ballongkateter

Spesifikasjoner

Størrelse:

Bekkenfantom: ca. B30 x D26 x H18 cm

Urinblærefantomer: ca. B14 x D12 x H13 cm

Vekt:

Bekkenfantom: ca. 3,2 kg

Urinblærefantomer: ca. 1,5 kg

Materialer:

Uretan elastomer, acryl, nylon, latexfri

Settet inneholder

- 1 nedre torso mannekeng
- 4 ultralyd blokker
- 1 oppbevaringsveske
- 1 brukermanual



* Ultralydsonde følger ikke med

Revmatoid håndfantom

US-17



Ultralydundersøkelse er en viktig ferdighet for tidlig diagnostisering av revmatoid artritt.

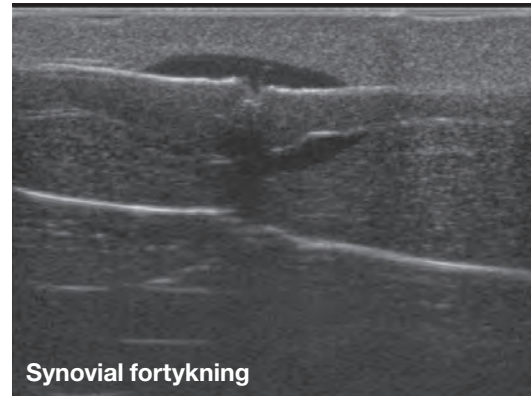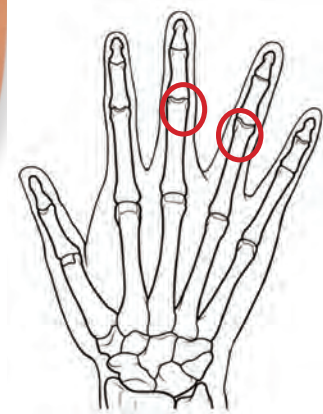

Egenskaper

- For ferdighetsopplæring i ultralydsundersøkelse på revmatoid artritt
- Synovial fortykning og økt synovialvæske simuleres på midt- og ringfinger.

Treningselementer

- ◆ Ultralydundersøkelse på revmatoid artritt

Spesifikasjoner

Størrelse: 17 x 5 x 21 cm
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri


Settet inneholder

- 1 håndmannekeng
- 1 brukermanual
- 1 oppbevaringsboks

* Ultralydsonde følger ikke med

Fundamental ultralydfantom

US-18

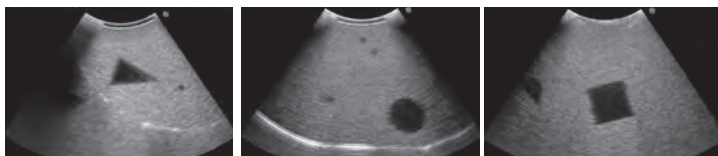

Dette ovale fantom som hjelper sonografer med grunnleggende trening

Egenskaper

- Tolke 2D tverrsnittsbilder i form av 3-dimensjonale gjenstander
- 10 objekter er innebygd
- Justere Time-Gain Compensation for å oppnå egnet tetthet
- Måle dimensjoner og avstand
- Transduserhåndtering for å oppnå nøyaktig 2D tverrsnitt bilde
- Flate og sfæriske overflater gir en rekke vanskeligheter

Treningselementer

- ◆ Fantom for grunnleggende manipulering av ultralydstransduser
- ◆ Gjenkjennelse av form, ekkogenitet, avstand og praktisk trening på horisontale transduser skanning, alt dette kan du lære med dette ovale fantomet

Spesifikasjoner

Størrelse: B24 x D16 x H11 cm
Vekt: 2,3 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri

Settet inneholder

- 1 Ovalt ultralydfantom

* Ultralydsonde følger ikke med


Ultralyd kvalitetssikringsfantom

– Universalt fantom N-365


US-2




Nyttig både for daglig evaluering og videre forskning. Gråskala for kontrast evaluering, cystemål med ikke-resonans sylindere, strengmål for geometrisk evaluering inkludert nærme (dødsone) oppløsning, aksial og lateral oppløsning er forberedt for skanning. Fantomet er utformet for skanning fra alle fire sidevegger.

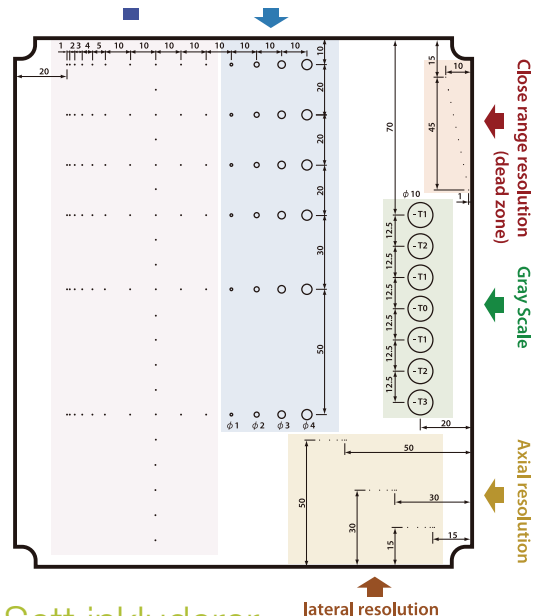

Gråskala

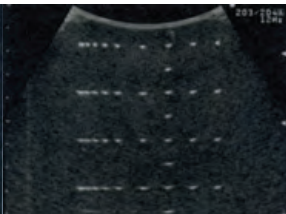

Strengmål

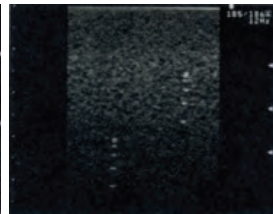

Aksial oppløsning

Sett inkluderer

- 1 fantom
- 1 oppbevaringskoffert

Spesifikasjoner


Størrelse: 19 x 22 x 7 cm

Vekt: 3,6 kg

Materialer: Uretan elastomer, akryl, nylon, latexfri

US-4


Massemål blokk (kontrast oppløsning)

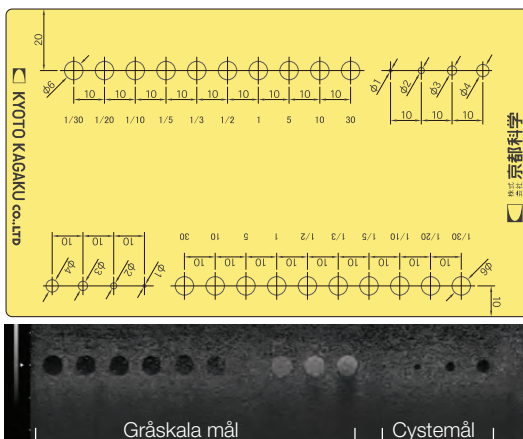

Gråskala mål

Cystemål

Punktmål blokk (romlig oppløsning)

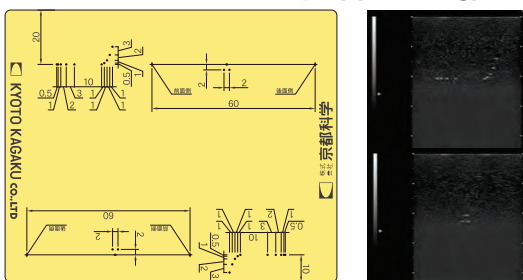

Bryst ultralyd QA Fantom



Ultralyd QA fantom for høypresisjons avbildning i høyfrekvent sonografi rundt 10 MHz som kreves i brystundersøkelser.

For månedlige grunnkvalitetssjekker av ultralydbilder, samt langsiktig kvalitetssikring for å opprettholde konsistens ytelse i skannere og transdukere.

Sett inkluderer

- 1 massemål blokk
- 1 punktmål blokk
- 1 termometer
- 1 oppbevaringskoffert

Spesifikasjoner

Størrelse massemål: B18 x D7,5 x H11 cm

Størrelse punktmål blokk: 13,5 x 7,5 x 11 cm

Vekt massemål: 1,3 kg

Vekt punktmål: 1,0 kg

Materialer: Uretan elastomer, akryl, nylon, latexfri

Skrotal ultralydfantom

US-11

Product Supervision

Charlotte Henningsen, MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM
Chair & Professor - Sonography Department
Adventist University of Health Sciences, Florida, USA



Skrotal ultralydfantom gir kandidatene naturtro trening med høykvalitets ultralydbilder. Utskiftbare normale og cancerøse fantomer gir ikke bare en anatomisk forståelse men også patologiske bilder.

Egenskaper

- Utmerket ultralyd bildekvalitet.
- Normal og patologiske enheter med ulike tilfeller.
- Skrotum kan lett løsnes fra modell for utskifting og rengjøring.

Treningselementer

- ◆ **Scrotal ultralyd screening**
- ◆ **Visualisering av testikkelkreft**

Anatomi og patologi

- Skrotum, testikkel, bitestikkel og penis
- Testikkelkreft

Spesifikasjoner

Størrelse: B34 x D33 x H24 cm
Vekt: 3,6 kg

Sett inkluderer




- 1 nedre torso mannekeng
- 1 normal skrotum
- 1 patologisk skrotum
- 1 oppbevaringskoffert
- 1 brukermanual
- * Ultralyd skanner er ikke inkludert

Reservedeler

- 41911-010
1 normal skrotum
- 41911-020
1 patologisk skrotum



Normalt fantom

- skrotum, testikler, bitestiklene (epididymis) og penis

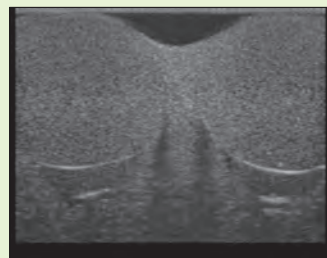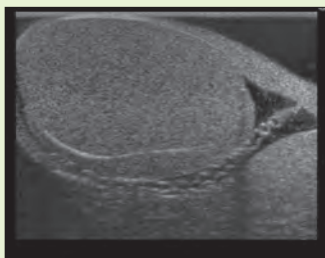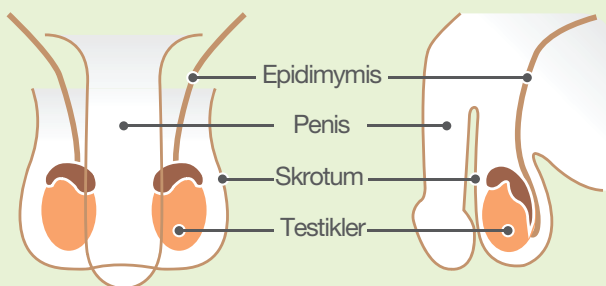

Patologisk fantom

- skrotum, testikler, bitestiklene og penis
- testikulær kreft (i hver testikkel, Ø 10 mm)

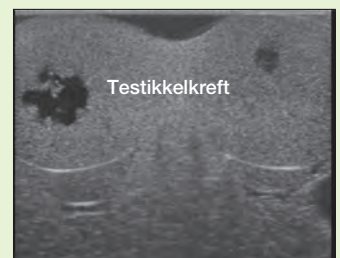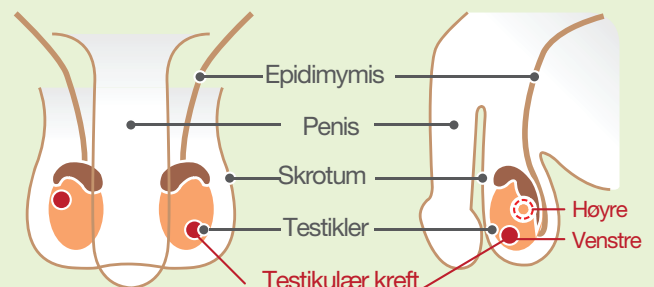


Abdominal intraoperativ og laparoskopisk Ultralydfantom "IOUSFAN"

US-3



Product Supervision

Junji Machi, MD, PhD
University of Hawaii at Manoa and Kuakini
Medical Center

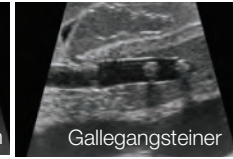

Egenskaper

- Myke fantommateriale gir realistisk sondemanipulasjon.
- Ulike simulerte lesjoner inkludert gallesteiner og cyster, solide svulster (hypoekkogen, hyperekkogen) i lever, bukspyttkjertel, milt og nyrer.
- Avtagbar mage og tolvfingertarm muliggjør ulike skannemetoder av gallegang og bukspyttkjertel.



Intraoperativ ultralyd



Laparoskopisk ultralyd

Innovativ fantom simulere abdominal åpen intraoperativ og laparoskopisk ultralydundersøkelse.


Treningselementer

- ◆ Abdominal intraoperativ ultralyd
- ◆ Laparoskopisk ultralydundersøkelse

Anatomi

- Leveren (segmental anatomi, portåre og venøse systemer i lever, ligamentum teres og ligamentum venosum)
- Gallegeiene (galleblæren, galleganger, intrahepatisk og ekstrahepatisk galleganger)
- Bukspyttkjertelen (pankreasgang)
- Milt / nyrer
- Detaljert vaskulære strukturer (aorta, vena cava, cøliaki arterie og dets grener, portvenen og dets grener, mesenteriske arterier, nyrearterier, etc)
- Faste tumorer i lever, bukspyttkjertel, milt og nyrer (hypoekkogen, hyperekkogen)

Patologi

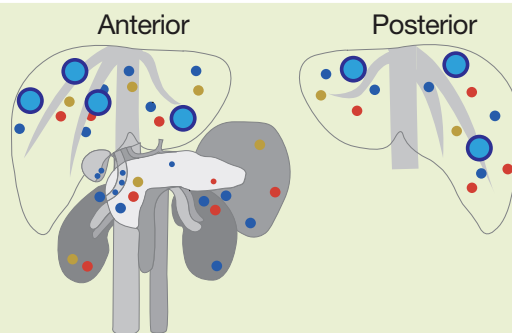

- Simulerte cyster (1 cm)
- Hypoekkogen (1 cm)
- Simulerte svulster (1 cm)
- Simulerte svulster med dobbel kant (2 cm)

Sett inkluderer

- 1 øvre abdomen ultralydfantom
- 1 mage ultralydfantom
- 1 fantomcontainer
- 1 brukermanual (DVD)

Spesifikasjoner

- Størrelse: B30 x D38 x H17.5 cm
- Vekt: 5,8 kg
- Materialer: Polyuretan elastomer, Latexfri

Ultralydundersøkelse treningsfantom "ABDFAN"

US-1B




Se demofilm på YouTube



Product Supervision

Junji Machi, MD, PhD
University of Hawaii at Manoa and Kuakini
Medical Center

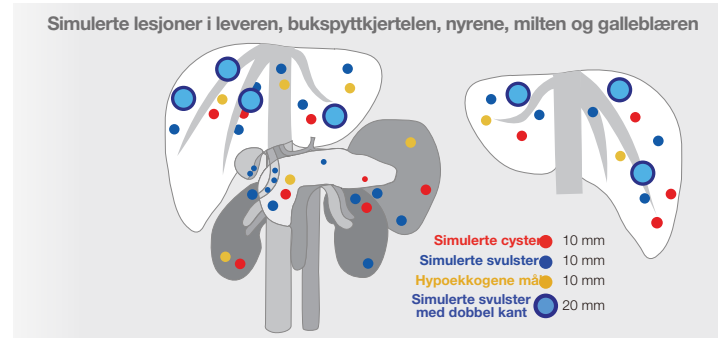

Unik high-fidelity ultralydfantom muliggjør effektiv trening i abdominal ultralyd skanning med klinikkens egne kliniske instrumenter. Simulerte lesjoner innebygd som mål gir et bredt spekter av opplæringsmuligheter.

Egenskaper

- Organer, strukturer og abnormale lesjoner i naturlig størrelse.
- Detaljert hepatogalle, bukspyttkjertel og annen abdominal anatomi som møter kravene for profesjonell opplæring. Åtte Couinauds leversegmenter kan lokaliseres.
- Ulike simulerte lesjoner inkludert gallesteiner og cyste, solide tumorer (hypoekkogen, hyperekkogen og mål-utseende) i lever, bukspyttkjertel, milt og nyrer.

Treningselementer Sett variasjoner

- ◆ **Abdominal sonografi**
- ◆ **Grunnleggende om sondemanipulasjon**

US-1B 41900-030 "ABDFAN"
1 ultralydfantom "ABDFAN"
1 sett posisjoneringsputer
1 treningsmanual (DVD)
1 oppbevaringskoffert

US-1B 41900-100 "ABDFAN" Komplet sett
1 ultralydfantom "ABDFAN"
1 anatomisk modell "ECHO-ZOU"
1 sett posisjoneringsputer
1 treningsmanual (DVD)
1 oppbevaringskoffert

Spesifikasjoner


Størrelse: B25 x D18 x H28 cm
Vekt: 12 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri

Ultralydundersøkelse treningsfantom "ECHOZY"

US-1

Product Supervision

Dr. Hitoshi Asai, Director
Osaka Kyoiku University,
Health Administration Center
Dr. Shigeru Nakamura
Nagoyashi General Hospital,
Clinical Examination Department

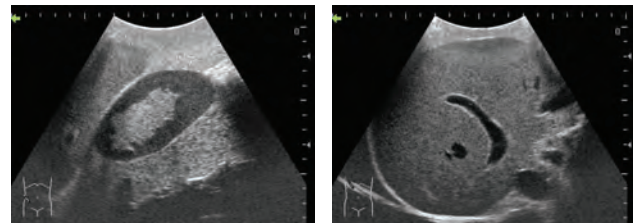

Ultralyd treningsfantom uten patologi.

Egenskaper

- Øvre abdominale organer med realistiske ekkogenisitet.
- State-of-art anatomi oppfyller medisinske sonografers høye krav.
- Unike fantom materialer med lang levetid.

Treningselementer Sett variasjoner

- ◆ **Abdominal sonografi**
- ◆ **Grunnleggende om sonde-manipulasjon**

US-1 41900-010 "ECHOZY"
1 ultralydfantom "ECHOZY"
1 sett posisjoneringsputer
1 oppbevaringskoffert

US-1 41900-000 "ECHOZY" Komplet sett
1 ultralydfantom "ECHOZY"
1 anatomisk modell "ECHO-ZOU"
1 sett posisjoneringsputer
1 oppbevaringskoffert

Spesifikasjoner

Størrelse: B25 x D18 x H28 cm
Vekt: 12 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri


Dual modalitet abdomen fantom (CT, ultralyd)

US-22

Dette multi-modalitetsfantomet er et egnet for å utføre studier og opplæring av fusjonsavbildning for et bredt spekter av kliniske bruksområder (CT og ultralyd).



Innebygde mål (lever)

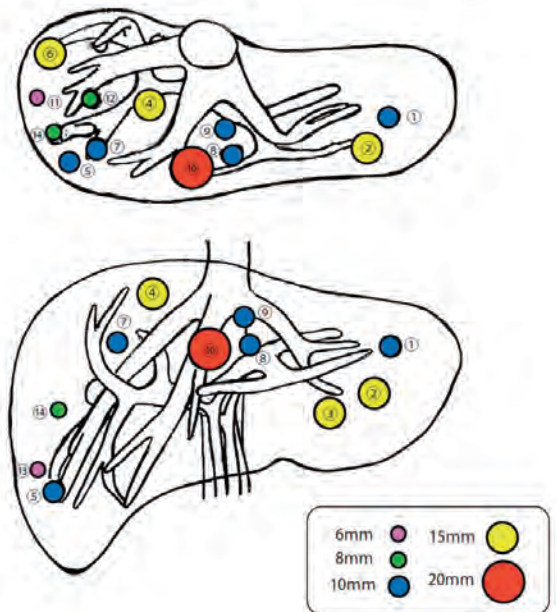


Egenskaper / Treningselementer

- ◆ Trening for generering av fusjonsbilder
- ◆ Kartlegging for biopsi (invasive prosedyrer er ikke mulig med dette fantomet)
- ◆ Kirurgisk planlegging
- ◆ Planlegging av strålebehandling
- ◆ Opplæring i skanneferdigheter i Ultralyd og CT



Ultralydbilde (lever)

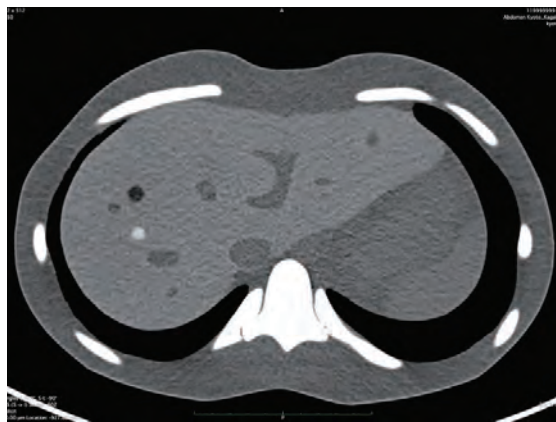

CT-bilde (lever)

Spesifikasjoner



Størrelse: W29 x D19 x H31 cm/
Vekt: 12 kg




Se demofilm på YouTube

Lunge ultralyd treningsfantom ECHOLUNG


US-19

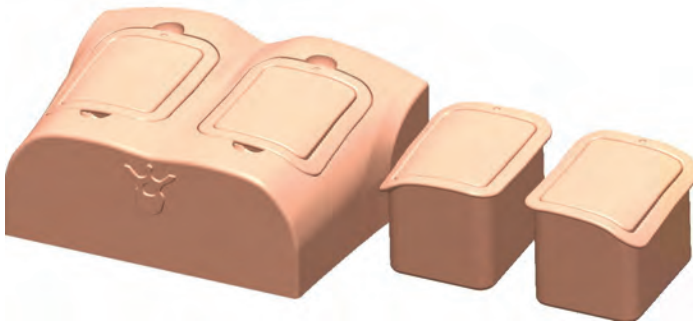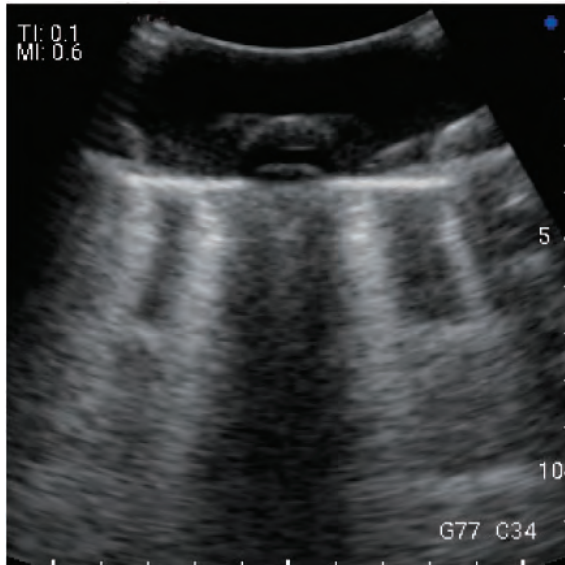


På grunn av tilstrømningen av pasienter fra COVID-19-pandemien, blir CT og røntgenmaskiner stadig vanskeligere tilgjengelig for diagnostiske formål. Som sådan er lunge-ultralyd en løsning for å minimere eksponering for medisinsk fagpersonell, og Kyoto Kagaku har utviklet et fantom for å praktisere det grunnleggende i denne prosedyren.

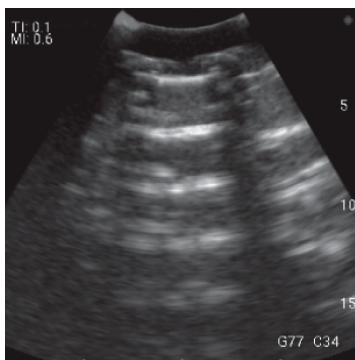


A-linje

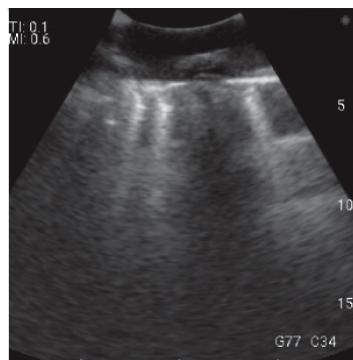

B-linje (noen få)

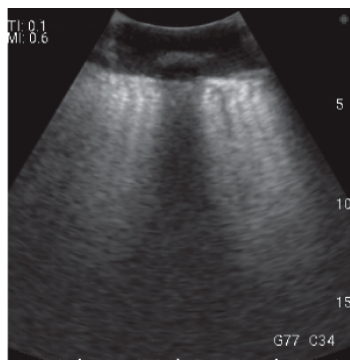

B-linje (mange)

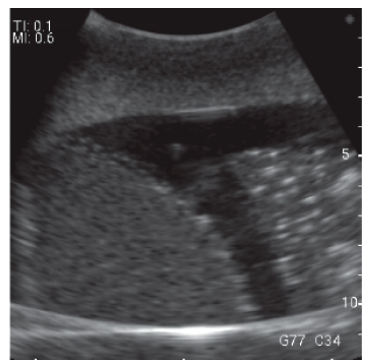

Lungebetennelse og pleural effusjon

Egenskaper

- Fiere typer enheter: A-linje, B-linje (noen få), B-linje (mange), lungebetennelse og pleural effusjon for trening i det grunnleggende om lunge-ultralyd.
- Anatomi inkluderer: lunge, brystvegg, ribben
- Ingen spesiell lagring nødvendig
- Passer for trening i store grupper
- Høy holdbarhet
- Lunge slide-modul og COVID-19-modul under utvikling

Settet inneholder

- 1 Øvre torso ultralydfantom
- 4 Fire typer lungemoduler
- 1 Brukermanual
- 1 Talkumpulver
- 1 Oppbevaringskoffert

* Ultralydsonde følger ikke med

Ultralydguidet fantom for sondenæring


US-20

Egenskaper

- Anatomisk korrekt halsmodell
 - Skjoldbruskkjertel
 - Luftrør
 - Spiserør
 - Sternum
 - Karotisarterie
 - Jugular vene (Vena jugularis interna)
- Realistiske ultralydbilder fra halsen
- Kan brukes med ekte ultralyddiagnostiske enheter
- Tillater bekreftelse av riktig plassering av nasogastrisk sonde med ultralyd
- Indre bryter for retning av sondeinnsetting: luftrør/spiserør for test av bildegjenkjenning for sondeplassering (bekreftelse ved ultralyd av riktig øsofagusinnføring eller feil luftrørsmontering)

Treningselementer

- ◆ Riktig håndtering og manipulasjon av næringssonde ved ultralyd i halsen
- ◆ Innføring av næringssonde
- ◆ Bekreftelse av plassering av sonde ved ultralyd
- ◆ Halsskanning for å evaluere sondeposisjonen

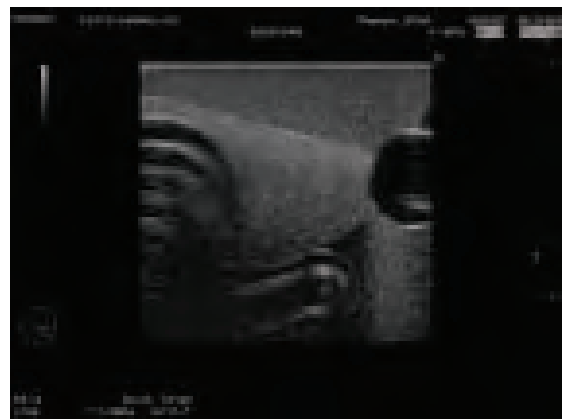

Ultralydbilde

Settet inneholder

- 1 Hoveddel
- 2 Ultralyd halsblokk
- 3 Nasogastric Tube
- 4 Sprøyte
- 5 Talkum
- 6 Oppbevaringskoffert
- 7 Brukermanual

* Ultralydsonde følger ikke med

Spesifikasjoner

Størrelse: B29 × H17 × D18 cm
Vekt: 2,8 kg

Product Supervision

Kenji Karino, Professor,
Clinical Skill-Up Center,
Simane University Hospital

DVT (Dyp venetrombose) fantom (ultralyd)

US-21




Egenskaper

- Nøyaktig gjengivelse av blodårenes buktninger, forgreninger og tromber
- De innebygde blodårene muliggjør "milking"-metoden, samt observasjon av kompresjon av karene ved trykk med ultralydprobe
- Gir opplæring i vurdering av venøs trombose i underekstremitetene

Treningselementer

- ◆ Screening for dyp venøs trombose i underekstremitetene
- ◆ Observasjon av blodstrøm ved bruk av "milking"-metoden

Ultralydbilder

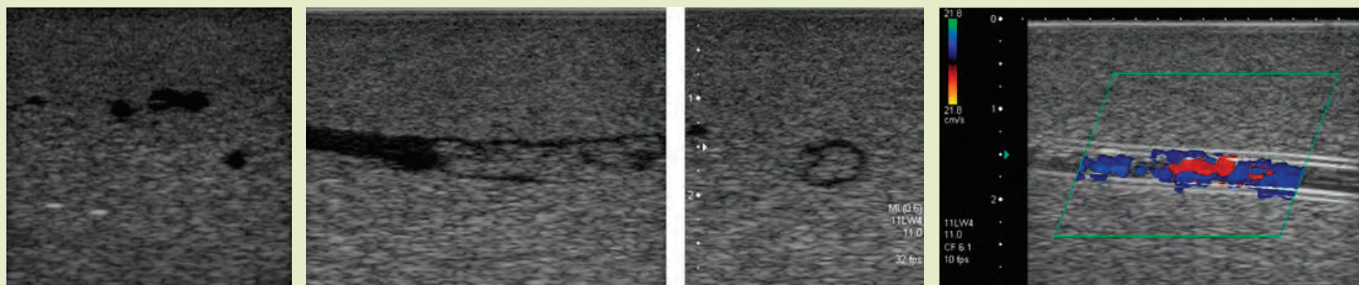

Settet inneholder

- 1 fantom nedre lem
- 1 ultralyd leggfantom (innebygget)
- 1 talkumpulver
- 1 oppbevaringskoffert
- 1 brukermanual


* Ultralydsonde følger ikke inkludert

Spesifikasjoner

- Størrelse: B27 x D17 x H47 cm
Vekt: 3,0 kg

Rektal- og blære-ultralydfantom

US-23






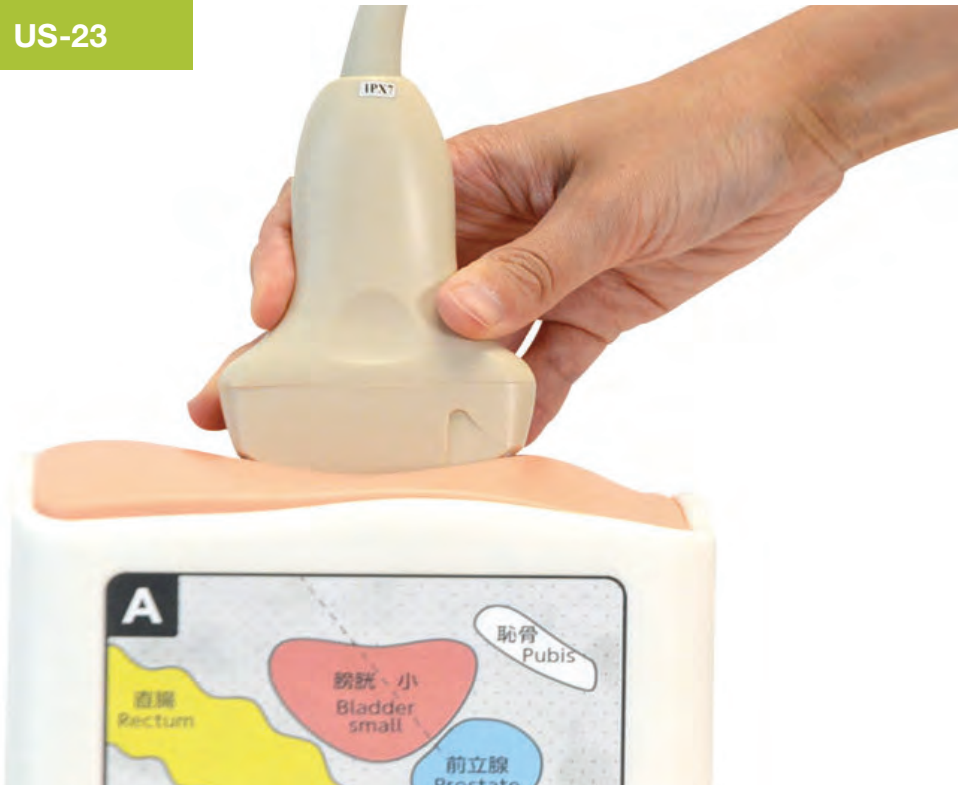


Egenskaper

- Fire variasjon av restekskresjon i rektum for ultralydundersøkelse: hard, myk, kombinasjon og tom
- Tre typer urinblærer for vurdering og måling av urinvolum: liten, middels, stor – med ballongkateter

Treningselementer

- ◆ Ultralydvurdering av restekskresjon i rektum
- ◆ Måling av urinvolum
- ◆ Ultralydvurdering av urinblære og prostata
- ◆ Vurdering av inneliggende blærekateter

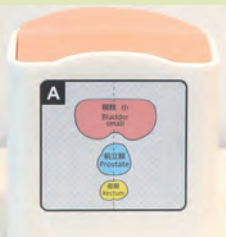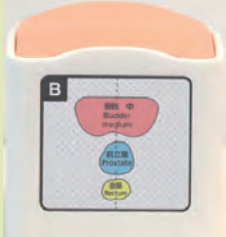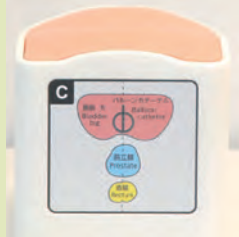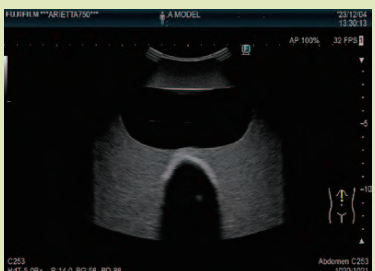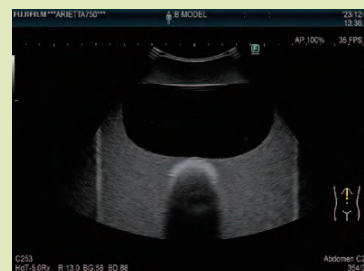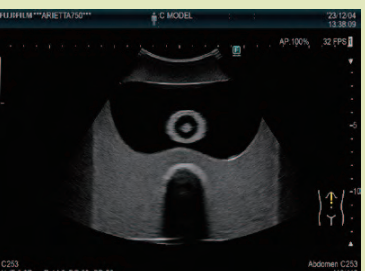A: Liten blære / Hard ekskresjon	B: Middels stor blære / Myk ekskresjon	C: Stor blære med ballongkateter / Hard og myk ekskresjon / tomt rektum
		
		
		

Settet inneholder

- 3 typer ultralydfantom-kuber
- 1 talkum-pulver
- 1 oppbevaringskoffert
- 1 bruksanvisning
- 1 brukermanual

* Ultralydsonde følger ikke med

Spesifikasjoner

Størrelse: B15 × D15 × H20 cm hver
Vekt: 2,0 kg hver

NOTATER

[illegible]

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

Telefon: 222 80 896

E-post: firmapost@svas.no

Nettside: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2025 svas svalland as, Oslo, Norway. Design og layout: Tor Stokkan
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as