

Autoklaver Sterilisering Desinfeksjon Forsegling



Når kvalitet teller

- Det perfekte utstyret som tilfredsstiller alle krav
- Verdens raskeste autoklaver
- Vaskedekontaminator/
instrumentvaskemaskin
- Automatisk forsyning av
demineralisert vann
- Forseglingsapparat
- Dokumentasjon

Made in Germany



[Desember 2025]



svas svalland as

Evolution i premiumklasse	4
Gullstandard for autoklaver	4
Vacuklav® 40 B+ Evolution, vanntilkobling	4
Vacuklav® 44 B+ Evolution, vanntilkobling	4
Vacuklav® 41 B+ Evolution, frittstående	4
Vacuklav® 43 B+ Evolution, frittstående	4
Prime Line	6
Vacuclave® 318	6
Vacuclave® 323	6
Pro Line	8
De attraktive basismodellene: 100 % kvalitet - Made in Germany	8
Klasse B autoklaver	8
Vacuclave® 118	8
Vacuclave® 123	8
Klasse S autoklaver	9
Vacuclave® 118S	9
Vacuclave® 123S	9
Vacuclave® 105	10
Vacuclave® 305	11
Vacuklav® 24 BL+	12
MELAtronic® 15 EN+	13
Vacuclave® 550	14
MELAtherm® 10 Evolution vaskedekontaminator (instrumentvaskemaskin)	16
For optimalisert arbeidsflyt på avdeling og klinikk	16
Sjekkliste for vaskedekontaminator	17
MELAtherm® 10 Evolution DTA	18
MELAtherm® 10 Evolution DTB	18
Smart-Touch	19
ProControl	19
AquaBoost	19
MELAtherm® 20	20
Kurver og adaptere for alle spesialiteter	22
Kurver og adaptere for alle disipliner	22
Perfeksjon inn til minste detalj	22
Grunnkonfigurasjon for tannklinikk	22
Grunnkonfigurasjon for OMF kirurgi	22
Grunnkonfigurasjon for ortodonti	22
Grunnkonfigurasjon for oftalmologisk klinikk	23
Grunnkonfigurasjon for gynekologisk klinikk	23
Grunnkonfigurasjon for ØNH-klinikk	23
Grunnkonfigurasjon for en medisinsk klinikk	23
Basiskurver og injektorskiner	24
Grunnlaget for en individuell belastning	24
MELAkontroll® Wash Check	25
Kurver og adaptere	26
Optimal bruk av basiskurven	26



[Se presentasjon på YouTube](#)

Flex kurver	28
Flex-systemet gir en rekke muligheter	28
Den sikreste dekontamineringen av dental ultralyd scaler tips	32
MELAcontrol®- testsystem	35
Rutinesjekk for vaskedekontaminator	35
Rutinesjekk for tetningsanordninger	35
Rutinesjekk for autoklaver	35
MELAseal®	36
MELAseal® 300	36
MELAseal® 200	36
MELAseal® 100+	36
Dispensere for ruller	37
MELAfol®	37
Folieholder	37
MELAstore®	38
Raske, rimelige og bærekraftige arbeidsflyter	38
MELAstore® Brett	38
MELAstore® Transport Box	38
ME11182MELAstore® Brett oftalmologi	38
MELAstore® Brett Oftalmologi	38
MELAstore® Box og steriliseringspapir	38
MELAstore® permanente filtre	39
MELAstore® engangsforsigling	39
ME01153MELAstore® identifikasjonsplater	39
Steriliseringsbeholdere med papirfilter	39
MELAtrace®	40
Programvare for dokumentasjon og godkjenning	40
Tilbehør for å koble MELAG-enheter til datamaskiner	40
MELAprint® 80 og MELAprint® 60	40
Strekkode håndskanner	41
MELAflash®, MELAnet® Box, USB flash-stasjon	41
MELAprint® 44	41
MELAdoc®	41
MELAdem®	42
MELAdem® 40	42
MELAJet®	42
Tilkoblingssett for MELAG frittstående enheter	42
Slanger og tilbehør for vanntilkoblingen	42
MELAdem® 53 og MELAdem® 53 C	43
Vannfordeler for MELAdem® 53 / MELAdem® 53 C	43
MELAdem® 47	43
Trykkøkingspumpe	43
Vannstoppeventil	43
Notater	44

Gullstandard for autoklaver

Det beste gjort enda bedre: MELAGs tiår med erfaring innen praksis og store autoklaver har muliggjort utviklingen av spesielt innovative og energieffektive dampsterilisatorer. Premium-Class Evolution-serien gir unike fordeler for de som ønsker å realisere den mest tids- og kostnadseffektive arbeidsflyten.



Patentert dobbeltjakketeknologi:

Rekordbrytende driftstider på 10 – 20 minutter (Quick-Program inkl. forvakuum og tørking) garanterer enda raskere instrumenttilgjengelighet.



Patentert DRYtelligence®:

Det intelligente systemet gir de perfekte tørkeresultatene samtidig som den forkorter tørketiden med opptil 80 %.



Høy lastekapasitet:

Feste for 8 brett muliggjør effektiv bruk av maksimal belastning på opptil 9 kg.



XXL fargeberøringsskjerm:

Dokumentasjon og godkjenning utføres raskt, sikkert og papirfritt direkte på autoklavens display.



Enhetsdesign:

Vanntilkobling

Tilkoblingen er like enkel som på en vaskemaskin.

Vacuklav® 40 B+ Evolution

Kammer: Dybde 35 cm, ø 25 cm, volum 18 liter
Enhetsmål (BxHxD): 46 x 50 x 55 cm,
Enhet passer på en 50 cm bordplate, høyde inkl. skjerm 56 cm
Bestillingsnr. ME10080

Vacuklav® 44 B+ Evolution

Kammer: Dybde 45 cm, ø 25 cm, volum 23 liter
Enhetsmål (BxHxD): 46 x 50 x 68 cm,
Enhet passer på en 60 cm bordplate, høyde inkl. skjerm 56 cm
Bestillingsnr. ME10084



Enhetsdesign:

Frittstående

Det eneste kravet for installasjon er en stikkontakt.

Vacuklav® 41 B+ Evolution

Kammer: Dybde 35 cm, ø 25 cm, volum 18 liter
Enhetsmål (BxHxD): 46 x 50 x 55 cm,
Enhet passer på en 50 cm bordplate, høyde inkl. skjerm 56 cm
Bestillingsnr. ME10081

Vacuklav® 43 B+ Evolution

Kammer: Dybde 45 cm, ø 25 cm, volum 23 liter
Enhetsmål (BxHxD): 46 x 50 x 68 cm, Enhet passer på en 60 cm bordplate, høyde inkl. skjerm 56 cm
Bestillingsnr. ME10083

Flex-display

Spesialfestet med 0,8 m lang tilkoblingskabel gjør at displayet kan plasseres på benkeplaten eller festes til vegg.
Flex-Displayet muliggjør drift av autoklaven i begrensede rom på opptil 50 cm høyde.

Bestillingsnr. ME65000



Vennligst bestill passende fester og brett:

For optimal bruk av steriliseringskammeret tilbyr MELAG justerte lastesystemer for ethvert behov.



Mount Universal - 1 montering, 1000 muligheter:

Universal muliggjør den fleksible kombinasjonen av opptil 8 skuffer og opptil 3 MELAstore® bokser for en last som er skreddersydd for din individuelle arbeidsflyt.



For Vacuklav® 40 / 41 B+ Evolution

Brettholder Mount Universal (kort)
Brett for Mount Universal (kort)
Flatt brett for Mount Universal (kort)
Smalt brett for Mount Universal (27 x 11 cm) (kort)

Bestillingsnr.

ME22921
ME22923
ME22925
ME01320

For Vacuklav® 43 / 44 B+ Evolution

Brettholder Mount Universal (lang)
Brett for Mount Universal (lang)
Flatt brett for Mount Universal (langt)
Smalt brett for Mount Universal (40 x 11 cm) (lang)

Bestillingsnr.

ME22922
ME22924
ME22926
ME01310



Chamber Protect Kammerrengjøringssett for ukentlig rengjøring av steriliseringskammeret.
Bestillingsnr. ME01081

Topp pris/ytelse med integrert programvare for godkjenning

Enten lasting, sterilisering eller dokumentasjon de nye Prime Line klasse B-autoklavene tilbyr et pris/ytelse-forhold som tåler enhver sammenligning. I tillegg til fordelene med de nye Pro Line-autoklavene, dra nytte av Prime Time for bedre ytelse, enestående tørkeresultater og sporbar batchgodkjenning.



- + Imponerende ytelse**
for sterilisering i Heavy Duty-programmet på opptil 8 kg
- + Optimalt tørkeresultat**
for beskyttelse mot ny kontaminering og korrosjon, takket være DRYtelligence
- + Fullstendig batchgodkjenning**
med brukerautentisering og etikettutskrift med MELAprint® 80 direkte på displayet
- + Kompromissløs bekvemmelighet**
under drift, rutinearbeid og vedlikehold
- + Banebrytende innovasjoner**
for besparelser av strøm og vann
- + Kvalitet – Made in Germany**
for maksimal pålitelighet i hverdagen

Budsjettvennlig kvalitet!

Prime Line

I tillegg til produkthøydepunktene til Pro Line-autoklavene, imponerer Prime Line med enda høyere lastekapasitet, utmerkede tørkeresultater og utvidede godkjenningsfunksjoner.

Vacuclave® 318

Kammerstørrelse: dybde 35 cm, ø 25 cm, volum 17 liter
enhetsdimensjon (BxHxD): 47 x 50 x 64 cm, passer på 60 cm
bordplate, inkl. USB-pinne og skuffholder
Bestillingsnr. ME10318

Fast vanntilkoblingssett for MELAdem® 40 og MELAdem® 47

Vacuclave® 323


Kammerstørrelse: dybde 45 cm, ø 25 cm, volum 23
liter enhetsdimensjon (BxHxD): 47 x 50 x 64 cm, passer
på 60 cm bordplate, inkl. USB-pinne og skuffholder
Bestillingsnr. ME10323

Bestillingsnr. ME09040



Velg matchende holdere og brett!

For optimal utnyttelse av steriliseringskammeret tilbyr MELAG et koordinert lastesystem for enhver bruk.

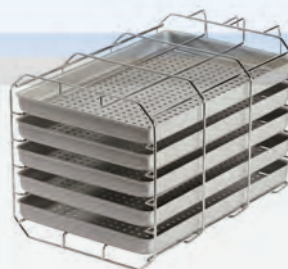

Brettholder A Plus
for 5 brett



Brettholder A Plus (dreid 90°)
for 3 MELAstore® Box 100



For Vacuclav® 318

Brettholder A Plus
Brettholder (29 x 19 cm)

Bestillingsnr.

ME82620
ME00280

For Vacuclav® 323

Brettholder A Plus
Brettholder (42 x 19 cm)

Bestillingsnr.

ME82630
ME00230



Chamber Protect Kammerrengjøringssett for ukentlig rengjøring av steriliseringskammeret.
Bestillingsnr. ME01081

De attraktive basismodellene: 100 % kvalitet – Made in Germany

Kjenner du til verdens mest solgte Pro-Class autoklaver? Da vil du elske den nye generasjonen enheter – fra funksjonene til prisen! For de prisgunstige basismodellene i Pro Line Class S og Class B autoklaver imponerer med smarte drifts- og dokumentasjonskonsepter samt et moderne og ekstremt robust design.

- ✓ **Høyytelses vakuumprosess**
i klasse B og S i henhold til EN 13060
- ✓ **Høy lastekapasitet**
på opptil 6 kg på 5 brett
- ✓ **Intuitivt betjeningskonsept**
takket være Smart-Touch Display med LED-status
- ✓ **Tilkobling og datalogging**
av steriliseringsloggfilene via USB-pinne, nettverk eller utskrift via MELAprint® 80
- ✓ **Frittstående konsept**
med integrerte vanntanker for maksimal fleksibilitet
- ✓ **Strømsparingsmodus**
for topp energieffektivitet i hverdagsbruk



Enhetsdesign:

Klasse B autoklaver

Den fraksjonerte vakuumprosessen reduserer luftinnholdet i steriliseringskammeret gjennom gjentatt evakuering og påfølgende dampgenerering for å redusere luften i steriliseringskammeret. Denne prosessen muliggjør ikke bare sterilisering av faste og porøse produkter, men også av hule instrumenter med smal kropp, slik som kirurgiske vinkelstykker og endoskoper.

Vacuclave® 118

Kammerstørrelse: dybde 35 cm, ø 25 cm, volum 17 liter
Enhetsdimensjon (BxHxD): 47 x 50 x 64 cm
Passer på 60 cm bordplate, inkl. USB-pinne og skuffholder

Bestillingsnr. ME10118

Fast vanntilkoblingssett for MELAdem® 40 og MELAdem® 47

Vacuclave® 123


Kammerstørrelse: dybde 45 cm, ø 25 cm, volum 23 liter
Enhetsdimensjon (BxHxD): 47 x 50 x 64 cm
Passer på 60 cm bordplate, inkl. USB-pinne og skuffholder

Bestillingsnr. ME10123

Bestillingsnr. ME09040

Velg matchende holdere og brett!

For optimal utnyttelse av steriliseringskammeret tilbyr MELAG et koordinert lastesystem for enhver bruk.

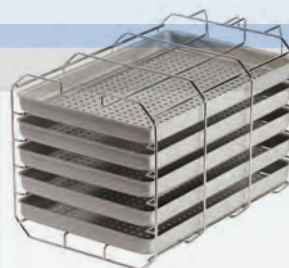

Brettholder A Plus
for 5 brett



Brettholder A Plus (dreid 90°)
for 3 MELAstore® Box 100



Enhetsdesign:

Klasse S autoklaver

Pro Line Class S autoklavene tilbyr et enda mer kostnadseffektivt alternativ for praksiser og klinikker som ikke krever en klasse B autoklav på grunn av instrumentene som brukes. Vacuclave® 118 S og Vacuclave® 123 S steriliserer selv pakke instrumenter med enkle hule kropper (f.eks. hengslede instrumenter som saks og nåleholdere).

Vacuclave® 118 S

Kammerstørrelse: dybde 35 cm, ø 25 cm, volum 17 liter
Enhetsdimensjon (BxHxD): 47 x 50 x 64 cm
Passer på 60 cm bordplate, inkl. USB-pinne og skuffholder

Bestillingsnr. ME10118S

Vacuclave® 123 S

Kammerstørrelse: dybde 45 cm, ø 25 cm, volum 23 liter
Enhetsdimensjon (BxHxD): 47 x 50 x 64 cm
Passer på 60 cm bordplate, inkl. USB-pinne og skuffholder

Bestillingsnr. ME10123S

Fast vanntilkoblingssett for MELAdem® 40 og MELAdem® 47

Bestillingsnr. ME09040

For Vacuclave® 118 / 118 S

Brettholder Mount A Plus
Brett (29 x 19 cm)

Bestillingsnr.

ME82620

ME00280

For Vacuclave® 123 / 123 S

Brettholder Mount A Plus
Brett (42 x 19 cm)

Bestillingsnr.

ME82630

ME00230



Chamber Protect Kammerrengjøringssett for ukentlig rengjøring av steriliseringskammeret.

Bestillingsnr. ME01081

Vacuclave 105 og 305

Verdens raskeste autoklaver

Med de raskeste autoklavene i verden, redefinerer MELAG grensene for hastighet

Med Vacuclave® 105 og Vacuclave® 305 kan du sterilisere instrumentene dine på opptil 2 brett på rekordtid fra 6,5 minutter (pluss tørking) - selv i det minste av mellomrom.

Fordi disse kraftsentrene med et kammervolum på 5 liter er kompakt klasse B autoklaver som oppnår store ting: Ideell som et supplement til autoklaven på klinikken for rask sterilisering mellom behandlinger eller som en frittstående enhet for mindre mengder instrumenter. Dra nytte av allsidigheten til Vacuclave® 105 og Vacuclave® 305 for å gjøre arbeidsflyten på klinikken mer effektiv og fleksibel.

- ✓ **Sterilisering har aldri vært så rask**
Steriliser opptil 2 kg instrumenter på rekordtid fra 6,5 til 15 minutter (pluss tørking).
- ✓ **Fritt programmerbar tørking**
Med flexDRY kan du fleksibelt tilpasse tørketiden til din arbeidsflyt og belastning.
- ✓ **Et magisk betjeningskonsept**
Smart-Touch Display gjør alt enklere fra programvalg til dokumentasjon.
- ✓ **Tilkobling og datalogging**
Dokumentasjon av steriliseringsprotokoller via USB-pinne, nettverk eller utskrift via MELAprint® 80.
- ✓ **Raskt installert, sterilisering overalt**
Plug & Play installasjonskonsept muliggjør lynrask igangkjøring.
- ✓ **Strømsparingsmodus**
Varmeapparatet og skjermen er satt til strømsparingsmodus mellom steriliseringer for topp energieffektivitet.

Pro Line

Vacuclave® 105

Hvem sier at du ikke kan ha store forventninger fra en liten autoklave? Spenn fast og dra nytte av et magisk betjeningskonsept, med imponerende kraft og smarte funksjoner som sparer deg for tid, penger og plass for dekontaminering av instrumenter.

Vacuclave® 105


Dimensjoner steriliseringskammer (HxBxD) 8 x 20,3 x 31 cm
Volum 5 liter. Enhetsdimensjoner (BxHxD): 30 x 30 x 59 cm Inkl. USB-pinne, 5 l avløpsbeholder og brettholder

Bestillingsnr. ME10105




Bestill matchende brett:

For optimal utnyttelse av steriliseringskammeret kan Vacuclave® 105 og Vacuclave® 305 fylles med enten 2x flate brett eller 1x dypt brett.

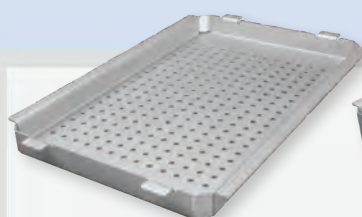

Brett flatt
Mål (HxBxD)
2 x 17,3 x 28,7 cm

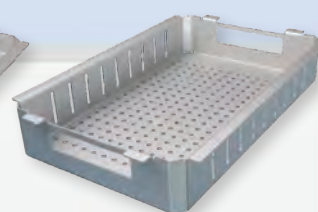

Brett dypt
Mål (HxBxD)
5 x 17,3 x 28,7 cm



Prime Line

Vacuclave® 305

I tillegg til produkthøydepunktene til Vacuclave® 105, drar du også nytte av:

- + Den patenterte DRYtelligence for optimale tørkeresultater og opptil 80 % kortere tørketid
- + ProControl for batchgodkjenning og brukerautentisering direkte på Smart-Touch Display
- + Etikettutskrift med MELAprint® 80 for sømløs sporbarhet av de represserte instrumentene

Vacuclave® 305

Dimensjoner steriliseringskammer (HxBxD) 8 x 20,3 x 31 cm, volum 5 liter. Enhetsmål (BxHxD): 30 x 30 x 59 cm inkl. USB-pinne, 5 l avløpsbeholder og brettholder

Bestillingsnr. ME10305



For Vacuclave® 105 / 305

Brett flatt
Brett dypt

Bestillingsnr.

ME23446
ME23447



Chamber Protect Kammerrengjøringssett for ukentlig rengjøring av steriliseringskammeret. **Bestillingsnr.** ME01081

Romslig vidunder med 60 cm dypt steriliseringskammer

Kvalitet du kan stole på: Vacuklav® 24 BL+ har et spesielt dypt steriliseringskammer (60 cm, volum 29 l) og er derfor egnet for praksiser, klinikker og sykehus som ønsker å sterilisere ekstra lange instrumenter, som stive endoskoper på kort tid.



Enhetsdesign:

Vanntilkobling

Tilkoblingen er like enkel som med en vaskemaskin.

Vacuklav® 24 BL+

Autoklaven for instrumenter opp til 55 cm, f.eks. stive endoskoper og tilbehør

Kammer: Dybde 60 cm, ø 25 cm, volum 29 liter

Enhetsdimensjoner (BxHxD): 42,5 x 49,5 x 83,5 cm,

Enheten passer på en 70 cm bordplate

Bestillingsnr. ME10052

For Vacuklav® 24 BL+

Holder C Plus for 6 brett

Brett (55 x 19 cm)

Bestillingsnr.

ME40246

ME00246



Den kompakte Class S autoklaven med tørking

MELAtronic® 15 EN+ er robust, slitesterk og kompakt. Klasse S autoklaven med fraksjonert strømningsprosedyre og elektronisk parameterovervåking har bevist seg i mange år innen generell, fotpleie og veterinærmedisin. Tørkepumpen garanterer optimale steriliseringsresultater for uinnpakket og innpakket instrumenter.



Enhetsdesign:

Frittstående

Det eneste kravet for installasjon er en stikkontakt.

MELAtronic® 15 EN+

Kammer: Dybde 38 cm, ø 15 cm, volum 7 liter

Enhetsdimensjoner (BxHxD): 44 x 33 x 50 cm

Bestillingsnr. ME10615

For MELAtronic® 15 EN+


Brett (12,9 x 34,5 cm)

Ekstern kondensatbeholder

Bestillingsnr.

ME00150

ME00356

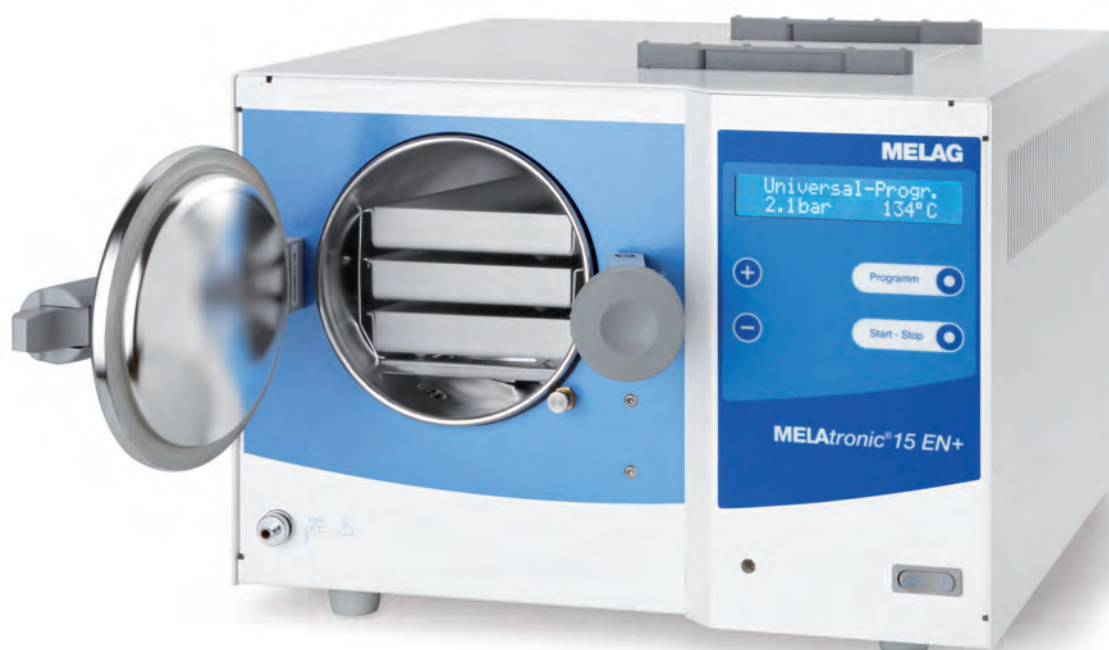

Noe stort kommer! Den store lille autoklaven.

Vacuclave® 550 beviser sann storhet: Sammenlignet med to alternative små autoklaver, tilbyr den splitter nye 50 liters løsningen betydelig mer kapasitet med 40 % mindre fotavtrykk og banebrytende innovasjoner for energieffektiv, tids- og kostnadsbesparende sterilisering av instrumentene dine.



Flere instrumenter. På kortere tid!

Det nye XL tvillingkammerkonseptet, rekordsyklustider og høy lastekapasitet gir maksimal allsidighet – og enda mer plass for opptil 25 kg instrumenter og 16 brett.



Mer kraft. Mindre energi.

Det patenterte systemet for varmegjenvinning distribuerer varmen fra den brukte dampen for å generere ny damp. Gjenvinningsteknologien reduserer ikke bare energiforbruket med opptil 15 % per syklus, men også varmespredning inne i dekontamineringskammeret.



Optimalt tørkeresultat – når som helst!

Stol på perfekte resultater: DRYtelligence® tilpasser tørkeprosessen optimalt til belastningen din. Den intelligente algoritmen reduserer tørketiden med opptil 80% – og sparer dermed mye tid, penger og energi.



Intuitiv som smarttelefonen din.

Kompromissløs komfort: Den ekstra store Smart-Touch-skjermen gjør drift, dokumentasjon og godkjenning til en lek.



Å spare vann betyr også: spare penger!

100% pålitelighet med 0% kjølevann – den patenterte Coolify teknologien kombinerer høyeffektiv luftkjøling med smart temperaturovervåking.

Vacuclave® 550

Kammer: Dybde 45 cm, ø 38 cm, volum 53 liter Enhetsdimensjoner (BxHxD): 63,6 x 59,0 x 71,5 cm, Enhet passer på en 60 cm bordplate, høyde inkl. skjerm 65 cm Strømforsyning: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz / 15 eller 13 Ampere modus Vanntilkobling: MELAdem® 47 eller MELAdem® 53 anbefales inkl. USB-pinne og brettholder

Bestillingsnr. ME10550

Påfyllingspumpe for tilførsel fra ekstern vanntank
Ekstern spillvanntank
Smussfilter for utskifting etter 1000 sykluser

Bestillingsnr.

ME65010
ME65020
ME82260




Påfyllingspumpe

Ekstern spillvanntank

Smussfilter



Chamber Protect Kammerrengjøringssett for ukentlig rengjøring av steriliseringskammeret. **Bestillingsnr.** ME01081

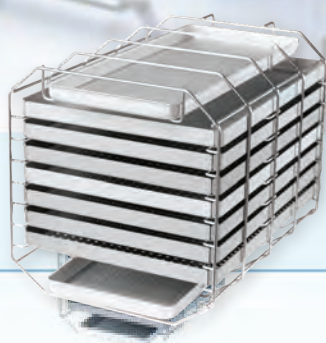


Brettholder Basic
for opptil 16 brett

For 7 brett for Vacuclave® 550
og 2 lange brett
For 14 standardbrett og 2 lange brett



Boksholder for
opptil 10 MELAstore® Box

For 10x MELAstore® Box 100
For 7x MELAstore® Box 200
og 1x MELAstore® Box 100

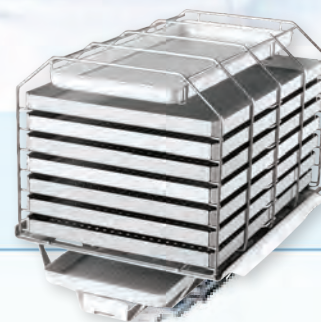

Brettholder med Mount Comfort
for opptil 16 brett

For 7 brett for Vacuclave® 550
og 2 lange brett
For 14 standardbrett og 2 lange
brett

Brettholder / Lasteskinne

Brettholder Basic
Mount Comfort (lasteskinne nødvendig)
Lasteskinne (Mount Comfort ikke inkl.)

Bestillingsnr.

ME22486
ME22485
ME22606

Brett

Brett Vacuclave® 550 (41 x 29
cm) Standardbrett (29 x 19 cm)
Langt brett (42 x 19 cm)

Bestillingsnr.

ME00550
ME00280
ME00230

MELAtherm® 10 Evolution

MELAG
kompetanse i hygiene

(instrumentvaskemaskin / vaskemaskin-desinfektor)

For optimalisert arbeidsflyt på avdeling og klinikk

Rengjøring og desinfisering med en MELAG instrumentvaskemaskin er den sikreste og mest effektive måten å sikre pålitelig instrumentdekontaminering.



Dra nytte av fordelene og beskytt både pasienter og personale



Effektivitet

Reduser arbeidsmengden og spar tid og penger



Sikkerhet

Forbedre sikkerheten ved å minimere personalkontakt med instrumenter



Lovlig overholdelse

Logging av dekontamineringsprosessen sikrer reproduktibilitet



Prosessoptimalisering


Umiddelbar tilgjengelighet av ikke-kirurgiske instrumenter etter automatisk rengjøring og desinfeksjon (i samsvar med nasjonale standarder)



Se presentasjon på YouTube.

Break-even etter bare 25 måneder med MELAtherm® 10 Evolution

Forutsetter følgende verdier:

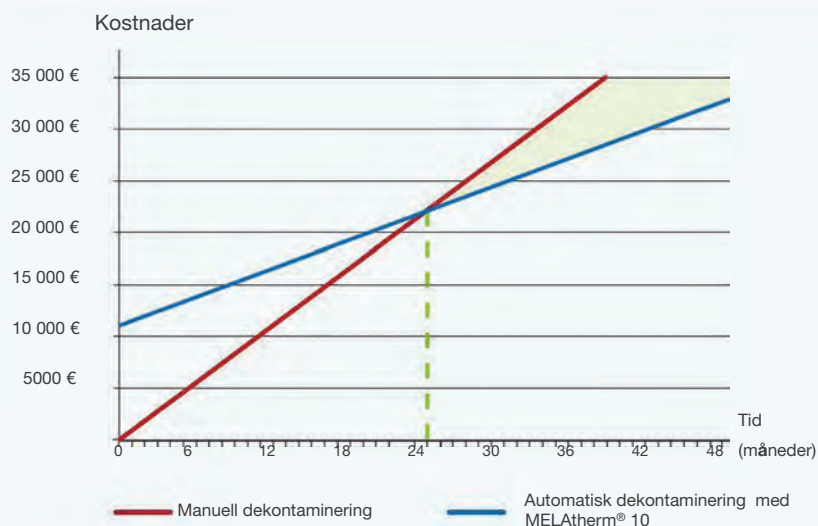

Antall virkedager per måned	22
Sykluser per dag	2
Timelønn assistent	18,50 €
Kostnad desinfeksjonsbad	1,80 €
Kostnader prosessmidler, strøm, vann	2,00 €
Arbeidstid manuell dekontaminering (t)	1
Arbeidstid automatisk dekontaminering (t)	0,25
Kostnad per dekontamineringscyklus (manuell)	20,30 €
Kostnad per dekontamineringscyklus (automatisk)	6,63 €

Anskaffelseskost MELAtherm® 10	11 000,00 €
Renter	5,0 %
Vedlikehold/Service/Validering per måned	100,00 €

Kostnader per måned (manuell)	893,20 €
Kostnader per måned (automatisk)	437,33 €

Sammenlignet med andre produsenter

Vi er overbevist om kvaliteten, påliteligheten og de innovative produkttegenskapene til vår instrumentvaskemaskin (instrumentvaskemaskin). Følgende sjekkliste oppsummerer hovedprodukttegenskapene for å gjøre det lettere å sammenligne våre instrumentvaskemaskin med modeller fra andre produsenter på markedet.

Produkttegenskap	Dine fordeler				
Aktiv tørking	→ Aktiv innvendig og utvendig tørking beskytter instrumentene dine mot korrosjon og skader og øker levetiden til instrumentene.	✓			
Intuitiv berøringsskjerm og driftskonsept	→ En berøringsskjerm med integrerte videoveiledninger sikrer sikker drift av enheten.	✓			
Integrerte prosessagenter	→ De integrerte prosessmidlene og doseringsenheten sparer verdifull plass i dekontamineringsrommet.	✓			
Flytende prosessmidler	→ Den automatiske doseringen av flytende prosessmidler garanterer perfekte rengjørings- og tørkeresultater.	✓			
Dokumentasjonsgrensesnitt	→ Med et CF-kort og to nettverksgrensesnitt utføres overføringen av loggfiler på en enkel og lovlig måte uten behov for ytterligere programvareløsninger.	✓			
Batchgodkjenning på enheten	→ Papirløs brukerautentisering og batchgodkjenning muliggjør umiddelbar gjenbruk av ikke-kirurgiske instrumenter (vennligst følg dine nasjonale standarder).	✓			
Klinikkoptimalisert vaskekammer	→ Kammerkonseptet tillater effektiv lasting, raske syklustider og lave forbrukskostnader på kun ca. 1 €/syklus (én MELAtherm® 10-last tilsvarer ca. to autoklavbelastninger).	✓			
Rengjørbart sentralfilter	→ Den innovative kontrollindikatoren til injektorskinnen verifiserer filterytelsen pålitelig. Hvis indikatoren ikke utløses, kan filteret rengjøres raskt og enkelt av treningsteamet.	✓			
Dekontaminering av ultralydskaleringspisser	→ Bare dekontaminering av ultralydskaleringspisser med momentnøkkel garanterer maksimal brukersikkerhet.	✓			
Overvåking av skylletrykk og skyllearmer	→ Overvåkingen av disse parameterne sikrer absolutt prosesspålitelighet.	✓			
Forlengede vedlikeholdssykluser	→ Vedlikeholdssykluser på 24 måneder eller 1000 sykluser reduserer de løpende servicekostnadene	✓			
Fornøyde brukere i din region	→ La deg inspirere av andre MELAtherm® 10-kunder på www.melag.com/en/referanser	✓			



Er du allerede en fornøyd bruker av våre MELAG dampsterilisatorer? Dra nytte av kostnadsbesparelsene som oppnås gjennom koordinert vedlikehold og valideringstjenester når du kjøper en MELAG vaskemaskin-desinfektor!

Komfort og ytelse brakt til perfektion

MELAtherm® 10 Evolution-serien kombinerer de velprøvde egenskapene til MELAtherm® 10 med en rekke innovative nye teknologier. Med maksimal ytelse og størst komfort gir MELAtherm® 10 Evolution en enda mer effektiv arbeidsflyt for instrumentdekontaminering.

De 80 forskjellige kurvene og annet tilbehør tilgjengelig for MELAtherm® 10 Evolution-serien lar deg konfigurere en skreddersydd last, skreddersydd til de individuelle behovene til praksiser og klinikker. Dette sikrer best mulig arbeidsflyt. Det økte skylletrykket generert av MELAtherm® 10 Evolution tillater dekontaminering av betydelig flere instrumenter enn MELAtherm® 10 på samme tid, med et nesten identisk strøm-, vann- og prosessmiddelforbruk.

Dermed er rengjøring og desinfisering av instrumenter for opptil 45 pasienter i bare én syklus mulig med rekordhastighet!

MELAtherm® 10 Evolution er tilgjengelig som en AC (230 V) eller trefase strøm (400 Volt) versjon.

MELAtherm® 10 Evolution DTA

Innebygd løsning - trefasestrøm

Enhetsdimensjoner (BxHxD): 60 x 82 x 68 cm,
Passer under en 60 cm benkeplate
Elektrisk tilkobling: 3N AC 400V, 50 Hz, 3 x 16A
inkl. CF-kort

Bestillingsnr. ME20020

MELAtherm® 10 Evolution DTB

Innebygd løsning - vekselstrøm

Enhetsmål (BxHxD): 60 x 82 x 68 cm,
Passer under en 60 cm benkeplate
Elektrisk tilkobling: 230V, 50 Hz, 16A
inkl. CF-kort

Bestillingsnr. ME20021



Gulvenhet (se lite bilde)

gir ekstra lagringsplass og garanterer ergonomisk lasting og betjening.
Dimensjoner (BxHxD): 60 x 40 x 60 cm

Bestillingsnr. ME11021

Dekkplate i rustfritt stål


I tilfelle enheten ikke er dekket av en ende-til-ende-overflate

Bestillingsnr. ME65310



Smart-Touch

Betjening og programvalg er så enkelt som aldri før ved bruk av den store Smart-Touch Display. Integrerte videoopplæringer om alle relevante driftsspørsmål garanterer et selvforklarende driftskonsept.

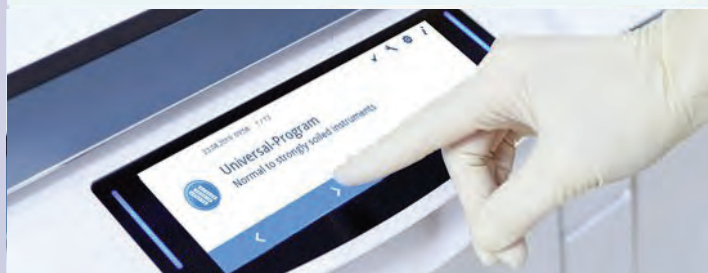

ProControl

Å utføre brukerautentisering og batchgodkjenning direkte på enheten sparer tid og gir rettssikkerhet.



AquaBoost

Den nye sirkulasjonspumpen med høy ytelse sikrer et 44 % bedre rengjøringsresultat og større kapasitet: Dekontaminerer opptil 23 håndstykker og turbiner per syklus.



Mer vaskedesinfeksjon for pengene enn noen gang før:

Oppdag det unike enhetskonseptet til MELAtherm® 10 Evolution på nettstedet vårt.

Skann QR-koden og finn ut mer.



Dobbel kapasitet med MELAtherm 20: For opptil 90 pasienter/sykluser*

All magien til MELAtherm® i XXL: Med et ekstra stort vaskekammer, smarte betjenings- og dokumentasjonskonsepter og et nyutviklet rengjøringsystem, MELAtherm®20 er klar for enhver utfordring – i dag og i fremtiden. Med opptil 24 Flex-segmenter i underkurven og overkurven, MELAtherm®20 tilbyr mer enn dobbel kapasitet, noe som muliggjør effektiv reprosessering av instrumenter for opptil 90 pasienter per syklus – ideelt rengjort og desinfisert takket være det innovative 3-arms skyllesystemet i kombinasjon med den velprøvde AquaBoost-teknologien.

Smarte funksjoner som den store berørings-skjermen, den integrerte ProControl-batchgodkjenningen og det nye selvrensende sentralfilteret Cleanfinity Pro sikrer også maksimal prosesspålitelighet med minimal innsats – for større effektivitet, kontroll og bekvemmelighet i daglig praksis og klinisk arbeid.

MELAtherm®20 er tilgjengelig som 230 V- eller 400 V-versjon og med et activeDRY- eller passiveDRY-tørkesystem: perfekt tilpasset dine individuelle behov.

MELAtherm®20

med activeDRY og som 400 volt-versjon

Apparatmål (B x H x D): 60 x 82 x 68 cm, passer under en 60 cm benkeplate, strømtilkobling: 3N AC 400V, 50Hz, 3 x 16A, inkl. USB-minnepinne.

Ordrenr. ME20022A50

MELAtherm®20

med activeDRY og som 400 volt-versjon

Apparatmål (B x H x D): 60 x 82 x 68 cm, passer under en 60 cm benkeplate, strømtilkobling: 3N AC 400V, 50Hz, 3 x 16A, inkl. USB-minnepinne.

Ordrenr. ME20022A50T

MELAtherm®20

med passiveDRY og som 230 volt-versjon

Apparatmål (B x H x D): 60 x 82 x 68 cm, passer under en 60 cm benkeplate, strømtilkobling: 230 V, 50 Hz, 16 A, inkl. USB-minnepinne.

Ordrenr. ME20022B50

MELAtherm®20

med activeDRY og som 230 volt-versjon

Apparatmål (B x H x D): 60 x 82 x 68 cm, passer under en 60 cm benkeplate, strømtilkobling: 230 V, 50 Hz, 16 A, inkl. USB-minnepinne.

Ordrenr. ME20022B50T



MediaGuard-boks for prosessagenter

for sikker og organisert oppbevaring av prosessvæsker i det tilstøtende underskapet.

Ordrenr. ME80232

Dekkplate i rustfritt stål

hvis MELAtherm®20 ikke er dekket av en sammenhengende benkeplate.

Ordrenr. ME65320



AquaBoost:

Takket være den kraftige sirkulasjonspumpen og det nyutviklede skyllearmsystemet, MELAtherm®20 oppnår ytterligere 63 % forbedret rengjøringssevne sammenlignet med MELAtherm®10 Evolusjon.**

** basert på ÖGSV-retningslinjer 3a

XXL-kammerkonsept:

Opptil 24 Flex-segmenter i den nedre kurven og den høydejusterbare øvre kurven gir plass til alt. Og enda mer.

Tørkesystemer:

Med activeDRY aktiv innvendig og utvendig tørking eller passiveDRY automatisk døråpning kan du pålitelig beskytte dine verdifulle instrumenter mot korrosjon og skader.

Smart-Touch:

Med den ekstra store berøringsskjermen er alt magisk enkelt – rett og slett magisk: fra programvalg til dokumentasjon via nettverk eller USB.

ProControl:

Brukerautentisering og batchgodkjenning direkte på enheten – dette sparer tid, er juridisk i samsvar og muliggjør umiddelbar gjenbruk av ikke-kirurgiske instrumenter (vennligst overhold dine nasjonale standarder).

MediaGuard: (valgfri)

Den spesialutviklede oppbevaringsboksen skaper orden og beskytter skapene dine pålitelig mot prosessstoffer.

Cleanfinity Pro: (valgfri)

Maksimal effektivitet, minimal håndtering – det nye selvrensende sentralfilteret i bunnen av vaskekammeret gir ideell beskyttelse for hule instrumenter og sparer verdifull arbeidstid.

Perfeksjon inn til minste detalj


Vaskekammeret til MELAG er optimalisert til de ulike disipliner. Derfor gir vaskedekontaminatoren korte driftstider, ergonomisk arbeidspraksis, lavt forbruk av prosessmidler og optimale rengjøringsresultater. Over 80 forskjellige kurver og adaptore er tilgjengelig for å tilpasse vaskekammeret til dine behov – uansett størrelse og spesialisering på klinikken din. De stablebare Flex kurvene og MELAstore® systemet gir de beste løsningene for dekontaminering av en stor mengde instrumenter.

Grunnkonfigurasjon for tannklinikk

Instrumenter for over 45 pasienter og opptil 33 hulkroppsinstrumenter kan dekontamineres i en enkelt syklus på rekordtid:

- 1x **ME84610**: Grunnkurv med injektorskinne og Cleanfinity filter
- 1x **ME80135**: Universalholder Flex 2
- 3x **ME01181**: MELAstore® Tray 100
- 1x **ME80020**: Flex kurv 2
- 2x **ME80110**: Holder for avtrykksbrett, saks og klemmer
- 1x **ME00184**: Instrumentkurv standard
- 1x **ME00133**: Kurv med små deler

Som ekstrautstyr: Adaptere for injektorskinnen, injektorkurv Flex 1 og 6
ultralydskaleringsspisser

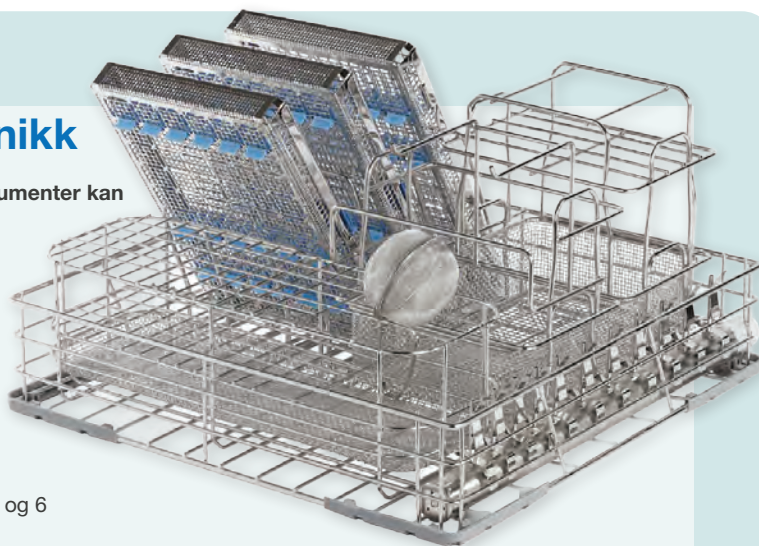

Grunnkonfigurasjon for OMF kirurgi

Instrumentene reposseseres som et sett i MELAstore® vaskebrett på rekordtid:

- 1x **ME84610**: Grunnkurv med injektorskinne og Cleanfinity filter
- 1x **ME80136**: Universalholder Flex 3
- 6x **ME01181**: MELAstore® Tray 100
- 1x **ME80135**: Universalholder Flex 2
- 3x **ME01182**: MELAstore® Tray 200
- 1x **ME00195**: Instrumentkurv kompakt

Som ekstrautstyr: Adaptere for injektorskinnen



Grunnkonfigurasjon for ortodonti

Følgende ladekonfigurasjon er ideelt egnet for dekontaminering av instrumenter på en kjeveortopedisk klinikk:

- 1x **ME84610**: Grunnkurv med injektorskinne og Cleanfinity filter
- 2x **ME80020**: Flex kurv 2
- 4x **ME80110**: Holder for avtrykksbrett, saks og klemmer
- 1x **ME00184**: Instrumentkurv standard

Som ekstrautstyr: Adaptere til injektorskinnen, Injektorkurv Flex 1



Grunnkonfigurasjon for oftalmologisk klinikk

MELAtherm® med den nye MELAstore® Tray Ophthalmology muliggjør rengjøring og desinfeksjon av opptil seks kataraktsett i bare 42 minutter (pluss tørking):

- 1x **ME80440**: Grunnkurv med injektorskinne og sentralfilter i plast
- 2x **ME80136**: Universal Flex 3 holder
- 6x **ME01189**: MELAstore® Tray Oftalmologi

Valgfritt: Flere adaptore og skruplugger tilgjengelig



Grunnkonfigurasjon for gynekologisk klinikk

Etter automatisert rengjøring, desinfeksjon og tørking er opptil 32 spekulær tilgjengelig for pasientbehandling. Flex-kurven 6 gir ekstra plass til ytterligere instrumenter:

- 1x **ME00188**: Grunnkurv uten injektorskinne
- 1x **ME80255**: Flex kurv 6
- 2x **ME80410**: Flex kurv spekulæ




Grunnkonfigurasjon for ØNH-klinikk

192 ørespekula og mange andre instrumenter kan rengjøres, desinfiseres og tørkes på bare ca. 60 minutter:

- 1x **ME00200**: Grunnkurv med injektorskinne (med 11 blindskruer)
- 1x **ME80020**: Flex kurv 2
- 1x **ME80030**: Flex kurv 3
- 1x **ME00195**: Instrumentkurv kompakt
- 1x **ME80090**: Toppramme for ørespekula Flex 2, maskevidde 20 mm
- 1x **ME80435**: Toppramme for nesespekula Flex 1 (inkl. 2 festeklemmer)

Som ekstrautstyr: Adaptere for injektorskinnen

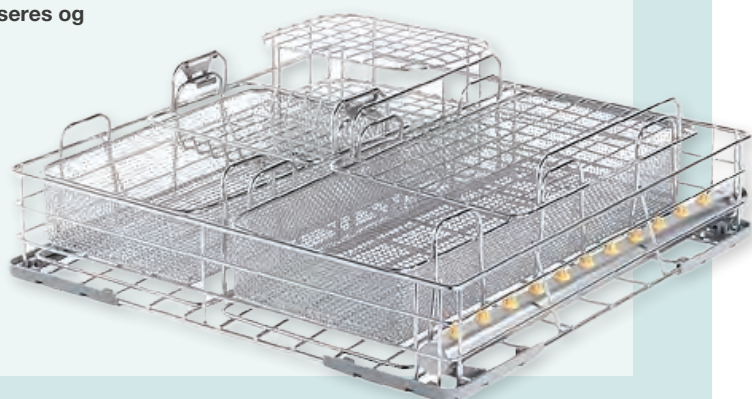


Grunnkonfigurasjon for en medisinsk klinikk

Med en rekke stablebare Flex-kurver, slangekoblinger og adaptore for opptil 33 hule kroppsinstrumenter, MELAtherm® passer perfekt til behovene til kirurgiske, ortopediske, urologiske, dermatologiske og generelle praksiser og klinikker.

- 1x **ME00200**: Grunnkurv med injektorskinne (med 11 blindskruer)
- 1x **ME80255**: Flex kurv 1
- 2x **ME80030**: Flex kurv 2
- 1x **ME80255**: Flex kurv 6

Som ekstrautstyr: Adaptere for injektorskinnen

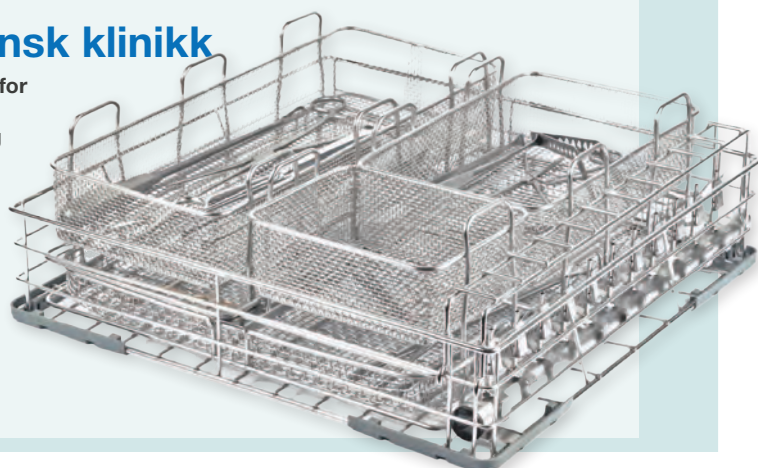

Basiskurver og injektorskinner

Optimalisering med individuell lastekonfigurasjon

Basiskurvene med injektorskinne er utstyrt med injektordyser, låseskruer eller 11 blindskruer og kan utstyres med ulike hulkroppsadaptere. Avhengig av behovet er forskjellige basiskurver tilgjengelige.

Mål (LxBxH): 43 x 42 x 9 cm):

Grunn kurv med injektorskinne og Cleanfinity filter

med 11 rustfrie låseskruer og rengjøringsbørste (ikke egnet for bruk i oftalmologisk sammenheng)


Bestillingsnr. ME84610



Grunn kurv med injektorskinne

med 11 injektordyser og fjærklemmer

Bestillingsnr. ME00197

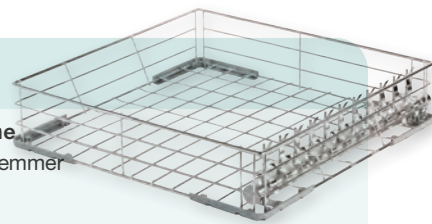

Grunn kurv med injektorskinne med 11 plastblindskruer


Bestillingsnr. ME00200



Grunn kurv uten injektorskinne


Hvis du ikke trenger å dekontaminere hule kroppsinstrumenter

Bestillingsnr. ME00188

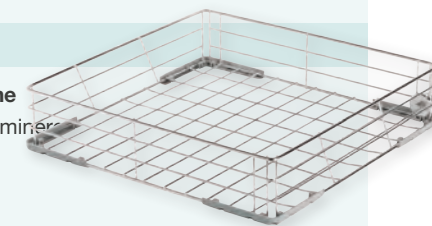

Grunn kurv med injektorskinne og sentralfilter for engangsbruk (2 stk.) for oftalmologiske praksiser og klinikker

Bestillingsnr. ME80440

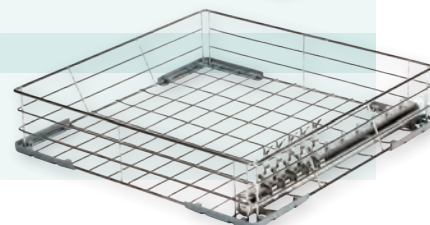


Oppgraderingssett og tilbehør for injektorskinne med sentralfilter

Du har allerede en basiskurv med injektorskinne og ønsker å bytte til sikker og rimelig dekontaminering med sentralfilter? Da kan du dra nytte av vårt oppgraderingssett og tilbehør.

Oppgraderingssett injektorskinne med Cleanfinity Filter og rensebørste

Erstatter injektorskinnen uten sentralfilter (ikke egnet for bruk i oftalmologisk sammenheng)

Bestillingsnr. ME84620

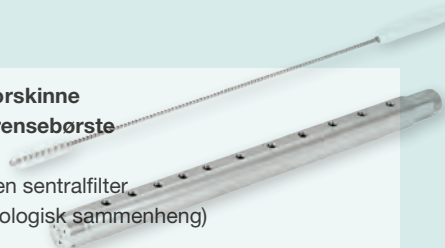

Cleanfinity filter (med rensebørste)

for å erstatte det sentrale engangsfilteret og Cleanfinity-filteret (ikke egnet for bruk i oftalmologisk sammenheng)

Bestillingsnr. ME84630



Rengjøringsbørste for Cleanfinity Filter

allerede inkludert i leveringsomfanget av et Cleanfinity filter

Bestillingsnr. ME84640



Sentralfilter for engangsbruk

for å skifte det brukte filteret i injektorskinnen

Bestillingsnr. ME80490



MELAcontrol® Wash Check

Hold øye med rengjøringsresultatet!

Med testsystemet, som består av en rengjøringsindikator og holder, kan du overvåke rengjøringsytelsen til instrumenter i basiskurven eller på injektorskinnen i henhold til DIN EN ISO 15883-5.

MELAcontrol® Wash Check
Rengjøringsindikatorer, 100 stk

Bestillingsnr. ME01072

MELAcontrol® Wash Check
Holder for kontroll av den utvendige rengjøringen i basiskurven

Bestillingsnr. ME01073

MELAcontrol® Wash Check
Holder for kontroll av innvendig rengjøring på injektorskinnen

Bestillingsnr. ME01074



MELAcontrol® Wash Check gir en enkel og pålitelig kvalitetskontroll av rengjøringen i MELAtherm® vaskedesinfektor, i samsvar med DIN EN ISO 15883-5.

Bruken er enkel:






Holderen festes til enten injektorskinnen eller basiskurven og brukes sammen med en vaskindikator. Etter rengjøringscyklusen gir en rask visuell sjekk av indikatoren en umiddelbar vurdering av rengjøringskvaliteten.

Løsningen er spesielt egnet for hulromsinstrumenter som vinkelstykker og endoskoper. De 100 medfølgende indikatortorkortene gjør det enkelt å overvåke rengjøringsresultatene og sikre grundig rengjøring av både faste og bevegelige instrumenter.

MELAcontrol® Wash Check bidrar til optimal hygiene og pasientsikkerhet i din klinikk eller praksis.

Optimal bruk av basiskurven


Alle komponentene er perfekt justert for å gjøre det mulig å utstyre den grunnleggende kurven med ytterligere kurver eller innsatsstativer. Tilpass de seks segmentene i basiskurven til dine individuelle behov:

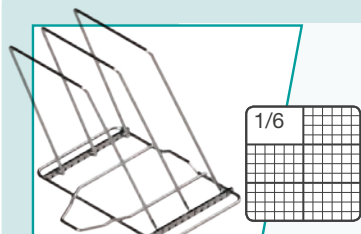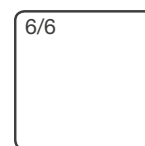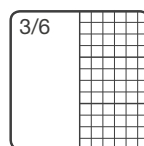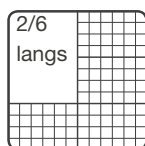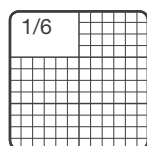

Universalholder Flex 1

- For fleksibel lasting med fritt valgbar avstander på opptil:
4x MELAstore®Skuff 50, 2x MELAstore®Skuff 100, 1x MELAstore®Skuff 200 eller 1x silkasett (Bestillingsnr. ME80185)
- Ekstra brakett (Bestillingsnr. ME80133)


Bestillingsnr.
ME80134

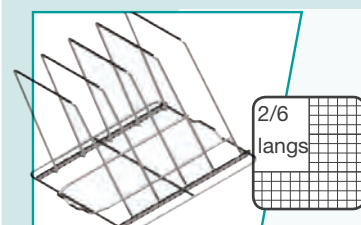

Universalholder Flex 2

- For fleksibel lasting med fritt valgbar avstander på opptil:
8x MELAstore®Skuff 50, 4x MELAstore®Skuff 100, 3x MELAstore® Tray 200 eller 3x silkasett (Bestillingsnr. ME80185)
- Ekstra brakett (Bestillingsnr. ME80133)


Bestillingsnr.
ME80135

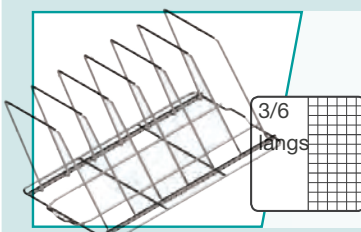

Universalholder Flex 3

- For fleksibel lasting med fritt valgbar avstander på opptil:
12x MELAstore®Skuff 50, 6x MELAstore®Skuff 100, 5x MELAstore® Tray 200 eller 5x silkasett (Bestillingsnr. ME80185)
- Ekstra brakett (Bestillingsnr. ME80133)


Bestillingsnr.
ME80136

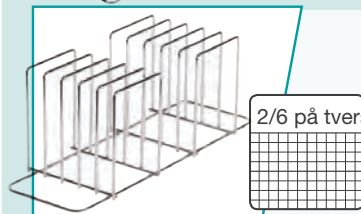

Holder for 5 brett / 10 halve brett

- For aksept av opptil 5 brett eller 10 halve brett


Bestillingsnr.
ME80590

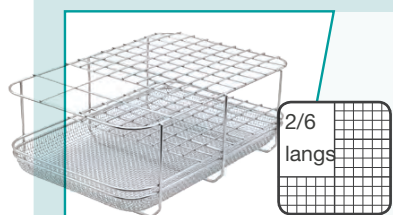

Instrumentkurv G

- For vertikalt stående instrumenter som f.eks. sakser, pinsett, klemmer, prober, speil og dentale aspiratorspisser med en diameter på 11 til 16 mm
- Kan kombineres med nålespissplaten (Bestillingsnr. ME00186)


Bestillingsnr.
ME00131

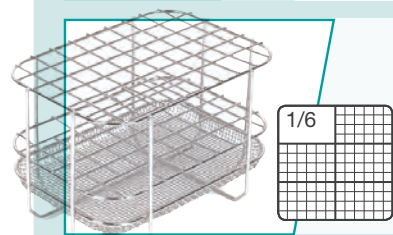

Instrumentkurv kompakt

- For vertikalt stående instrumenter som f.eks. pinsett, prober, speil, nesespeil og dentale aspiratorspisser med en diameter på 11 til 16 mm
- Kan kombineres med nålespissplaten (Bestillingsnr. ME00186)


Bestillingsnr.
ME00195

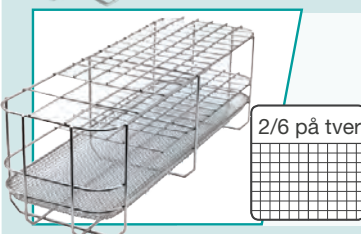

Instrumentkurv standard

- For vertikalt stående instrumenter som f.eks. pinsett, prober, speil, sakser, klemmer og dentale aspiratorspisser med en diameter på 11 til 16 mm
- Kan kombineres med nålespissplaten (Bestillingsnr. ME00186)

Bestillingsnr.
ME00184

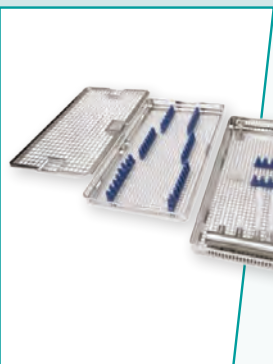

MELAstore® Tray Oftalmologi

- Vaskebrett for sikker og skånsom repossessering av alle instrumenter for kataraktkirurgi (maks. 6 sett per syklus i MELAtherm®)
- MELAstore® Tray Oftalmologi pakkes deretter og steriliseres i MELAstore® Box 200
- Sett inkl. adapter og rør
- Perfekt i kombinasjon med basiskurv med injektorskinne og sentralfilter i plast (Bestillingsnr. ME80440) og 2x Universalholder Flex 3 (Bestillingsnr. ME80136)

Bestillingsnr.
ME01189


Bestillingsnr.
ME01180



MELAstore® Tray 50

- MELAstore® Tray 50, mål (BxHxL): 11,8 x 3 x 18 cm
- For sikker og effektiv repossessering av individuelle instrumenter og instrumentsett (f.eks. for profylakse eller fotterapi) i MELAtherm®10 serier


Bestillingsnr.
ME01180

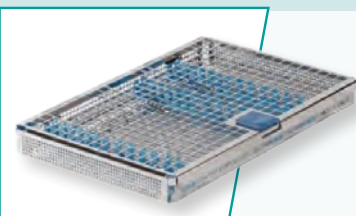

MELAstore® Tray 100

- MELAstore® Tray 100, mål (BxHxL): 17,6 x 3 x 27,5 cm
- For sikker og effektiv repossessering av individuelle instrumenter og instrumentsett (f.eks. for periodontittbehandlinger, konservative behandlinger eller mindre kirurgiske prosedyrer) i MELAtherm®10 serier


Bestillingsnr.
ME01181

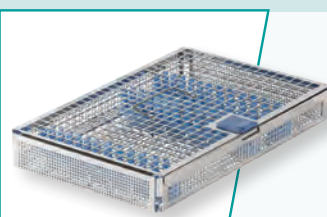

MELAstore® Tray 200

- MELAstore® Tray 200, dimensjoner (BxHxL): 17,6 x 4,3 x 27,5 cm
- For sikker og effektiv repossessering av individuelle instrumenter og instrumentsett (f.eks. for oral kirurgi) i MELAtherm®10 serier

Bestillingsnr.
ME01182

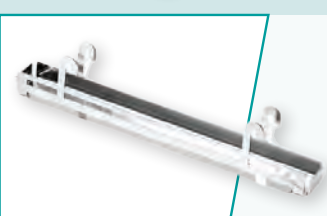

Spissbeskyttelse for instrumentkurv

- Hindrer skarpe instrumenter fra å trenge inn i kurven
- Kan utplasseres i instrumentkurvstandard (Bestillingsnr. ME00184), instrumentkurv G (Bestillingsnr. ME00131) og instrumentkurv kompakt (Bestillingsnr. ME00195)


Bestillingsnr.
ME00186



Kurvkomfort for små deler

- For sikker dekontaminering av små instrumenter og små deler
- Kurvkomforten med små deler kan plasseres i Flex kurvene
- Mål (BxHxD): 8,4 x 7,15 x 7 cm

Bestillingsnr.
ME80001

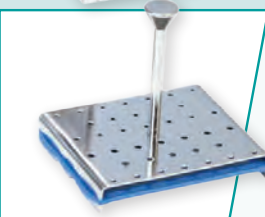

Burholder

- For sikker oppbevaring av roterende instrumenter (f.eks. bor) med akseldiameter på 1,6 mm og 2,35 mm (opptil 19 stykker hver)
- Kun i kombinasjon med smådeler kurvkomfort

Bestillingsnr.
ME80002




Kurv for små deler

- For sikker repossessering av de minste instrumentene
- Smådelbeholderen kan plasseres i flexkurvene eller instrumentkurvene
- Mål: ø 7,6 cm x lengde: 18 cm

Bestillingsnr.
ME00133

Flex-systemet gir en rekke muligheter


MELAGs egenutviklede og eksepsjonelt fleksible Flex-system gir mange lastekombinasjoner, og muliggjør optimal utnyttelse av vaskekammeret. Med Flex kurv 6 som grunnlag er det mulig å stable de ulike Flex kurvene 1, 2 og 3, Flex kurv for spekula eller innsatsstativet for avtryksbrett eller hengslede instrumenter i to nivåer. Bildet til høyre viser kurv for ørespekula Flex kurv 2 stablet på Flex kurv 3 i kombinasjon med Flex kurv 1 og ørespekulumfestet flex 1.

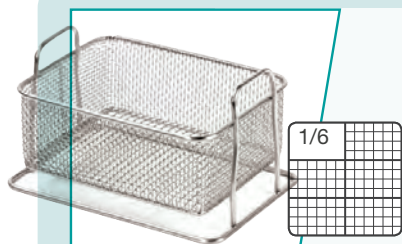

Flex kurv 1

- For instrumenter som ligger flatt, f.eks. saks, pinsett, speil
- Kan stables med Flex kurver 1, 2, 3 og 6
- Innvendige mål (BxHxD): 14,5 x 6 x 11 cm


Bestillingsnr.
ME80010

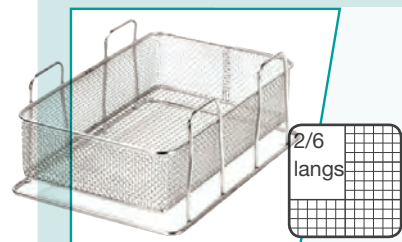

Flex kurv 2

- For instrumenter som ligger flatt, f.eks. sakser, pinsett, speil, rotheiser
- Kan stables med Flex kurver 1, 2, 3 og 6
- Innvendige mål (BxHxD): 14,5 x 6 x 24 cm


Bestillingsnr.
ME80020

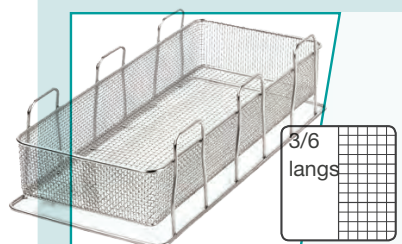

Flex kurv 3

- For instrumenter som ligger flatt, f.eks. sakser, pinsett, rotheiser
- Kan stables med Flex kurver 1, 2, 3 og 6
- Innvendige mål (BxHxD): 14,5 x 6 x 37,5 cm


Bestillingsnr.
ME80030

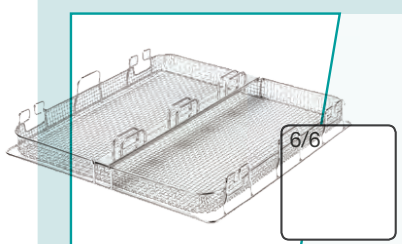

Flex kurv 6

- For lange instrumenter med en lengde på opptil 40 cm som ligger flatt, f.eks. saks, pinsett, speil
- Som grunnlag under Flex kurvene 1, 2, 3 og under flexkurvens spekula
- Innvendige mål (BxHxD): 34 x 3 x 38 cm


Bestillingsnr.
ME80255

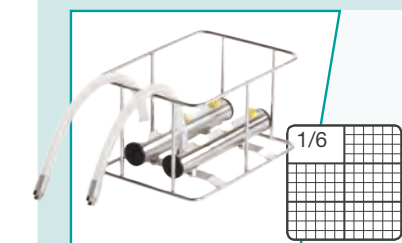

Injektorkurv Flex 1

- For opptil 6 adaptere (MELAdem®10: Adaptore kun for tips, MELA therm®10 Evolution: Alle adaptore)
- Krever enten basiskurven med injektorskinne og sentralfilter (Bestillingsnr. ME84610 eller ME80440) eller to ekstra enkeltfilterhus (Bestillingsnr. ME73905) kombinert med basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197)
- Leveringsomfanget inkluderer nødvendige slanger og slangekoblinger


Bestillingsnr.
ME80740

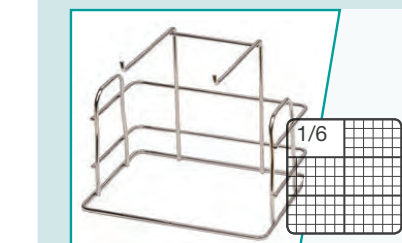

Holder for avtryksbrett, saks og klemmer

- For opptil 8 tannavtryksbrett samt for saks og klemmer
- Saksen og klemmene skal åpnes og henges på ringgrebene (øynene)
- Kan stables med Flex kurver 1, 2, 3 og 6


Bestillingsnr.
ME80110

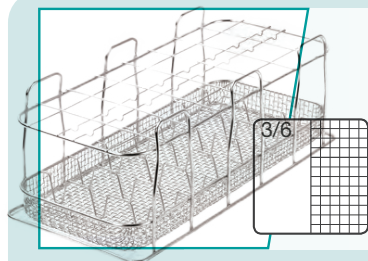

Flex kurv for gynekologiske spekula

- For gynekologiske spekula: Holder opptil 8 sett Kristell / 16 Cusco / Semm specula
- Kan stables på Flex kurv 6


Bestillingsnr.
ME80410

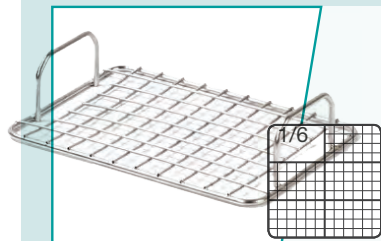

Toppramme for ørespekula Flex 1, maskevidde 14 mm

- For opptil 50 ørespekuler
- For innstilling på Flex kurvene 1, 2 og 3. Kan også brukes som lokk
- Flex kurver kan fylles delvis med disse eller utsettes for omfattende bruk (f.eks. 3 topprammer på en Flex kurv 3)


Bestillingsnr.
ME80070

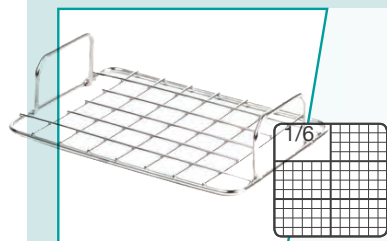

Toppramme for ørespekula Flex 1, maskevidde 20 mm

- For opptil 24 ørespekuler
- For innstilling på Flex kurvene 1, 2 og 3. Kan også brukes som lokk
- Flex kurver kan fylles delvis med disse eller gjenstand for omfattende bruk (f.eks. 2 topprammer på en Flex kurv 2)


Bestillingsnr.
ME80080

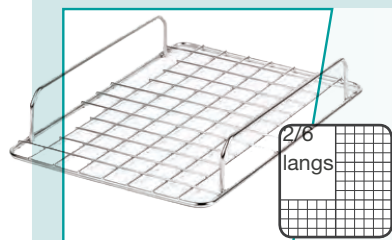

Toppramme for ørespekula Flex 2, maskevidde 20 mm

- For opptil 60 ørespekuler
- For innstilling på Flex kurvene 1, 2 og 3. Kan også brukes som lokk
- Flex kurver kan fylles delvis med disse eller gjenstand for omfattende bruk (f.eks. 1 toppramme på 2 Flex kurver 1)


Bestillingsnr.
ME80090

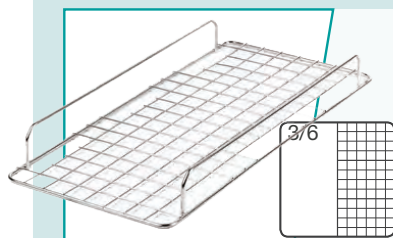

Toppramme for ørespekula Flex 3, maskevidde 20 mm

- For opptil 96 ørespekuler
- For innstilling på Flex kurvene 1, 2 og 3. Kan også brukes som lokk
- Flex kurver kan fylles delvis med disse eller gjenstand for omfattende bruk (f.eks. 1 toppramme på Flex kurv 3)

Bestillingsnr.
ME80100

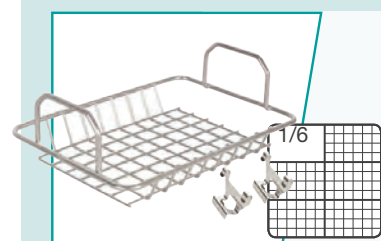

Toppramme for nesespekula Flex 1 (inkl. 2 festeklemmer)

- For selvholdende instrumenter, f.eks. nesespeil
- Kan brukes med Flex kurver 1, 2 og 3

Bestillingsnr.
ME80435



Festeklemme for toppramme

- Allerede inkludert i leveringsomfanget av topprammen for nesespekula med Best.nr. ME80435
- Kan også brukes til alle topprammer for ørespekuler
- For å feste en toppramme trenger du to deler av festeklemmen

Bestillingsnr.
ME80420



Instrumentholder for Flex kurver (60 stk.)

- For innføring i nettingen til Flex kurvene for en sparsom festing av instrumenter i en Flex kurv

Bestillingsnr.
ME80395

Bestillingsnr.
 ME73904

Universaladapter (inkl. 3 innsatser og filterskive)

- For repressering av overføringsinstrumenter, scalers av pulverstråleenheter, etc.
- Leveres inkl. 3 silikoninnsatser: Grønn (ø 16 mm), Blå (ø 20 mm) og Hvit (ø 22 mm)
- Kan skrus inn i injektorskinen til basiskurven
- Filterskiven som følger med i leveringsomfanget er kun nødvendig for injektorskinen uten sentralfilter


Instrumentholder for universaladapter

- For ekstra fiksering av instrumenter i universaladapteren
- Inkl. holderring og 3 silikonstropper

Bestillingsnr.
 ME22968

Trippelfordeler (inkl. keramisk filterskive)

- For opptil 3 injektordyser, Luer / Luer-Lock adaptere eller slangekoblinger
- Filterskiven som følger med i leveringsomfanget er kun nødvendig for injektorskinen uten sentralfilter

Bestillingsnr.
 ME73903

Trippelfordeler (uten filterskive)

- For opptil tre injektordyser med klemfjær, Luer / Luer-Lock-adaptere eller slangekoblinger
- For repressering av hulkropsinstrumenter er denne trippelfordeleren kombinert med injektorskinen med sentralt filter

Bestillingsnr.
 ME22611

Filterskivehus (inkl. keramisk filterskive)

- Adaptere for hule instrumenter kan skrus inn i skivehuset hvis instrumentene må skylles med filtrert vann
- Bruk to enkeltfilterhus for å koble injektorkurven Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740) til en injektorskinneuten sentralfilter
- Filterskiven som følger med i leveringsomfanget er kun nødvendig for injektorskinen uten sentralfilter

Bestillingsnr.
 ME73905

Avstandshylse

- For maksimal bruk av injektorskinen med universaladaptere, trippelfordelere, doble fordelere og filterskivehus
- Ved bruk av mer enn 6 universaladaptere, fordelere eller filterskivehus, kreves det en avstandshylse for hver ytterligere adapter på injektorskinen

Bestillingsnr.
 ME55120

Keramisk filterskive (10 stk.)

- For bruk med universaladapteren, trippelfordeleren eller med filterskivehuset
- Kan brukes i MELAtherm® for maks. 20 sykluser

Bestillingsnr.
 ME64375

Filterskive i metall

- For bruk med universaladapteren, trippelfordeleren eller med filterskivehuset
- Etter 20 sykluser i MELAtherm®, må filterskiven rengjøres i et ultralydbad
- Filterskiven kan rengjøres opptil 20 ganger i ultralydbadet
- Metallfilterskiven er ikke godkjent for oftalmologi

Bestillingsnr.
 ME80350

Skyllehylse inkl. utvidelse

- For hule instrumenter med en utvendig diameter fra 2 til 11 mm og en ikke-standardisert tilkobling
- Hvis skyllehylsen er skrudd inn i injektorskinen, er det mulig å repressere instrumenter med en lengde på opptil 22 cm
- Skyllehylseforlengelsen og 5 silikoninnsatser med forskjellige diametre er inkludert i leveringsomfanget

Bestillingsnr.
 ME80260



Adapter for ISO-kontakt (INTRA)

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og sentralfilteret (ME80440 eller ME84610) eller Bestillingsnr med basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra enkeltfilterhus (Bestillingsnr. ME73905).

Bestillingsnr.
ME80610



Adapter for Sirona T1 Classic

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og sentralfilteret (Bestillingsnr. ME80440 eller ME84610) eller med basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra enkeltfilterhus (Bestillingsnr. ME73905).

Bestillingsnr.
ME80620



Adapter for KaVo / BienAir vinkelhoder

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og sentralfilteret (Bestillingsnr. ME80440 eller ME84610) eller med basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra enkeltfilterhus (Bestillingsnr. ME73905).

Bestillingsnr.
ME80630



Adapter for turbiner med W&H-kobling (Roto Quick)

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og sentralfilteret (Bestillingsnr. ME80440 eller ME84610) eller med basiskurven med injektor (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra enkeltfilterhus (Bestillingsnr. ME73905)

Bestillingsnr.
ME80640



Adapter for turbiner med Sirona kobling

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og sentralfilteret (Bestillingsnr. ME80440 eller ME84610) eller med basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra enkeltfilterhus (Bestillingsnr. ME73905).

Bestillingsnr.
ME80650



Adapter for turbiner med KaVo-kontakt (MULTIflex)

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og sentralfilteret (Bestillingsnr. ME80440 eller ME84610) eller med basiskurven med injektor (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra enkeltfilterhus (Bestillingsnr. ME73905)

Bestillingsnr.
ME80660



Adapter for turbiner NSK-kontakt (Phatelus)

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og sentralfilteret (Bestillingsnr. ME80440 eller ME84610) eller med basiskurven med injektor (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra enkeltfilterhus (Bestillingsnr. ME73905)

Bestillingsnr.
ME80612



Adapter for utvendige sprøytekanaler

- For repossessering av f.eks kirurgiske turbiner med utvendige sprøytekanaler
- Universaladapteren eller en ekstra adapter for håndstykker er nødvendig for innvendig rengjøring og desinfeksjon
- Adapteren skrus direkte inn i injektorskinnen med sentralfilter (Bestillingsnr. ME84610 eller ME80440) eller inn i filterskivehuset (Bestillingsnr. ME 73905)

Bestillingsnr.
ME74135




Injektordyse

- For hule instrumenter f.eks. kirurgiske sugekanyler
- Kan skrus inn i injektorskinnen, dobbelfordeleren eller inn i trippelfordeleren
- Ytre diameter: 4 mm
- Ekstra klemfjær (Bestillingsnr. ME00196)

Bestillingsnr.
ME73860

Sikker og effektiv dekontaminering av dental ultralyd-scaler tips

Standard-kompatibel dekontaminering av hulkroppsinstrumenter blir stadig viktigere. Injektorkurv Flex 1 er den sikreste løsningen for automatisk dekontaminering av ultralyd-scaler tips. Kurven har plass til 6 tips med momentnøkkel og krever kun to koblinger på injektorskinne. Bruk tre injektorkurver Flex 1 for å dekontaminere opptil 18 tips per syklus.

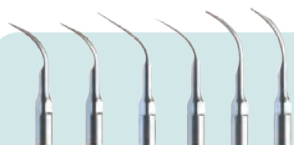

Ultralyd-scaler tips




Momentnøkkel



Injektorkurv Flex 1



Den sikreste dekontamineringen

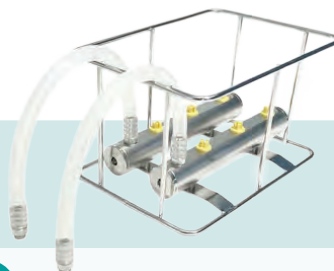

Adapter for tips M3,0 x 0,5 mm, utvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (Bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (Bestillingsnr. ME73905) eller med injektoren kurv Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks for **KaVo** SONOsoft, Piezo LUX; **EMS** Piezon / Piezon LED; **W&H** Piezo Skalor; Tigon, Tigon+, Pyon 2 kirurgi, Piezomed; **Komet** PiezoLine EM1, KA1, KA2; **NSK** ulike EMS; Mectron Multipiezo

Bestillingsnr.
ME80750



Adapter for tips M3,0 x 0,35 mm, utvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (Bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (Bestillingsnr. ME73905) eller med injektoren kurv Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks for **KaVo** PiezoLED, PiezoSoft

Bestillingsnr.
ME80752



Adapter for tips M3,0 x 0,6 mm, utvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (Bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (Bestillingsnr. ME73905) eller med injektoren kurv Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks for **Acteon** (Satelec) Newtron, Suprasson; **Ultradent** Newtron; **Hu-Friedy** Piezo S-serien; **NSK** Varios

Bestillingsnr.
ME80756



Adapter for tips M3,5 x 0,35 mm, innvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (Bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (Bestillingsnr. ME73905) eller med injektoren kurv Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks for **Planmeca** LM-ProPower

Bestillingsnr.
ME80755



Adapter for tips M3,5 x 0,6 mm, innvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (Bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (Bestillingsnr. ME73905) eller med injektoren kurv Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks for **Sirona** SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic; **Komet** PiezoLine SI1; **Dürr** Vector scaler; **Morita** Softy / Softy LED

Bestillingsnr.
ME80760



Adapter for tips M3.6 x PH1.5 P0.5, innvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (Bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (Bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (Bestillingsnr. ME73905) eller med injektoren kurv Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks for **KaVo** SONICflex quick 2008

Bestillingsnr.
ME80751



Adapter for tips M3,0 x 0,5 mm, innvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (bestillingsnr. ME73905) eller med injektoren kurv Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks. for KaVoSONICflex 2000, 2003; SironaSIROAIR L; W&HLuftscaler, Proxeo, Synea, Alegra; KometSonicLine SF1LM; NSKLuftscaler Ti-Max S970, AS2000; EMSPiezon (LED) håndstykke

Bestillingsnr.
ME80790



Adapter for ultralyd-scaler håndstykker M3,0 x 0,35 mm, innvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (Bestillingsnr. ME73905) eller med injektorkurven Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks. for KaVo PiezoLED Ultrasonic Scaler, PIEZOsoft Ultrasonic Scaler

Bestillingsnr.
ME80753



Adapter for ultralyd-scaler håndstykker M3,0 x 0,6 mm, innvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (Bestillingsnr. ME73905) eller med injektorkurven Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks. for Acteon (Satelec) Newton, Suprasson, NSK Varios

Bestillingsnr.
ME80757



Adapter for ultralyd-scaler håndstykker M3,5 x 0,6 mm, utvendig gjenge

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (Bestillingsnr. ME73905) eller med injektorkurven Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks. for Sirona Siroson, Sirosonic, PerioSonic

Bestillingsnr.
ME80771



Adapter for EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (bestillingsnr. ME73905) eller med injektoren kurv Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- for eksempel for EMS EL-308 (Prophylaxis Master)

Bestillingsnr.
ME80614



Adapter for EMS AIR-FLOW Handy 3.0

- Kan brukes sammen med basiskurven med injektorskinne og filter (bestillingsnr. ME84610 eller ME80440), basiskurven med injektorskinne (bestillingsnr. ME00197) og ekstra filterskivehus (bestillingsnr. ME73905) eller med injektoren kurv Flex 1 (Bestillingsnr. ME80740)
- f.eks. for EMS EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS)

Bestillingsnr.
ME80613



Merkeskiver for adaptere

- Den fargekodede merkingen av adaptere unngår montering av instrumenter på feil adaptere, og forhindrer dermed skade på gjengene
- Settet består av 6 grønne, 6 blå og 6 gule merkeskiver

Bestillingsnr.
ME80769



Skruplugg for injektorskinne og fordelere

- For å tette ikke-nødvendige åpninger i injektorskinnen, i dobbelfordeleren eller i trippelfordeleren

Bestillingsnr.
ME80140


Adapter (hankjønn) for Luer

- For repressering av instrumenter / hule nåler med Luer-tilkobling (hun)
- Kan skrues inn i injektorskinnen, trippelfordeleren, dobbelfordeleren eller skivefilterhuset

Bestillingsnr.
 ME73880

Adapter (hankjønn) for Luer-Lock

- For repressering av instrumenter / hule nåler med Luer-Lock-tilkobling (hun)
- Kan skrues inn i injektorskinnen, trippelfordeleren, dobbelfordeleren eller skivefilterhuset

Bestillingsnr.
 ME74130

Tetting (hankjønn) for Luer / Luer-Lock

- For tetting av Luer (Bestillingsnr. ME73880) eller Luer-Lock-adaptore (Bestillingsnr. ME 74130)

Bestillingsnr.
 ME80180

Adapter (hankjønn) for Luer / Luer-Lock

- For repressering av instrumenter / hule nåler med Luer (hann) eller en Luer-Lock tilkobling (hankjønn)
- Kan skrues inn i injektorskinnen, trippelfordeleren, dobbelfordeleren eller skivefilterhuset

Bestillingsnr.
 ME67250

Tetting (hankjønn) for Luer-Lock

- For tetting av Luer-Lock-adaptore (Bestillingsnr. ME67250)

Bestillingsnr.
 ME80170

Slangekobling med utvendig gjenge

- For slanger med 6 mm innvendig diameter, f.eks. silisiumslange (Bestillingsnr. ME80190)
- Kan skrues inn i injektorskinnen, i dobbelfordeleren, inn i trippelfordeleren og inn i skivefilterhuset

Bestillingsnr.
 ME80150

Slangekobling med innvendig gjenge

- For slanger med 6 mm innvendig diameter, f.eks. silisiumslange (bestillingsnr. ME80190)
- Kan kombineres med adaptore for Luer / Luer-Lock, trippelfordeleren eller dobbelfordeleren

Bestillingsnr.
 ME80160

Slangeforlenger med koblinger

- For tilkobling av vaskesystemer eller overføring av tilpasning av instrumenter til en til en Flex kurv
Slangelengde 0,5 m med en slangekobling hver med innvendig eller utvendig gjenge
- Kan kombineres med adaptore for Luer / Luer-Lock, trippelfordeleren eller dobbelfordeleren

Bestillingsnr.
 ME80195

Silikonslange, 10/6 mm

- Svært fleksibel, knekkfri silisiumslange for tilkobling av instrumenter
- Instrumenter kan også presses inn i slangen
- Slangelengde 2 m

Bestillingsnr.
 ME80190

Kontroll er bra, hygiene er bedre.

Safety First - MELAcontrol® muliggjør rask, sikker og kostnadseffektiv rutinetesting av vaskedekontaminator, forseglingsenhetene og autoklavene. Oppdag våre perfekt justerte testelementer og prosedyrer for hele arbeidsflyten for instrumentbehandling.

Rutinesjekk for instrumentvaskemaskin

Hold øye med rengjøringsresultater: Vår Wash Check lar deg overvåke rengjøringsytelsen for instrumenter i kurvene eller på injektorskinnen i henhold til DIN EN ISO 15883-5.

MELAcontrol® Wash Check
Rengjøringsindikatorer, 100 stk.
Bestillingsnr. ME01072



MELAcontrol® Wash Check
holder for sjekk av utvendig rengjøring i basiskurven.
Bestillingsnr. ME01073



MELAcontrol® Wash Check
Brakett for kontroll av innvendig rengjøring på injektorskinnen.
Bestillingsnr. ME01074



Rutinesjekk for tetningsanordninger

MELAG-testprosedyrene lar deg nøyaktig verifisere kvaliteten og reproducerbarheten til tetningssømmene på daglig, ukentlig og årlig basis.

MELAcontrol® Seal Check
Avrivningsblokk med 100 teststrimler.
Bestillingsnr. ME01079



MELAcontrol® Ink Test
Blekktest med 30 poser.
Bestillingsnr. ME01089



Test for Seal Seam Stability: for årlig testing av tetningsanordningen.

Bestillingsnr. SV09018

Rutinesjekk for autoklaver

Enten tekstiler, stive instrumenter eller hule kroppar - med vår Bowie & Dick-test, type 5-indikator eller helixtest kan du pålitelig sjekke steriliseringsresultatet til autoklaven.

MELAcontrol® Helix
Bestående av testkropp og 250 indikatorstrimler.
Bestillingsnr. ME01080



MELAcontrol® Pro*
Permanent testkropp inkl. 40 indikatorstriper.
Bestillingsnr. ME01075



MELAcontrol® Pro påfyllingspakke
med 250 indikatorstrimler og en forsegling.

Bestillingsnr. ME01076

MELAcontrol® Type 5
bestående av 250 indikatorlister.
Bestillingsnr. ME01077



MELAcontrol® Bowie & Dick Test
bestående av 1 testpakke.
Bestillingsnr. ME01078



MELAG forseglingsapparater

Dra nytte av vårt brede utvalg av produkter og velg mellom MELAseal® 200 og MELAseal® 100+ stangforseglingsapparater og MELAseal® 300 og MELAseal® Pro roterende forseglere for store volumer av innpakke instrumenter.

MELAseal® 300 (inkl. USB-pinne)

Kompakt og validerbar roterende forseglingsapparat

Enhetsdimensjoner (BxHxD): 36 x 16 x 17,5 cm

- ✓ Korte oppvarmingstider på 100 sekunder og høy gjennomstrømningshastighet på opptil 15 m/min
- ✓ Magisk enkelt betjeningskonsept med det store Smart-Touch-skjerm
- ✓ Påminnelsesfunksjon for forseglingskontroll og forseglingssønstabilitetstest
- ✓ Digital oppsettassistent for kostnads- effektiv igangkjøring av praksisteamet
- ✓ Strømsparing for maksimal energieffektivitet
- ✓ Dokumentasjon av forseglingsprotokoller via 2x USB og 1x nettverksgrensesnitt

Bestillingsnr. ME10300



MELAseal® 200 (inkl. USB-pinne)

Validerbar stangforsegling

Enhetsdimensjoner (BxHxD): 41,5 x 15 x 24 cm

- ✓ To integrerte USB-grensesnitt for logging og datamaskintilkobling (inkl. 8 GB MELAG USB-pinne)
- ✓ Intuitivt MELAG 4-tasts konsept med LED-statusvisning for enkel betjening
- ✓ Plassbesparende på grunn av kompakt produkt design med integrert skjæreblad
- ✓ Energisparende og standby-funksjon for enda mer økonomisk bruk

Bestillingsnr. ME10120



MELAseal® 100+

Kompakt stangforseglingsapparat

Enhetsdimensjoner (BxHxD): 41,5 x 15 x 24 cm

- ✓ Korte forvarmings- og forseglingstider garanterer raske innpakkingsprosesser
- ✓ Kompakte enhetsdimensjoner krever liten plass på benkeplaten
- ✓ Akustiske og optiske signaler for overvåking av forseglingstid og temperatur
- ✓ Vedlikeholdsfri sparer kostnader i daglig drift

Bestillingsnr. ME10211



MELAseal® Pro Validerbar roterende tetningsenhet

Enhetsmål (BxHxD): 46 x 15,5 x 29,5 cm

Best.nr. ME10010



Arbeidsbord Comfort

Mål inkl. tetningsanordning (BxHxD): 66 x 15,5 x 54 cm **Bestillingsnr.** ME00118

Arbeidsbord Standard

Mål inkl. tetningsanordning (BxHxD): 66 x 15,5 x 54 cm **Bestillingsnr.** ME00119

Rulldispenser (veggmontert)

Mål (BxHxD): 52,5 x 26,5 x 25 cm **Bestillingsnr.** ME00116

Fot til rulldispenseren

for montering på benkeplaten **Bestillingsnr.** ME71490



Dispensere for ruller

Tilbehør tilpasset MELAseal® 300 for en jevn mer effektiv pakkeprosess.

Arbeidsbord Standard

Mål (BxHxD): 60 x 3,5 x 21,2 cm

Bestillingsnr. ME77750

Arbeidsbord Komfort

Mål (BxHxD): 60 x 3,6 x 21,7 cm

Bestillingsnr. ME00141

Dispenser (veggmontert)

Mål (BxHxD): 52,5 x 26,5 x 25 cm

Bestillingsnr. ME00116

Fot til haspeldispenseren

for montering på benkeplaten

Bestillingsnr. ME71490

For MELAseal® 200 / 100+ muliggjør uanstrengt mating av den gjennomsiktige steriliseringsforpakningen.

Dispenser Deluxe

med en matemekanisme sett nye standarder for ergonomi og drift.

Mål inkl. tetningsanordning (BxHxD): 41,5 x 43 x 33 cm

Bestillingsnr. ME10108

Dispenser Comfort

lagrer rullene på en plassbesparende måte over MELAseal®.

Mål inkl. tetningsanordning (BxHxD): 41,5 x 42 x 28 cm

Bestillingsnr. ME10111

Dispenser Standard

aksepterer rullene bak MELAseal®.

Mål inkl. tetningsanordning (BxHxD): 41,5 x 15 x 46 cm

Bestillingsnr. ME10117

Veggmontert dispenser

kan distribueres fleksibelt over tetningsanordning.

Mål (BxHxD): 35 x 17 x 17 cm

Bestillingsnr. ME00106

MELAfol®

Gjennomsiktig steriliseringsforpakning i henhold til EN 868-5, tilgjengelig som rull eller pose. Med en reposeringsindikator, som endrer farge fra rosa til brun etter sterilisering.

Rull (bredde x lengde)

MELAfol® 502 (5 cm x 200 m)

MELAfol® 752 (7,5 cm x 200 m)

MELAfol® 1002 (10 cm x 200 m)

MELAfol® 1502 (15 cm x 200 m)

MELAfol® 2002 (20 cm x 200 m)

MELAfol® 2502 (25 cm x 200 m)

Poser (bredde x lengde)

MELAfol® 501 (5 x 25 cm), 1000 stk

MELAfol® 751 (7,5 x 25 cm), 1000 stk

MELAfol® 1001 (10 x 25 cm), 1000 stk.

Poser med fold (Bredde x Lengde)

MELAfol® 2051 (20 x 50 cm), 100 stk. for

forsegling av standardbrettsetter

Bestillingsnr.

ME00502

ME00752

ME01002

ME01502

ME02002

ME02502

Bestillingsnr.

ME00501

ME00751

ME01001

Bestillingsnr.

ME02051

Folieholder

for vertikal sterilisering av instrumenter forseglet i MELAfol® for enda bedre tørkeresultater.

For autoklaver 118 (S) / 318 / 40 B+ / 41 B+

For autoklaver 123 (S) / 323 / 43 B+ / 44 B+

Bestillingsnr.

ME22410

ME22420

Rutinekontroller

MELAG-testprosedyrene utfører raske og rimelige inspeksjoner av forseglings-enheten din, og sikrer dermed lovlig samsvar. Våre tilpassede løsninger fungerer nøyaktig for å bevise kvaliteten og reproduserbarheten til tetningssømmene dine.

MELAcontrol® Seal Check, 100 teststrimler

Best.nr. ME01079

MELAcontrol® Ink Test, 1 rull á 30 poser

Bestillingsnr. ME01089

Test for Seal Seam Stability, i henhold til EN 868-5, vedlegg D, for den årlige inspeksjonen av forseglingsprosessen med MELAG tetningsanordninger

Bestillingsnr. SV09018

Rask, rimelig og bærekraftig arbeidsflyt

Instrumentdekontaminering med et integrert system bestående av MELAstore® Tray og MELAstore® Box sparer mye tid og penger. MELAstore®-systemet sikrer en optimal instrumentarbeidsflyt fra behandling over dekontaminering til lagring.

MELAstore® brett

De store åpningene i våre MELAG-vaskebrett i rustfritt stål garanterer de best mulige rengjøringsresultatene i MELAtherm®. Festing utføres med innrettede silikonstenger for å sikre sikker transport av instrumentene og beskyttelse av personellet.



MELAstore® Tray 50

inkl. tre silikonstenger for instrumenter med en lengde på maks. 17,5 cm.
Mål (BxHxL): 11,8 x 3 x 18 cm

Bestillingsnr. ME01180



MELAstore® Tray 100

inkl. tre silikonstenger for instrumenter med en lengde på maks. 27 cm.
Mål (BxHxL): 17,6 x 3 x 27,5 cm

Bestillingsnr. ME01181



MELAstore® Tray 200

inkl. tre silikonstenger for instrumenter med en lengde på maks. 27 cm
Dimensjoner (BxHxL): 17,6 x 4,3 x 27,5 cm

Bestillingsnr. ME01182

MELAstore® silikonstang for MELAstore® Tray 50
MELAstore® silikonstang for MELAstore® Tray 100
MELAstore® silikonstang for MELAstore® Tray 200
MELAstore® Silikonstang for MELAstore® Tray 50 / 100, bølgeprofil
MELAstore® Silikonstang for MELAstore® Tray 50 / 100, fastholder

Bestillingsnr.

ME82960
ME82970
ME82980
ME82961
ME82971




Silikonstang til
MELAstore® Tray 50



Silikonstang til
MELAstore® Tray 200



Silikonstang til
MELAstore® Tray 100

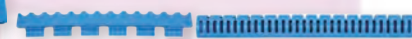

Bølgeprofil av
silikonstang

Silikonstang
nedholder

MELAstore® Transport Box

for oppbevaring av opptil 5x MELAstore®- Brett 100 eller 4x MELAstore®- Brett 200, dimensjoner (BxHxD): 29 x 18,6 x 39,5 cm

Bestillingsnr. ME01100




MELAstore® brett oftalmologi

Vaskebrett for sikker og skånsom repressering av alle instrumenter for kataraktkirurgi (maks. 6 sett per syklus i MELAtherm®)

MELAstore® brett Oftalmologi

Vaskebrettssystem inkl. adapter og slanger, mer informasjon på s. 33

Bestillingsnr. ME01189

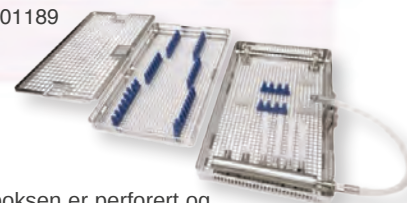

MELAstore® Box og steriliseringspapir

MELAstore®- brettene settes inn i den tilsvarende MELAstore®- boksen for å utføre sterilisering. Lokket på boksen er perforert og utstyrt med holder for filter. Filtrene er tilgjengelige som engangspapirfiltre eller permanente filtre og må bestilles separat. MELAG tilbyr ytterligere identifikasjonsplater med eller uten strekkode for å merke MELAstore®- boksen.



MELAstore® Box 100

for aksept av én MELAstore® Tray 100 eller 2
MELAstore® Tray 50 Mål (BxHxL): 19 x 4,6 x 31,2 cm
Bestillingsnr. ME01191



MELAstore® Box 200

for aksept av én MELAstore® Tray 200
Mål (BxHxL): 19 x 6,5 x 31,2 cm
Bestillingsnr. ME01192

Bestillingsnr.
MELAstore® steriliseringspapir, 50 x 50 cm (500 stk.) ME11180
MELAstore® steriliseringspapir, 90 x 90 cm (250 stk.) ME11181

Bestillingsnr.
MELAstore® steriliseringstape, 19 mm x 50 m ME11182

MELAstore® permanente filtre

MELAstore®- filtre er designet for bruk i MELAstore® Box 100 og MELAstore® Box 200. Det permanente filteret for opptil 1000 steriliseringssykluser gir enda mer økonomiske prosesser sammenlignet med engangspapirfiltrene.

	Bestillingsnr.
MELAstore® permanent filter Emballasjeenhet: 2 stykker hver (for opptil 1000 sykluser)	ME01193
MELAstore® engangspapirfilter Emballasjeenhet: 100 stykker hver (for engangsbruk)	ME01194

MELAstore® permanente filter

MELAstore® engangspapirfilter

MELAstore® engangsforsigling

For sikker forsegling av MELAstore®- boksene og steriliseringsbeholdere. Engangstetningene er tilgjengelige med eller uten prosessindikator.

	Bestillingsnr.
MELAstore® engangsforsigling uten indikator Emballasjeenhet: 100 stk hver	ME01198
MELAstore® engangsforsigling med indikator Emballasjeenhet: 100 stk hver	ME01199

Engangsforsigling uten indikator

Engangsforsigling med indikator

MELAstore® identifikasjonsplater

Identifikasjonsskilt kan legges til MELAstore® -brettene og MELAstore®- boksene for å sikre best mulig dokumentasjon og sporbarhet.

	Bestillingsnr.
MELAstore® holder for identifikasjonsplate	ME01197
MELAstore® identifikasjonsplate for utskrift av opptil 15 tegn og ekstra strekkode	ME01195
MELAstore® identifikasjonsplate høy for bruk med MELAstore® Eske 100 og MELAstore® Box 200 (Pakkeenhet: 10 stk)	ME01196

MELAstore®- brett holder for identifikasjonsskilt

Identifikasjonsskilt med tegn og strekkode

Identifikasjonsskilt for strekkode-etiketten til MELAprint® 60

Steriliseringsbeholdere med papirfiltre

Steriliseringsbeholderne har perforert lokk og er utstyrt med engangspapirfiltre. Leveringsomfanget inneholder 100 engangspapirfiltre.

Type	Dimensjoner (BxHxD, cm)		Bestillingsnr.
	Utside	Innside	
15K	12 x 4,5 x 18	11,4 x 2,4 x 15,8	ME01151
15M	12 x 4,5 x 35	11,4 x 2,4 x 30,8	ME01152
15G	12 x 8,0 x 35	11,4 x 5,1 x 30,8	ME01153
17K	14 x 5,0 x 20	13,5 x 2,7 x 17,8	ME01171
17M	14 x 5,0 x 41	13,5 x 2,7 x 36,8	ME01172
17G	14 x 9,0 x 41	13,5 x 6,2 x 36,8	ME01173
23M	16 x 6,0 x 42	15,5 x 3,8 x 37,8	ME01231
23G	16 x 12,0 x 42	15,5 x 9,8 x 37,8	ME01232
28M	16 x 6,0 x 32	15,5 x 3,8 x 27,8	ME01284
28G	16 x 12,0 x 32	15,5 x 9,8 x 27,8	ME01285

Type K

Type M

Type G

Engangspapirfiltre

(Emballasjeenhet på 100 stk hver)

For steriliseringsbeholder **15K** ME27325

For steriliseringsbeholder **15M / 15G** ME27335

For steriliseringsbeholder **17 K** ME27345

For steriliseringsbeholder **17M / 17G** ME27355

For steriliseringsbeholder **23M / 23G** ME26515

For steriliseringsbeholder **28M / 28G** ME27365

Programvare for dokumentasjon og godkjenning

MELAtrace® og MELAtrace® Pro kombinerer dekontamineringstrinnene for rengjøring og desinfeksjon med sterilisering på en intuitiv måte. Med bare noen få klikk frigjøres batchene og de relevante programloggene arkiveres i en manipuleringsikker reprosesseringslogg i MELAG Cloud eller på serveren din.

Og det beste: Du kan laste ned den nye MELAtrace® med påminnelsesfunksjon for dine rutinesjekker fra nettstedet vårt og teste det gratis i 3 måneder.

MELAtrace®

Programvare for dokumentasjon, godkjenning og sporbarhet

Tidskreditt 12 måneder
Tidskreditt 36 måneder
Tidskreditt 60 måneder



Bestillingsnr. ME21140
Bestillingsnr. ME21141
Bestillingsnr. ME21142

MELAtrace® Pro

Programvare for lasthåndtering, dokumentasjon, godkjenning og sporbarhet

Tidskreditt 12 måneder
Tidskreditt 36 måneder
Tidskreditt 60 måneder



Bestillingsnr. ME21143
Bestillingsnr. ME21144
Bestillingsnr. ME21145

Tilbehør for å koble MELAG-enheter til datamaskiner

Nettverkskabel lengde 2 m

Bestillingsnr.

ME15813

Nettverkskabel lengde 5 m

ME15814

Nettverkskabel lengde 10 m

ME15815

Rask Ethernet-svitsj (5 porter, 10/100 Mbit) **Nullmodemkabel** 5 m, 9-pinnere, SUB-D

ME76600

ME15810

Seriell grensesnittkabel for DAC Universal

Bestillingsnr.

ME15821

USB seriell adapter for å koble en MELAG autoklav med seriell grensesnitt eller MELAseal® Pro til et USB-grensesnitt til datamaskinen

ME80270

USB-kabel for å koble MELAseal® 200 til en datamaskin, lengde: 1,8 m

ME19902

MELAprint® 80 og MELAprint® 60

MELAprint® 80 skriver ut strekkodeetiketter i forbindelse med MELAtrace® og MELAtrace® Pro eller direkte med Careclave®, Vacuclave® 550 og Prime Line-autoklavene. I tillegg kan MELAprint® 80 også brukes som loggfilskriver for den nye Pro og Prime Line samt for eldre generasjoner av enheter (f.eks. Pro Class, Euroklav®, MELAquick® 12+ og MELAtronic® 15 EN+).

MELAprint® 60 er en strekkodeetikettskriver for optimal merking og sporbarhet av instrumenter med autoklaver i premiumklassen Evolution og Cliniclave® 45-serien.

MELAprint® 80 Loggfil og strekkodeetikettskriver inkl. nettverkskabel (1,5 m), USB-kabel (1,5 m) og etiketter med én rull

Bestillingsnr.

ME01108

MELAprint® 60 strekkodeetikettskriver inkl. nettverkskabel (1,5 m), USB-kabel (1,5 m) og etiketter med én rull

ME01160

MELAprint® 60 / 80-etiketter 6 hjul med 1000 etiketter hver, to ganger festet (for den manuelle dokumentasjonen)

ME41942

MELAprint® 60 / 80-etiketter 6 hjul med 1000 etiketter hver, en gang festet (for den automatiske dokumentasjonen)

ME41943

MELAprint® 80 skriverpapir for utskrift av loggfil, 2 ruller à 50 m hver

ME41946

MELAprint® 80

MELAprint® 60





Strekkode håndskanner

Denne kompakte skanneren leser inn strekkodene til lastelementer og tildeler dem automatisk i MELAtrace® Pro. MELAprint® 60 strekkoder kan også skannes og kobles til den digitale pasientjournalen.

Strekkode håndskanner inkl. holder

Bestillingsnr.

ME01110

Strekkodehånd
skanner



MELAflash®, MELAnet® Box, USB flash-stasjon

Logger fra Pro-Class, Euroklav®, MELAtronic® 15 EN+ og MELAquick® 12+ autoklaver kan lagres ved å bruke MELAflash® CF-kortskriveren eller en nettverkstilkobling via MELAnet® Box.

MELAflash® CF-kortskriver inkl. MELAflash® CF-kort og kortleser

MELAflash® CF-kort

MELAflash® kortleser

MELAnet® Box inkl. strømforsyning, nettverkskabel 2 m, RS232-kabel

USB-pinne for Careclave®, Vacuclave® 550, Pro og Prime Line og MELAseal® 200

Bestillingsnr.

ME01039

ME01043

ME01048

ME40296

ME19901

CF-kortskriver

MELAnet®- boks



Kortleser

MELAprint® 44

MELAprint® 44 skriver ut loggene i papirform. Loggskriveren kan kobles til Pro-Class, Euroklav®, MELAtronic® 15 EN+ og MELAquick® 12+ autoklaver og MELAseal® Pro. En ekstra nettverksadapter tillater integrering av loggskriveren i klinikkens nettverk.

MELAprint® 44 loggskriver

inkl. strømforsyningsenhet, seriell datakabel, blekkbånd og 1 papirrulle

Skriverpapir 5 ruller for MELAprint® 40, 42, 44

Nettverksadapter kreves når MELAprint® 44 er koblet til en autoklav i Premium-Class, Clinclave®- serien eller til MELAtherm® (inkl. nettverkskabel, 1,5 m)

Bestillingsnr.

ME01144

ME35226

ME40295

MELAprint® 44

Nettverksadapter



MELAdoc®

MELAdoc® skriver ut etiketter for innpakke instrumenter for å gi informasjon om steriliseringsdato, utløpsdato, batchnummer og personen som utsteder godkjenningen. Dokumentasjonen letter godkjenningsprosedyren i papirform.

MELAdoc® Labeller inkl. blekkpute og 1 rull med 750 etiketter

Etikettetter for MELAdoc® Labeller 4500 stk. inkl. blekkrulle

MELAdoc® dokumentasjonsark for sterilisering (10 pads à 100 ark hver)

MELAdoc® dokumentasjonsark for rengjøring og desinfeksjon (10 pads à 100 ark hver)

MELAdoc® Pen for manuell merking av innpakke instrumenter

Bestillingsnr.

ME01095

ME01096

ME01091

ME01093

ME22927

MELAdoc®



Vannbehandling for MELAG systemløsninger

MELAdem® vannbehandlingsenheter leverer demineralisert vann av høy kvalitet for å sikre best mulig verdibevaring av MELAG-enheter og beskyttelse av instrumentene dine.

MELAdem® 40

Vi anbefaler ionebytteren for Premium- og Pro-Class, Pro og Prime Line, MELAquick® 12+ og Euroklav® autoklaver med opptil tre steriliseringssykluser per dag.

MELAdem® 40 inkl. 2 kassetter med blandet lag

Vanngren for å koble MELAdem® 40 til en MELAG-autoklav med tilkobling av springvann

Harpiks med blandet lag (2 fylte kassetter)

Bestillingsnr.

ME01049

ME37241

ME61026



MELAdem® 40

MELAjet®

En spraypistol for MELAdem® 40 og MELAdem® 53 for skylling og spyling av instrumentene med demineralisert vann.

MELAjet® spraypistol

inkl. holder, 1,5 m slange og koblingsdeler for MELAG autoklaver

Bestillingsnr.

ME27300



MELAjet®

Tilkoblingssett for MELAG frittstående enheter

Settene inneholder koblinger og slanger for tilførsel av en MELAG frittstående enhet med demineralisert vann fra en vannbehandlingsenhet og vannutløpet til en sifon.

For Euroklav®

til MELAdem® 40 og 47

Bestillingsnr. ME09031

For Pro og Prime Line

til MELAdem® 40 og 47

Bestillingsnr. ME09040

For Premium-Class Evolution

til MELAdem® 40 og 47

Bestillingsnr. ME09034

Slanger og tilbehør for vanntilkoblingen

Påfyllingspumpe for Vacuclave® 550

for tilførsel fra ekstern vanntank

Bestillingsnr.

ME65010

Ekstern spillvannstank

for Vacuclave® 550

ME65020

Tappevannstilførselsslange EN 1717

med rørbøyle og tetninger, 5 m

ME24931

Vanntilførselsslange for MELAdem® 47

med tetninger, 5 m

ME37221

Slangeforlenger for tappevannstilførselsslange

med tetninger, 3 m

ME24933

Vannkran med sikkerhetskombinasjon

ME37310

Vannkran koblet til eksisterende vinkeltype

ME58130

Vannkranreduksjon fra 3/4" til slange 6 mm

ME09037

Y-stykke for å koble 2 forbrukere til en vanntilkobling (f.eks. en autoklav og MELAtherm®)

Bestillingsnr.

ME37315

Spillvannsslange for autoklaver med tetninger, 2 m

ME36585

Spillvannsslange for autoklaver med tetninger, 5 m

ME36586

Spillvannsslange for MELAtherm® med tetninger, 4 m

ME76410

Utenpåliggende sifon

ME37410

Dobbeltkammer sifon, DN40

ME26635

Hevert for Cliniclave® 45

ME72420

Dobbel støttehylse

ME37400

for å koble avløpsslanger til en sifonkobling

MELAdem® 53 og MELAdem® 53 C

De to ionebyttere for MELAtherm®, Vacuclave® 550 og Careclave® garanterer høyest mulig nivå av beskyttelse og omsorg for instrumentene dine. Som et resultat kan du unngå flekker og endringer i overflaten ved bruk av demineralisert vann fra springen. MELAdem® 53 / 53 C består av to patroner fylt med høykvalitets regenererbar harpiks, hvorav den ene alltid kobles til i dekontamineringsrommet. Systemets høye ytelse tillater tilkobling av ytterligere enheter.

MELAdem® 53 loneveksler

Høyde: 57 cm x ø 24 cm, 2 beholdere 20 liter hver **Bestillingsnr.** ME01038

Regenerering MELAdem® 53 (20 liter hver per beholder) **Bestillingsnr.** LA09020



MELAdem® 53 C loneveksler

Høyde: 45 cm x ø 24 cm, 2 beholdere 15 liter hver **Bestillingsnr.** ME01036

Regenerering MELAdem® 53 C (15 liter hver per beholder) **Bestillingsnr.** LA09021



Vannfordeler for MELAdem® 53 / MELAdem® 53 C

Vannfordeleren for tilkobling av flere enheter til MELAdem® 53 / MELAdem® 53 C: Den nye vannfordeleren tilbyr totalt 6 koblinger, 4x for 6/4 mm slanger (f.eks. for autoklaver) og 2x 3/4" koblinger (f.eks. desinfeksjonsmidler for vaskedekontaminator).

Bestillingsnr.

ME69005



Vannfordeler med totalt opptil 6 koblinger

MELAdem® 47

Høytytelsessystemet for omvendt osmose anbefales for autoklaver Premium Class, Pro og Prime Line, MELAquick® 12+ og Euroklav® med økte steriliseringskrav. Vennligst sjekk den ekstra bruken av trykkøkningssumpen når du kobler Careclave® eller Vacuclave® 550 til MELAdem® 47.

MELAdem® 47 inkl. lagertank, vannkran

Forfilter (finfilter) for MELAdem® 47 / 55 / 56 / 56 M

Aktivt kullfilter for MELAdem® 47 / 55 / 56 / 56 M

Blandet harpiks for MELAdem® 47 / 55 / 56 / 56 M

Bestillingsnr.

ME01047

ME37450

ME37460

ME37470



Trykkøkningssumpe

Trykkøkningssumpen for MELAdem® 47 er nødvendig for tilkobling av en Careclave® eller Vacuclave® 550 og eventuelt en annen autoklav dersom det statiske vanntrykket er under 3 bar.

Bestillingsnr.

ME22500

**Trykkøkning
pumpe**

Trykkøkningssumpe for MELAdem® 47



Vannstoppeventil

Når du kobler en vannbehandlingsenhet eller en autoklav til vannforsyningen, anbefaler vi installasjon av en vannstoppeventil for å bevirke automatisk avbrudd av vanntilførselen i tilfelle feil.

Bestillingsnr.

ME01056

ME22432

Vannstoppeventil

Ekstra sensor for vannstoppeventil



Notater

[illegible]

Notater

[illegible]

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

Telefon: 222 80 896

E-post: firmapost@svas.no

Nettside: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2025 svas svalland as, Oslo, Norway. Design og layout: Tor Stokkan
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as